


Brève introduction à la programmation

TopClean M / TopClean M M2



K-PROG_TopClean M_M2_9715540_FR_2013-04.docx

Utilisation du clavier pour la programmation

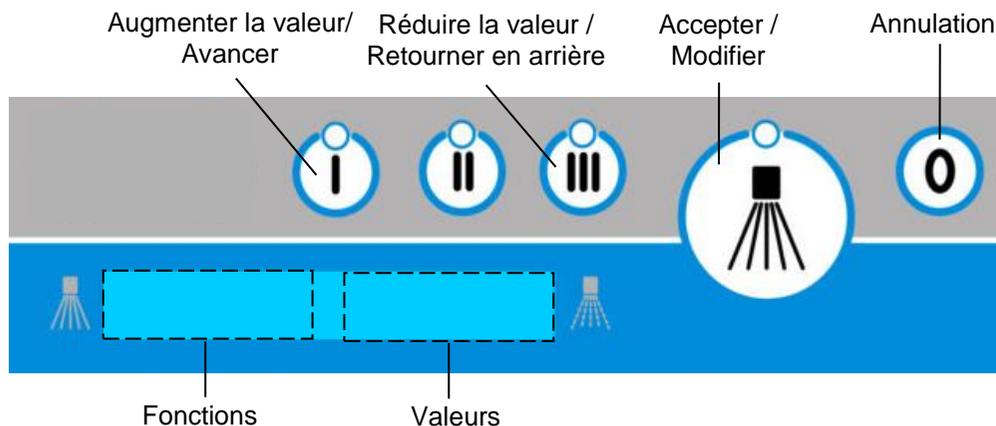

Généralités

Pour programmer la commande, l'alimentation électrique doit être garantie et l'appareil doit être mis totalement hors tension (aucun voyant allumée).

Entrée du code :

Visualisation des paramètres: **CODE 10000**

Modification des données de service: **CODE 10001**



Appuyer sur la touche « 0 » jusqu'à l'apparition de Code 1---- à l'écran. (env. 3 sec.) Le mode de programmation peut à tout moment être interrompu en appuyant de

nouveau sur la touche « 0 ».

Le chiffre à modifier clignote. Les valeurs de l'affichage peuvent être augmentées à l'aide de la touche « I » et acceptées en appuyant sur « Accepter ». De cette manière chaque chiffre sera sélectionné l'un après l'autre jusqu'à ce que le code soit entré en intégralité.

En cas d'entrée erronée, l'information 122 s'affiche lorsque l'on quitte la fonction de saisie du code; si l'entrée de tous les chiffres est effectuée correctement, l'accès au mode des données de service est possible.

Faire avancer avec la touche « I », revenir en arrière avec la touche « III ».

Les principales positions suivantes sont disponibles dans le mode «Service»:



Visualisation des paramètres / modification

1-2 ---- Ventiler la pompe de rinçage

1-3 ---- Ventiler la pompe du détergent

1-5 ---- Réinitialisation affichage décarbonatation

partielle

Visualisation des paramètres:

1-1 ---- Activer la touche « Accepter » pour entrer dans la position et sélectionner le paramètre avec la touche « I » ou « III ». Le paramètre Pxxx est affiché à gauche et la valeur correspondante apparaît à droite. Revenir à l'étape précédente avec la touche « 0 ».

Modifier le paramètre.

1-1 ---- Sélectionner le paramètre de la même façon que lors de la visualisation, mais l'accès se fait par le biais du code destiné à la « Modification des données de service ».

Sélectionner un paramètre avec la touche « Accepter » pour pouvoir le modifier ensuite - le voyant lumineux « valeurs » clignote.

Sélectionner la valeur avec la touche 0 « I » ou « III » et mémoriser avec la touche « Accepter ».

Pour quitter le niveau actuel et revenir au niveau précédent, appuyer sur la touche « 0 ».

Ventilation la conduite du produit de rinçage 1-2 ---

Ventiler la conduite du détergent 1-3 ---- (n'existe pas pour pour dosage à dépression ADT)

Sélectionner la position choisie. La pompe de dosage sélectionnée est activée et le temps de fonctionnement restant est affiché.



Pour quitter le programme de ventilation, appuyer sur la touche « Arrêt ».

Info- / Affichage des erreurs:



Lors de l'affichage d'informations, les instructions doivent être observées. L'opération de lavage peut être poursuivie.



En cas d'affichage d'erreurs, il n'est en général plus possible de procéder à un lavage. Informer le service après-vente.

Mode des paramètres

Attention : La modification des paramètres réglés par le fabricant peut engendrer des restrictions relatives au fonctionnement général de la machine. La modification arbitraire des paramètres par des personnes non autorisées a pour conséquence l'invalidation complète de la garantie et annule notre responsabilité concernant le produit.

N° par.	Paramètres de service/ Options de réglage	Utilisation comme	Plage de valeurs	Unité	Paramètre par défaut	remarque
101	Programme de nettoyage / touche 1	Paramètre	1 .. 50	-	1	Attribuer le n° du programme de nettoyage à la touche 1 ; Attribution configurable
102	Programme de nettoyage/ touche 2	Paramètre	1 .. 50	-	2	Attribuer le n° du programme de nettoyage à la touche 2 ; Attribution configurable
103	Programme de nettoyage / touche 3	Paramètre	1 .. 50	-	3	Attribuer le n° du programme de nettoyage à la touche 3 ; Attribution configurable
104	Produit de rinçage Quantité de dosage	Paramètre	0,10 .. 1,00	ml/litres d'eau	0,2	Selon les indications, régler approximativement la valeur, corriger ensuite selon la dureté de l'eau et le résultat du nettoyage.
105	Dosage du détergent	Paramètre	0,1... 20,0	ml/litres d'eau	2,0	Selon les indications, régler approximativement la valeur, corriger ensuite selon la dureté de l'eau et le résultat du lavage.
106	Degré de dureté	Paramètre	0 .. 50	[°dH]	30	Quantité d'eau douce entre deux régénérations en fonction du degré de dureté
107	Allumer / arrêter le signal sonore	Paramètre	0/1	-	1	Allumer / arrêter le message sonore final par l'émission d'un bip
108	Mode affichage de l'état vide	Paramètre	0/1	-		Affichage de l'état vide 0: Au moyen de l'INFO 420, 520 1: Edition de caractères spéciaux
109	Décarbonatation partielle ou complète disponible?	Paramètre	0, 1, 2	-		Déminéralisation partielle ou complète disponible ? 0: Non 1: Décarbonatation partielle (TE) 2: Décarbonatation complète (VE)
110	Litres/dureté par type de cartouches	Paramètre	0 .. 250	1000 l		A l'atteinte de la capacité de la cartouche (litres / degré de dureté) remplacer cartouche »(INFO 725) sera affiché (uniquement pour TE)
111	Durée totale de fonctionnement affichage	Affichage	5-chiffres	Heures	0	Durée de fonctionnement, uniquement requête
112	Nombre de cycles de lavage	Affichage	5-chiffres	-	0	Cycles de lavage / charges, uniquement requête
113	Nombre des cycles le lavage depuis la dernière réinitialisation	Affichage	5-chiffres	-	0	Cycles de lavage / charges, retour possible

N° par.	Paramètres de service/ Options de réglage	Utilisation comme	Plage de valeurs	Unité	Paramètre par défaut	remarque
114	N° de série:	Affichage	8-chiffres	-	N° de série:	Possibilité de consulter les valeurs déterminées par le fabricant. Attention : Les premiers 5 chiffres sont affichés en alternance avec les 3 trois derniers chiffres!
115	L'état capacité restante dans la cartouche	Affichage	0 .. 100	%		Uniquement pour décarbonatation partielle/complète: TE: Indication en % VE: 100 = OK 0 = Remplacer
119	Communication IR	Paramètre	0/1	-	1	Possibilité de blocage de la communication via l'interface IR (0)
120	Appeler les paramètres de service en fonction des valeurs par défaut	Paramètre	0/1	-	0	Actif uniquement avec la réinitialisation du réseau MARCHE / ARRET. Attention ! Toutes les modifications des paramètres de service sont réinitialisées. La réinitialisation du réseau doit être effectuée dans un laps de temps de 5 min., autrement les paramètres par défaut définis par le fabricant ne seront pas chargés. Sans réinitialisation du réseau l'information 123 est affichée.

TopClean M

Programme de nettoyage n°	Valeur prescrite température surchauffeur	Valeur prescrite temps de lavage	
		Lavage	Total
1	55	584	600
2	55	704	720
3 (WW)	55	886	900

WW = Programme de renouvellement d'eau

TopClean M M2

N°	Valeur de consigne de la température du surchauffeur	Valeur de consigne de la température de la cuve	Valeur de consigne du temps de nettoyage	
			Nettoyage	Total
	[°C]	[°C]	[s]	[s]
1	59 (54)*	61 (56)*	335	360
2	59 (54)*	61 (56)*	515	540
3 (WW)	59 (54)*	61 (56)*	695	720

WW = programme de renouvellement d'eau (option)

*) seulement en combinaison avec Dr. Weigert neodisher Dekonta AF