


Reinigungs- und Desinfektionsgerät TOPIC.2

Kurzbetriebsanleitung



Klarschriftanzeige

Zeigt den Betriebszustand, Warnungen, Fehler oder Wartungsinformationen an.

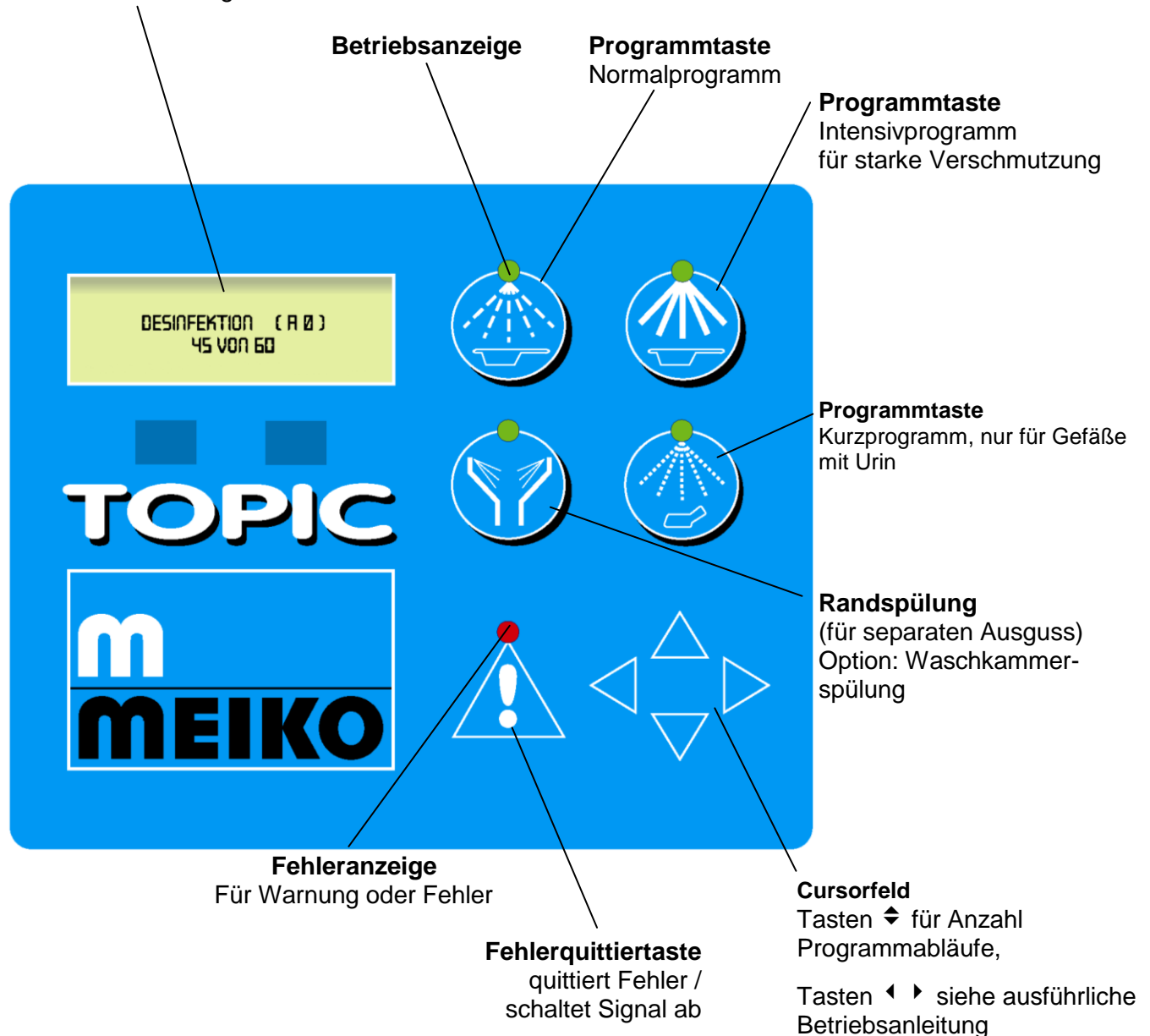

Betriebsanzeige

Programmtaste
Normalprogramm

Programmtaste
Intensivprogramm
für starke Verschmutzung

Programmtaste
Kurzprogramm, nur für Gefäße
mit Urin

Randspülung
(für separaten Ausguss)
Option: Waschkammer-
spülung

Fehleranzeige
Für Warnung oder Fehler

Fehlerquittiertaste
quittiert Fehler /
schaltet Signal ab

Cursorfeld
Tasten ◀ ▶ für Anzahl
Programmabläufe,
Tasten ◀ ▶ siehe ausführliche
Betriebsanleitung