

TopCut B

Transforme su TopLine en un dispositivo de corte

TopCut B – Más flexible todavía en lo que se refiere a seguridad, higiene y rentabilidad. El dispositivo innovador para cortar y abrir bolsas de orina y secreciones en el equipo TopLine de MEIKO.



TopCut B

Un dispositivo de corte que se puede cambiar con rapidez y facilidad en lugar de los portautensilios estándar de serie. Abre, vacía y desinfecta las bolsas de orina y secreciones de forma segura y económica.

Seguro y rentable al 100 %


Su lavacuñas MEIKO es más flexible todavía, gracias a la incorporación del dispositivo de corte y apertura **TopCut B**. Su TopLine pasa en un abrir y cerrar de ojos, de limpiar y desinfectar utensilios sanitarios, a cortar, vaciar y desinfectar bolsas de orina y secreciones muy fluidas, de forma económica y efectiva. La operación de corte se realiza a puerta cerrada, con lo cual la operación es higiénica y totalmente segura para el personal y los pacientes.

- Se reduce el volumen de basura
- Se reducen las tasas de residuos
- Técnica fiable de corte
- Seguridad para el personal y los pacientes gracias a que las bolsas se abren y se cortan a puerta cerrada
- Desinfección dentro del aparato
- Protección efectiva contra heridas de corte
- La cuchilla se desgasta poco y apenas requiere mantenimiento



Así es como el dispositivo de corte y apertura **TopCut B** transforma su **TopLine** rápida y fácilmente en un dispositivo de primera clase para abrir y desinfectar las bolsas de orina y secreciones.

Reducción de los gastos de residuos debido a la minimización del volumen de basura

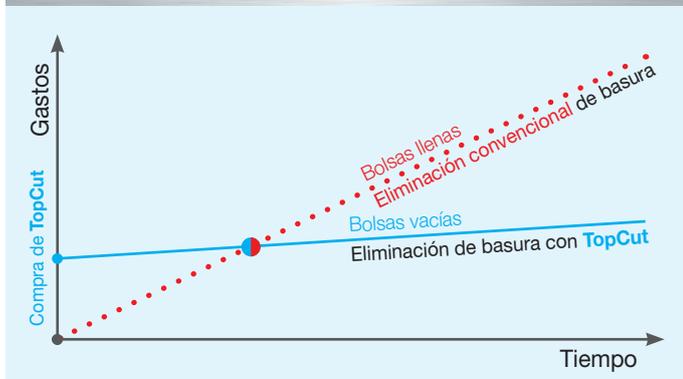

Simplemente la mejor solución en la práctica

TopCut B convence en la práctica por su operación fiable y sencilla.

- Las bolsas se colocan con rapidez y facilidad
- La cuchilla empieza a desplazarse sólo cuando la puerta está casi cerrada. Gracias a esto las bolsas se abren de forma segura e higiénica
- La cuchilla regresa automáticamente a la posición de seguridad de partida cuando la puerta se abre
- Se pueden procesar muchos más tipos de bolsas. ¡No dude en preguntarnos al respecto!



1 Simplemente extraiga el soporte en el que se colocan los utensilios sanitarios habituales



2 Coloque el **TopCut B** con ayuda de un sistema inteligente de cambio rápido habituales



3 Coloque la bolsa de orina o de secreciones



4 Cierre la puerta. La operación de apertura y corte empieza automáticamente

