

TopCut B

Utilisez la technologie Topline pour vider les poches en toute sécurité

TopCut B – une garantie en termes d'hygiène, de sécurité et d'économie :
Un dispositif innovant pour couper les poches de dialyse, d'urine ou de toute autre substance liquide dans le TopLine MEIKO.



TopCut B

Changement simple et rapide entre le support de série pour les ustensiles de soin et le dispositif permettant de couper les poches. Sûr et économique, le système permet de vider et désinfecter des poches de liquide.

Une sécurité garantie

Fortes réduction des coûts de traitement des déchets


Une fois inséré dans votre appareil Topline, le support **TopCut B** vous permet de couper, vider et désinfecter les poches de dialyse, urine ou de tout autre liquide. Tout le processus a lieu dans un environnement clos et étanche, pour une garantie complète d'hygiène aussi bien pour le personnel soignant que les patients.

- Réduction du volume / poids des déchets
- Réduction des coûts de traitement des déchets
- Système totalement fiable
- Processus dans un système étanche pour une garantie de sécurité
- Désinfection dans l'appareil
- Système de coupe à faible usure



Simple et rapide : si vous souhaitez rendre un appareil polyvalent, passez simplement et rapidement du lave-bassins au **TopCut B.**

Réduction des redevances sur les déchets grâce à une forte réduction du volume.

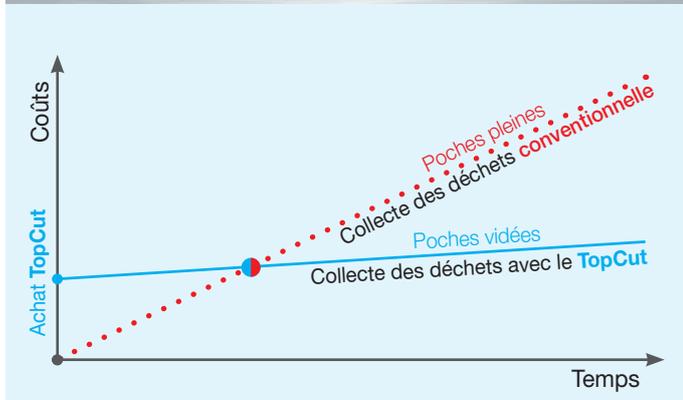

1 Sortir le support pour les ustensiles de soin



2 Installer facilement le **TopCut B**



3 Mettre en place la poche




4 Fermer la porte, le processus de coupe et de désinfection est lancé automatiquement

Un appareil très fonctionnel

Dans la pratique, le système **TopCut B** est particulièrement convaincant grâce à une manipulation simple et fiable.

- Mise en place simple et rapide des poches
- Le couteau ne sort qu'à la fermeture de la porte et assure ainsi une manipulation sûre et une garantie d'hygiène
- Le couteau revient automatiquement dans la position de départ, protégée à l'ouverture de la porte.
- Il est possible d'utiliser un grand nombre de types de poches (nous consulter)

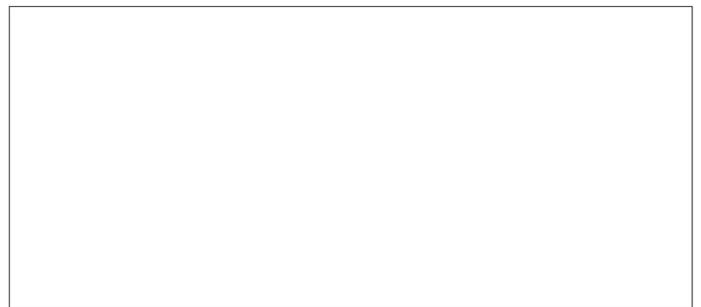

780.030.00.05.10/F/KD/1000

Sous réserve de modification en vue de toute amélioration technique.