

MEIKO TopCut B

Urządzenie do rozcinania worków na mocz i wydzieliny do zastosowania we wszystkich myjniach-dezynfektorach MEIKO



MEIKO TopCut B

Urządzenie do rozcinania worków w myjniach-dezynfektorach MEIKO

BEZPIECZNE I EKONOMICZNE

Urządzenie do rozcinania worków *TopCut B* rozszerza możliwości zastosowania myjni-dezynfektorów MEIKO. W mgnieniu oka umożliwia ono przejście od mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych do prostego i ekonomicznego rozcinania, opróżniania i dezynfekowania worków na mocz i wydzieliny z ciekłą zawartością. Można je stosować we wszystkich myjniach-dezynfektorach MEIKO – zarówno z ręcznym, jak i automatycznym otwieraniem drzwi (opcja).



KORZYŚCI

- Redukcja ilości śmieci
- Obniżenie kosztów wywozu odpadów
- Bezpieczeństwo dla personelu i pacjentów – cały proces odbywa się w zamkniętym systemie
- Dezynfekcja wewnątrz urządzenia
- Skuteczna ochrona
- Niewymagający konserwacji i charakteryzujący się długą żywotnością nóż

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE

TopCut B przekonuje dzięki prostej obsłudze i niezawodności. Wbudowany nóż wysuwa się dopiero po zamknięciu drzwi. Po otwarciu drzwi komory mycia nóż automatycznie powraca do bezpiecznej pozycji wyjściowej.

- Higieniczne i bezpieczne rozcinanie
- Łatwe i szybkie umieszczanie worków
- Możliwość dostosowania do różnych rodzajów worków

TAK TO DZIAŁA



1. Wyjąć uchwyt na standardowe naczynia sanitarne.



2. W łatwy sposób umieścić *TopCut B* za pomocą inteligentnego systemu do szybkiej wymiany wyposażenia.




3. Włożyć worek na mocz i wydzieliny.



4. Zamknąć drzwi – proces rozpocznie się automatycznie.

Niższe koszty wywozu śmieci dzięki redukcji ich ilości

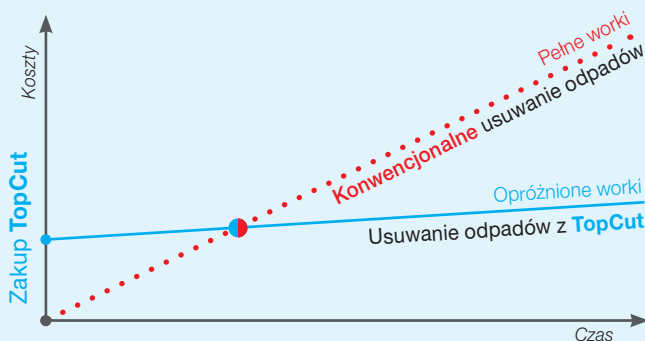

MEIKO Clean Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Pożaryskiego 32 · 04-703 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 1140063; 22 1140064 · info@meiko.com.pl · www.meiko.pl

