


MEIKO TopCut H

Dispositivo de corte para bolsas de orina y secreciones así como portarrecipientes para todos los utensilios sanitarios estándar, todo en uno

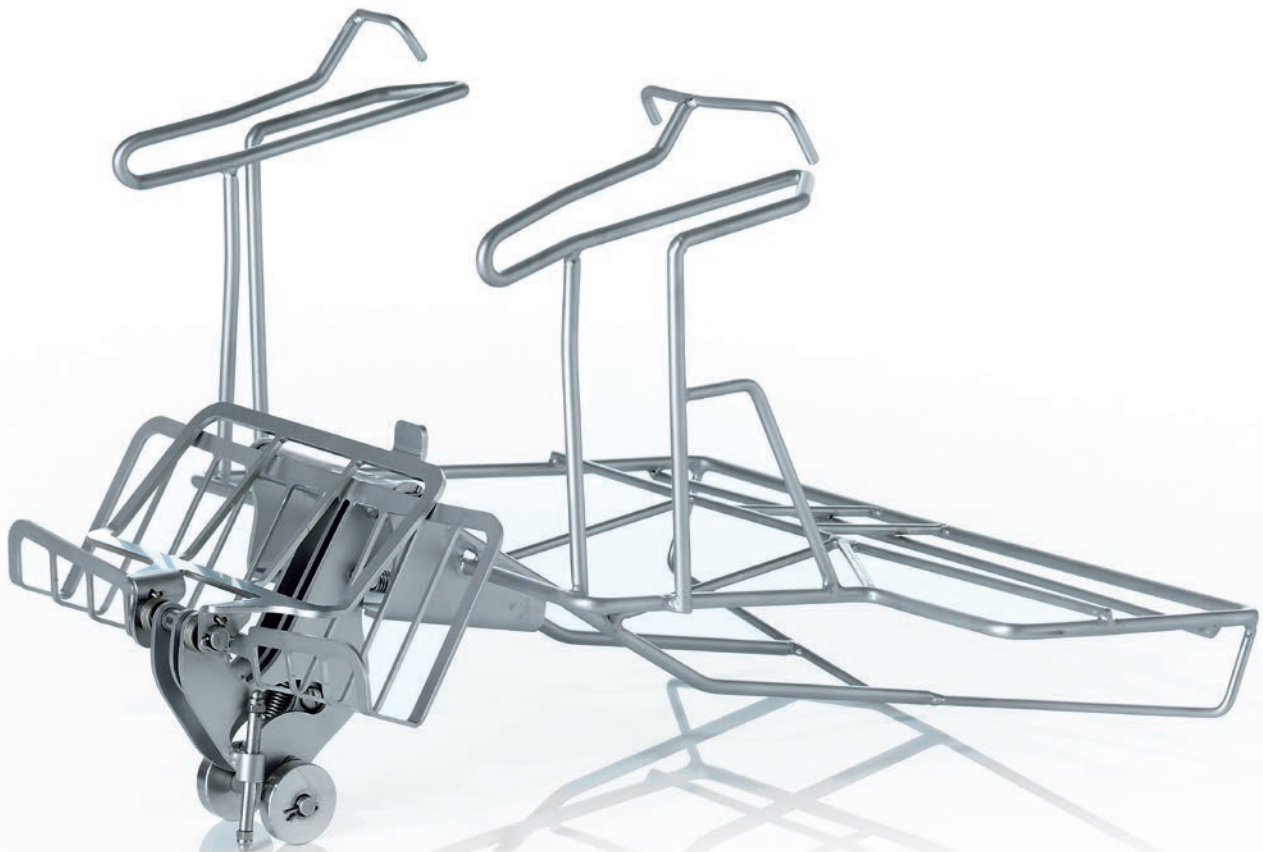

MEIKO TopCut B

Transforme su máquina de limpieza y desinfección de MEIKO en un dispositivo de corte

SEGURO Y RENTABLE

Gracias al portarrecipientes universal multifuncional *TopCut H* con cortador de bolsas de orina y secreciones integrado, su máquina de limpieza y desinfección de MEIKO es aún más flexible:

- para la limpieza y desinfección de los utensilios sanitarios utilizados normalmente en la práctica
- para facilitar el corte, el vaciado y la desinfección de bolsas de orina y de secreciones con contenido de gran fluidez.

Los utensilios sanitarios y los diferentes tipos de bolsas pueden ser vaciados, limpiados y desinfectados alternativamente en el mismo soporte. Utilizable en todas las máquinas de limpieza y desinfección de MEIKO, ya sea con una puerta de la máquina manual o automática (opcional).


VENTAJAS

- Aplicación flexible
- Reducción del volumen de basura
- Reducción de las tasas de recogida de basura
- Seguridad para el personal y los pacientes gracias a un corte en un sistema cerrado
- Desinfección en el dispositivo
- Protección contra cortes efectiva

SIMPLEMENTE EL MEJOR EN LA PRÁCTICA

TopCut H convence en la práctica gracias a su sencilla y fiable manipulación. La cuchilla integrada solo sale si la puerta del dispositivo está casi cerrada. Al abrir la puerta de la cámara de lavado, retrocede hacia la posición de salida protegida de forma automática.

- Corte seguro e higiénico
- Colocación sencilla y rápida de las bolsas
- Se pueden utilizar muchos otros tipos de bolsas bajo demanda

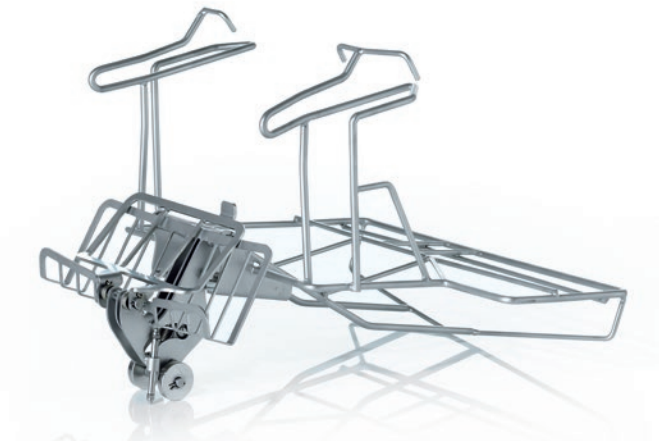

El *TopCut H* como soporte de recipientes

El *TopCut H* como dispositivo de corte



El *TopCut H* está concebido para todos los utensilios sanitarios estándar y para muchos tipos de bolsas

MEIKO Clean Solutions Ibérica S.L.U. · Ctra. de l'Hospitalet, 147-149
Cityparc Ronda de Dalt, Edificio Atenas · 08940 Cornellà de Llobregat, España
Tfno. +34 93 7817731 · info@meiko.es · www.meiko.es

Menos tasas para la recogida de basura gracias a la reducción del volumen de basura

