

# TopLine en detalle

Máquina de limpieza y desinfección



**TopLine** – Seguridad que convence



En el sector de los cuidados asistenciales, la seguridad en la higiene cobra una relevancia mayor que nunca antes.

El bienestar de los pacientes es de importancia fundamental.

El tratamiento higiénico de utensilios sanitarios requiere de una tecnología flexible y adaptable en todo momento: MEIKO tiene la solución limpia. La serie de equipos *TopLine* se adapta perfectamente a las exigencias individuales de sus pacientes y a las distintas infecciones.

Una ventaja especial para su comodidad radica en la posibilidad de activar en todo momento las máquinas de limpieza y desinfección *TopLine* con los valores  $A_0$  exigidos actualmente. Usted selecciona el programa. Es posible seleccionar los valores para una higiene básica en coordinación con la sección de higiene hospitalaria y, en caso de necesidad, seleccionar los siguientes valores  $A_0$ :  $A_0$  60,  $A_0$  600,  $A_0$  3000.

Soluciones limpias para una perfecta higiene y una excelente rentabilidad – made by MEIKO.

## Limpieza absoluta en tres pasos:



**1** Seleccione el programa de lavado teniendo en cuenta el tipo de utensilios sanitarios y el grado de suciedad, y mantenga pulsada la tecla.



**2** En la pantalla se visualizan los valores  $A_0$  seleccionables, es decir,  $A_0$  60 /  $A_0$  600 /  $A_0$  3000. Una vez alcanzado el valor determinado, suelte la tecla.



**3** Después de soltar la tecla, el programa arrancará automáticamente.

# TopLine – Tecnología y mucho más

Con *TopLine* de MEIKO irá sobre seguro. Esta máquina de limpieza y desinfección para productos médicos ofrece seguridad en toda la línea. Tanto en el tratamiento de utensilios sanitarios como en su manejo, la serie *TopLine* destaca por su tecnología que garantiza la seguridad de los pacientes y del personal. Siempre en el centro de atención: los requisitos de la norma EN ISO 15883. ¡Descubra ahora los puntos más destacados y convéncese de las ventajas que ofrece la máquina *TopLine* de MEIKO!

Separación de la red de agua tipo AA conforme a EN 1717

Sistema electrónico *MIKE 2*

Detector de proximidad para abrir y cerrar la puerta (opcional)

Sistema de toberas para el lavado intenso


Cámara de lavado embutida, se limpia automáticamente

Potente tobera rotativa telescópica

Control de sifón

Filtro HEPA (H13)

Interruptor de pie para abrir y cerrar la puerta (opcional)

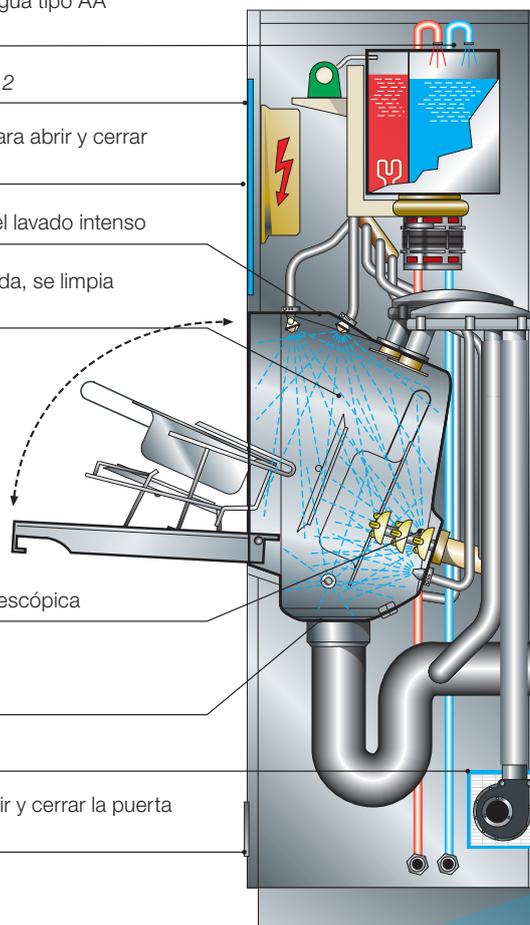

**Steam  
Stop**

La perfecta estanqueidad al vapor del sistema garantiza una máxima seguridad laboral y de higiene.

**Power  
Clean**

La potente tobera rotativa telescópica y el sistema de lavado optimizado, dispuesto en todo el contorno, garantizan una limpieza eficiente y perfecta de los utensilios.

**Thermo  
Control**

El control de los valores  $A_0$ , seleccionables a voluntad\*, con regulación mediante sensores de temperatura de control mutuo, garantiza una máxima seguridad en la desinfección.

\* $A_0$  60,  $A_0$  600,  $A_0$  3000.



## Dry&Cool

Procedimiento patentado: «el secado y el enfriamiento con aire filtrado» garantizan utensilios absolutamente higiénicos y a temperaturas agradables al tacto.

## T.A.D.

Después de cada ciclo de lavado, el *Total Auto Disinfection (T.A.D.)* protege el sistema de tuberías de agua al completo de manera óptima frente a la recontaminación.




## Chem Code

La inequívoca codificación de la lanza de succión evita que se confundan los medios de operación y garantizan un proceso correcto.

## Ca<sup>20</sup> Stop

El control mediante sensores de la dosificación del descalcificador con abri-llantador y del detergente garantiza la seguridad operacional de la máquina.

TopLine de MEIKO ofrece una enorme variedad de posibilidades de configuración para cualquier tipo de cuarto séptico: desde la máquina individual para el montaje en el suelo, en la pared o en baños hasta el práctico modelo bajo la mesa de trabajo y la combinación sanitaria compacta. ¡Configure su instalación a la medida de sus deseos! Encontrará más información sobre las posibilidades de configuración en nuestro folleto actual TopLine de MEIKO. El equipo de MEIKO le ayudará con mucho gusto a encontrar la solución ideal a sus exigencias individuales a la higiene. ¡Llámenos!

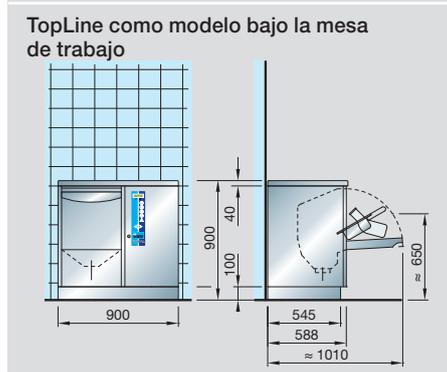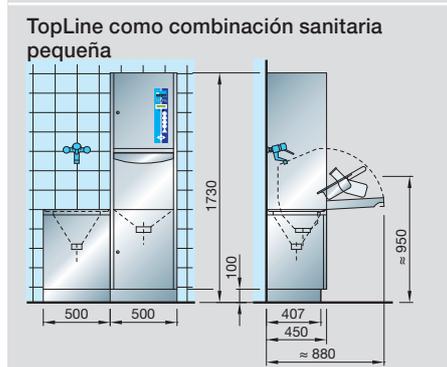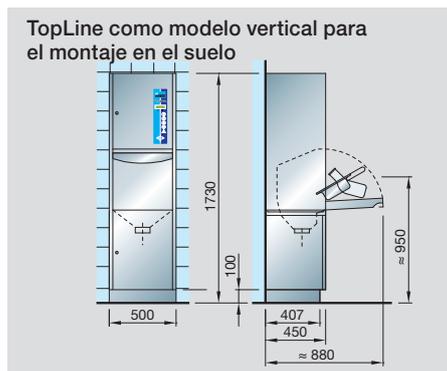

**TopLine 10**  
para el montaje mural, de forma suspendida. Modelo básico. Ocupa poco espacio y está listo para la conexión.



**TopLine 20**  
pequeña combinación sanitaria compuesta de la máquina TopLine 20 con zócalo y la pila especialmente diseñada para esta combinación (opcional).



**SAN 14 B**  
Combinación sanitaria compacta compuesta de la máquina TopLine 40, pila, lavamanos y superficie de depósito. Incluye placa de protección antisalpicaduras y borde realzado.



**SAN 20 W**  
Combinación sanitaria con un armario de 600 mm. Compuesta de la máquina TopLine 40, pila, lavabo y superficie de depósito. Incluye una placa de protección antisalpicaduras y borde realzado.

MEIKO Clean Solutions Ibérica S.L.U. · Ctra. de l'Hospitalet, 147-149  
Cityparc Ronda de Dalt, Edificio Atenas · 08940 Cornellà de Llobregat, España  
Tfno. +34 93 7817731 · Fax +34 93 3775233  
www.meiko.es · info@meiko.es

MEIKO Clean Solutions Mexico S. de R.L. de C.V. · Av. Santa Fe No. 170,  
Oficina 6-2-24K · Col. Santa Fe · 01376 Ciudad de México  
Tfno. +52 55 41722551 · www.meiko-mexico.com · info@meiko-mexico.com

Fabricante:  
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Alemania  
Tfno. +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179  
www.meiko-global.com · info@meiko-global.com



720.031.01.03.21/ES/

Reservado el derecho a realizar modificaciones condicionadas por mejoras técnicas