

TopLine

전체 라인용 보완 장치



TopLine 세부 사항



TopLine - 기술 그 이상

DIN EN 1717에 따른 자동 배수장치 AA

MIKE 2 전자 장치

도어 조작용 근접 스위치(옵션)

집중 세척을 위한 노즐 시스템


깊은 세척함, 자동 세척

강력한 회전식 리프트 노즐

사이펀 제어기

HEPA 필터(H13)

도어 조작용 풋 스위치(옵션)

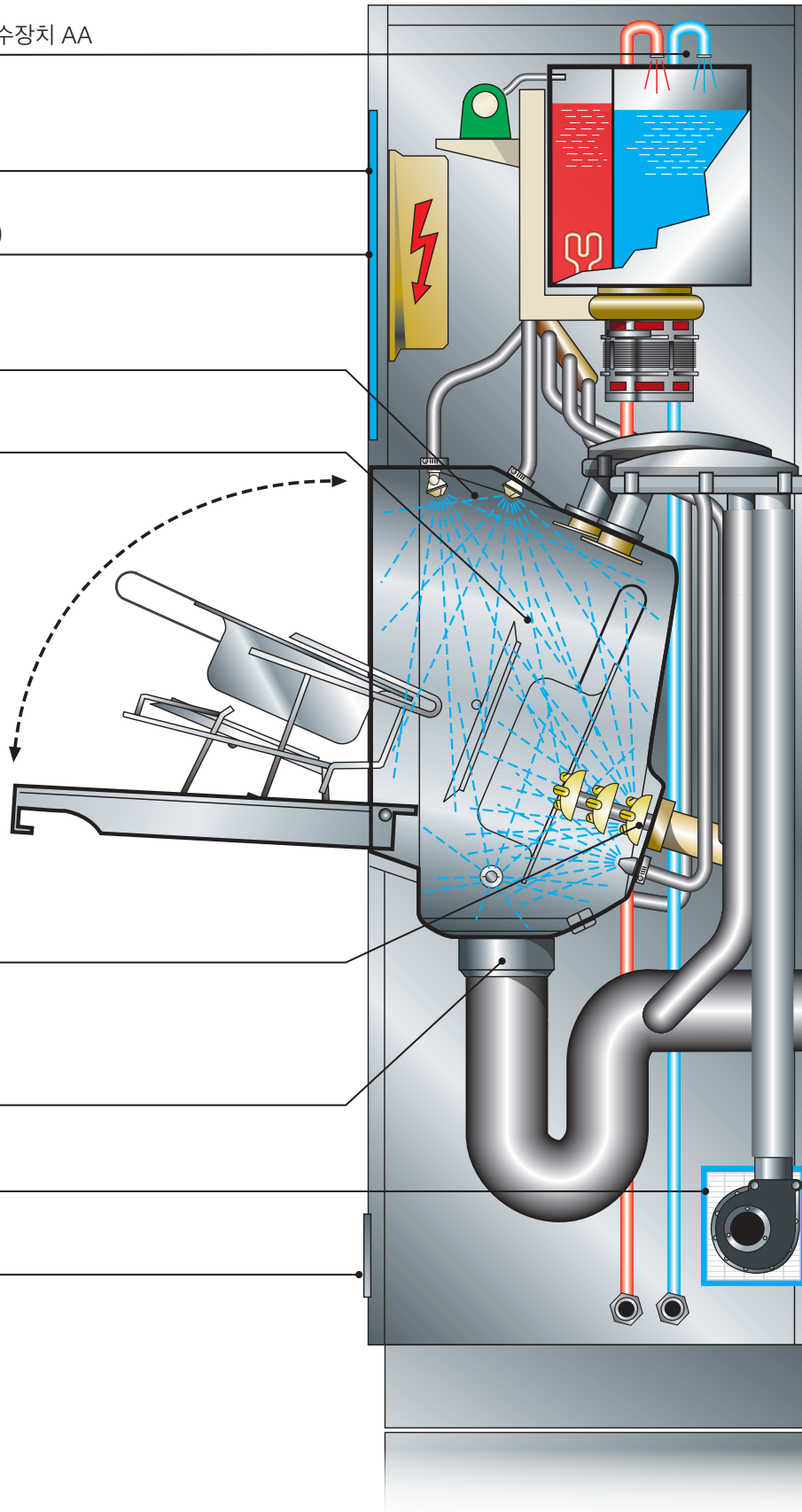

안전 실현



위생 안전은 의료 분야에서 그 무엇보다도 중요합니다.
중심 가치: 환자의 행복.



MEIKO TopLine을 사용하면 안전합니다. 본 의료 제품용 세척 살균기는 전체 라인용 보안을 제공합니다. 케어용기 준비 또는 장비의 작동 여부에 관계없이, TopLine은 환자와 직원의 안전을 위한 기술을 제공합니다.

언제나 한 눈에 보기: DIN EN ISO 15883 요건을 준수합니다. 지금 바로 주요 제품군을 살펴보고 MEIKO TopLine만의 장점을 누리세요!

혁신적인 솔루션을 통한 부가가치 창출



Steam Stop

특허 인증된 완전 시스템 증기
기밀성으로 최고 수준의 작업 및
위생 안전을 보장합니다.

Power Clean

강력한 회전식 리프트 노즐과
최적화된 다용도 세척 시스템으로
청소 장비를 마지막까지
효율적으로 세척할 수 있습니다.

Thermo Control

온도 센서를 모니터링함으로써
제어할 수 있으며 자유롭게 선택
가능하고 특허 인증된 * A₀ 값
제어기를 통해 높은 수준의 소독
안전성을 보장합니다.

*60-3000.

Dry&Cool

여과된 공기를 이용하여 건조 및
재냉각하여 위생적이며 안전하고
다루기 쉬운 관리를 보장합니다.



T.A.D.

**Chem
Code**

Ca²⁰ Stop

각 충전 주기에 따른 완전 자동 소독(T.A.D., Total Auto Disinfection)을 통해 전체 급수 시스템이 다시 오염되는 것을 최적의 방식으로 예방합니다.

독특한 석션 램프 코딩을 통해 장비 혼동을 방지하고 공정 유효성을 보장합니다.

행금 보조제 또는 세제가 포함된 연화제 투입량 센서 제어 모니터링으로 장치 작동에 대한 안전을 보장합니다.

TopLine - 다양한 맞춤형 옵션

MEIKO TopLine - 다양한 설계 옵션을 갖추었습니다. 깨끗하지 않은 오물처리실마다 필요한 모든 것이 준비되어 있습니다. 스탠드, 벽면 장착 또는 습실에 설치하기 위한 위한 개별 장치에서부터 실용적인 언더싱크 장치와 컴팩트한 케어 콤비네이션에 이르기까지. 맞춤형 솔루션을 살펴보세요!

최신 브로셔의 MEIKO TopLine 프로그램 개요에서 개별 옵션에 대해 자세히 확인할 수 있습니다.




TopLine 10
바닥에 닿지 않는 벽 설치용. 기본 모델. 공간을 절약하고 연결이 쉬움.




TopLine 20
장치 받침대와 맞춤형으로 개발된 개수대를 갖춘 TopLine 20으로 구성된 소형 케어 콤비네이션(옵션).

TopLine 스탠드 장치

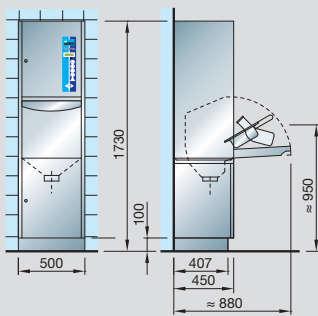

TopLine 소형 케어 콤비네이션

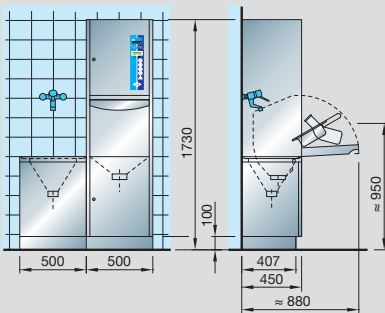


SAN 14 B
TopLine 40, 개수대, 세면대, 거치대로 구성되어 컴팩트한 케어 콤비네이션. 물 튜브 방지막과 업스탠드 포함.



SAN 20 W
600 mm의 캐비닛 공간을 갖춘 케어 콤비네이션. TopLine 40, 개수대, 세면대, 거치대로 구성. 물 튜브 방지막과 업스탠드 포함.

TopLine 언더싱크 장치

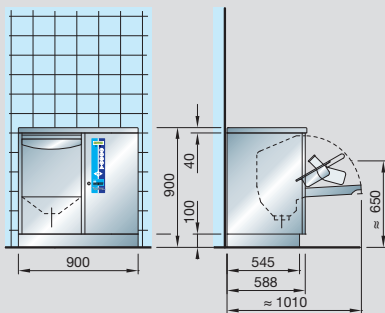

MEIKO 팀은 귀하의 위생 요건을 각각 모두 만족하는 청결 솔루션을 찾기 위해 노력합니다. 언제든지 문의 바랍니다!

