

TopLine in detail

Bedpanspoelers



TopLine – Overtuigende veiligheid



Hygiënezekerheid is meer dan ooit het allerbelangrijkste in de zorg.
De focus ligt altijd op het welzijn van de patiënt.

Een perfecte hygiënische reiniging vereist een flexibele techniek die op elk moment kan worden aangepast: MEIKO heeft de schone oplossing. De *TopLine* serie kan perfect worden aangepast aan de individuele behoeften van uw patiënten en de verschillende infecties.

Het bijzondere comfort: *TopLine* bedpanspoelers kunnen op elk moment worden geactiveerd met de vereiste A_0 -waarden. U bepaalt het programma. De volgende A_0 -waarden kunnen worden geselecteerd voor de basishygiëne of al naar gelang de behoefte: A_0 60, A_0 600, A_0 3000.

Schone oplossingen voor optimale hygiëne en een optimaal rendement – made by MEIKO.

In drie stappen naar perfecte hygiëne:



- 1** Bepaal het reinigingsprogramma op basis van de te reinigen hulpmiddelen en de vervuilingsgraad. Houd de toets ingedrukt.



- 2** Het display laat de A_0 -waarden zien die kunnen worden geselecteerd: A_0 60 / A_0 600 / A_0 3000. Laat de toets los wanneer de opgegeven waarde is bereikt.



- 3** Zodra u de toets loslaat, start het programma automatisch.

TopLine – Meer dan techniek

Met MEIKO *TopLine* speelt u op zeker. De bedpanspoeler voor medische hulpmiddelen biedt veiligheid over de hele linie. Zowel bij het reinigen van de zorghulpmiddelen als bij de bediening van de machines spreekt *TopLine* aan met techniek die voor veiligheid van patiënt en personeel staat. Altijd met het oog op de vereisten van EN ISO 15883. Ontdek nu de highlights en overtuig uzelf van de voordelen van de MEIKO *TopLine*!

Vrije uitloop AA conform EN 1717

MIKE 2 elektronica

Bewegingssensor voor deurbediening (optioneel)

Sproeisysteem voor intensief reinigen


Diepgetrokken waskamer, zelfreinigend

Krachtige telescopische roterende straal

Sifoncontrole

HEPA-filter (H13)

Voetschakelaar voor deurbediening (optioneel)

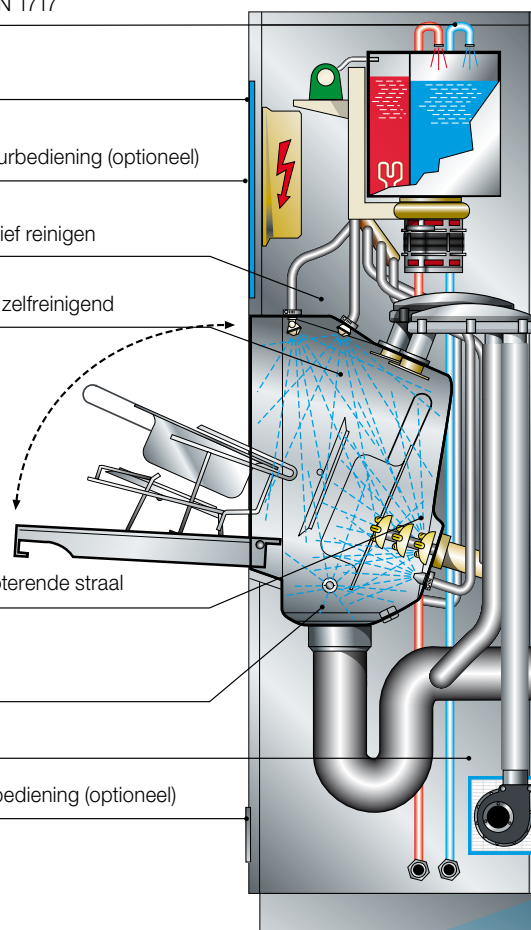

Steam Stop

Een volledige systeem-dampdichtheid garandeert u de beste arbeidsveiligheid en hygiënezekerheid.

Power Clean

De krachtige, telescopische roterende straal en het geoptimaliseerde, allround wassysteem zorgen ervoor dat uw zorghulpmiddelen tot in elke hoek efficiënt worden gereinigd.

Thermo Control

De aansturing van de vrij instelbare* A₀-waarden, die door elkaar controlerende temperatuursensoren worden bewaakt, garandeert u de beste desinfectie-zekerheid.

*A₀ 60, A₀ 600, A₀ 3000.



Dry&Cool

Het gepatenteerde proces "Droging en terugkoeling met gefilterde lucht" zorgt voor hygiënisch onschadelijke zorghulpmiddelen die probleemloos kunnen worden aangeraakt.

T.A.D.

Total Auto Disinfection (T.A.D.) beschermt het gehele wateromloopsysteem perfect tegen herbesmetting na elke cyclus.

Chem Code


Het unieke zuiglanscode-ringssysteem voorkomt dat de reinigingsmiddelen worden verwisseld waardoor de procesintegriteit wordt gegarandeerd.

Ca²⁰ Stop


De sensorgestuurde doseerbewaking van waterontharder met naglansmiddel of reinigingsmiddel zorgt voor de bedrijfszekerheid van de machine.

MEIKO TopLine is zeer veelzijdig. Voor elke vuile spoelruimte kunt u hier wel iets vinden. Van een stand-alone machine voor staande of wandmontage of voor de inbouw in natte ruimtes tot het praktische onderbouwmodel en de compacte verpleegcombinatie. Maak uw oplossing op maat! Meer informatie over de verschillende mogelijkheden vindt u in onze actuele brochure MEIKO TopLine programmaoverzicht. Het MEIKO team helpt u graag bij het vinden van de beste schone oplossing voor uw zeer individuele hygiëne-eisen. Een telefoontje is genoeg!


TopLine als vloermodel

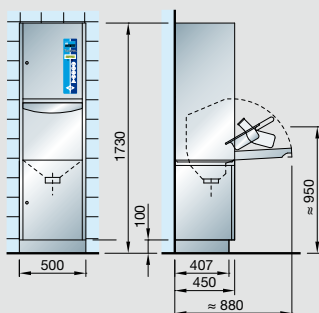

TopLine als kleine verpleegcombinatie

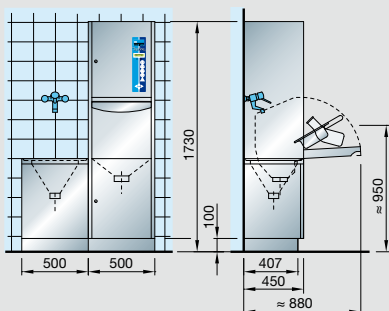

TopLine als onderbouwmodel

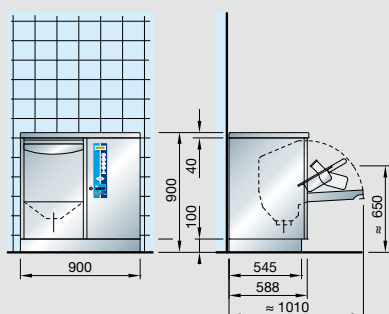

TopLine 10

Voor wandmontage die de vloer vrij laat. Basismodel. Ruimtebesparend en klaar om te worden aangesloten.



TopLine 20

Kleine verpleegcombinatie die bestaat uit een TopLine 20 met sokkel en speciaal daarvoor ontwikkelde uitstortunit (optioneel).



SAN 14 B

Compacte verpleegcombinatie die bestaat uit een TopLine 40, uitstortunit, wastafel en opslagruimte. Inclusief spatscherm en opstaande rand.



SAN 20 W

Verpleegcombinatie met kastruimte van 600 mm. Bestaat uit een TopLine 40, uitstortunit, wastafel en opslagruimte. Inclusief spatscherm en opstaande rand.

MEIKO NEDERLAND B.V.

Aploniastraat 40 · 3084 CC Rotterdam, Nederland
Tel. +31 88 1050000 · info@meiko.nl · www.meiko.com

MEIKO Clean Solutions Belgium BV

Industriepark-Drongen 15C · 9031 Gent, België
Tel. +32 78 150279 · info@meiko-belgium.be · www.meiko.com

Fabrikant:

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Duitsland
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com