

# Alles hygienisch – vom Arbeitsplatz bis Zubehör



**Zubehör** Programmübersicht



Mit MEIKO zur perfekten Rundum-Hygiene



MEIKO – die saubere Lösung. Das ist neben einem Portfolio von professionellen Reinigungs- und Desinfektionsgeräten ein komplettes Zubehörprogramm. Von Oberflächen- und Arbeitsplattenmaterialien in verschiedenen Farben, über Gerätezubehör wie Halterungssysteme oder Kommunikationsinstrumente, bis hin zu Schränken und Regalen. Für die perfekte Rundum-Hygiene.

**Vielseitig und hygienisch gestaltet:  
der Pflegearbeitsplatz**



Vom Einzelgerät bis zum komplett eingerichteten Arbeitsraum. Individuelle und flexible Lösungen: Arbeitsflächen, Waschbecken, Schränke, Regale und vieles mehr. Alles was das Arbeiten sicherer, komfortabler und hygienisch funktionaler macht, in bester MEIKO-Edelstahlqualität.

**Pflegeleicht und farblich abgestimmt: HPL-Schichtstoffplatten  
oder CORIAN\***



Wenn es mal etwas anderes sein soll: HPL – High Pressure Laminates auf Basis thermohärtender Harze homogen mit Zellulosefasern verstärkt. Markant ist die dekorative Oberfläche. Weitere Farben und Muster möglich – auf Anfrage und Aufpreis. Weil harmonisch abgestimmte Farben nachweislich das Arbeitsklima positiv beeinflussen, bieten wir Ihnen unsere Pflegekombinationen auf Wunsch auch in verschiedenen Farben an.

**Farbmuster HPL**

Melonengelb E2-31	Pastellgrün E23-21
Elfenbein E1-01	Himmelblau E17-30
Sand E3-0	

Auszug der lieferbaren Farben



CORIAN\* ist ein Mineralwerkstoff für Arbeitsplatten. Robust, hygienisch und leicht zu pflegen. Schrankober- und -unterbauten können in allen RAL-Farben, matt oder glänzend, spritzlackiert geliefert werden.

**Farbmuster CORIAN**

Vanilla	Mojave
Raffia	Dusk

Auszug der lieferbaren Farben

MEIKO Gerätezubehör:  
für jeden Fall das Richtige



Für jeden Fall das Richtige - mit Gerätezubehör von MEIKO sind Sie stets gut gewappnet. Hier ist für jedes Pflegegeschirr etwas dabei: ob Universalhalterung oder Spezialhalterungen für Sonderpflegegeschirre. Und das perfekt auf den Einsatz abgestimmte Design ermöglicht nicht nur eine praxisgerechte Handhabung und Arbeitskomfort, sondern garantiert noch Funktionssicherheit und Hygiene.




**Kammertür mit seitlichen Spritzblenden zur Verwendung als Ausguss**  
Kaltwasserspülung über Pumpensystem des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes.



**Universalhalter SUH2**



**Bedarfsorientierte Spezialhalterungen**  
Zur Vorreinigung von Absaugflasche und Deckel. Entsorgung unter Verschluss.

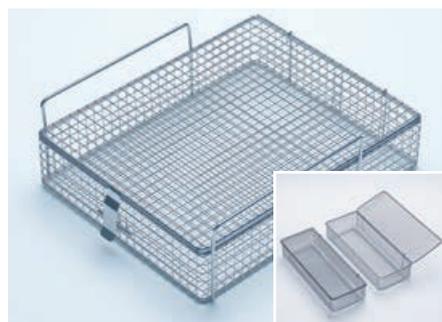

**Korb für Kleinteile**


Mit Klappdeckel zum Einschieben in den Gefäßhalter (Maschenweite 10 x 10 mm).

**Einsatzkorb**

Mit Klappdeckel zum Einlegen in den Korb für Kleinteile (Maschenweite 4 x 4 mm).

# MEIKO Kommunikationszubehör: für sichere Hygiene



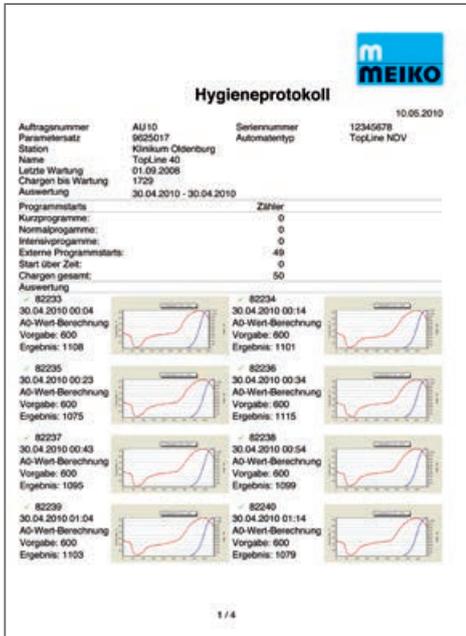

## Lückenloser Überblick: *M-Commander InVision*

Sichern Sie sich einen lückenlosen Überblick über Hygiene, Logistik und Technik – mit der Analysesoftware *M-Commander InVision* von MEIKO. Sekundenschnell und übersichtlich werden alle relevanten Daten auf Ihren PC übertragen. Für Transparenz und Sicherheit. Mit MEIKO Reinigungs- und Desinfektionsgeräten mit *MIKE 2* Elektronik-Steuerung kompatibel.

- erreichter A<sub>0</sub>-Wert
- eingestellter A<sub>0</sub>-Wert
- Datum und Uhrzeit des Programmstarts
- Zyklusdauer
- Maschinen-Ident-Nr.
- Chargenzähler
- Programm-Nr.
- Temperaturverlauf der Desinfektionsphase
- Online-Überwachung aus der Ferne
- Geräteparameter
- und vieles mehr

## Online-Desinfektionsüberprüfung: per Funk-Temperatur-Datenlogger

Überprüfen Sie online den Desinfektionsprozess Ihres Reinigungs- und Desinfektionsgerätes – durch Platzierung eines Funk-Temperatur-Datenloggers durch MEIKO in Ihrem Gerät! Schnell, zuverlässig und nach DIN EN ISO 15883. Für sichere Hygiene.

- die Prozessdaten stehen unverzüglich auf dem Laptop zur Verfügung
- dieser Datensatz wird via LAN oder Funkübertragung sekundenschnell von einem MEIKO-Server überprüft
- bei Korrektheit wird automatisch ein Zertifikat der Überprüfung erstellt
- dieses erhalten Sie umgehend für Ihre Dokumentation und zum Nachweis bei Begehung durch die zuständige Aufsichtsbehörde
- bei fehlerhaften Messungen kann der Servicetechniker vor Ort unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Ein weiterer Serviceeinsatz wird damit verhindert.
- Sie haben permanenten Zugriff auf die Geräteinformationen und auf die Messdaten
- im Rahmen einer regulären Wartung erhalten Sie alle relevanten Daten für Ihre Geräteakte

# Sauber gelöst: von Abdeckblech bis Zulaufverrohrung



## **Spritzblende für den Ausguss**

Hinten und/oder seitlich. Randspülung (optional) über Reinigungs- und Desinfektionsgerät oder Eigenversorgung. Bedienung der Randspülung des Ausgusses über eigene Folientastatur (Eigenversorgung) oder über Gerätesteuerung.



#### Abdeckblech mit Bügelgriff

Zur Vermeidung von chemischen Gerüchen. Für Einlegebecken 500 mm x 400 mm x 300 mm.



**Einhandbatterie**, verchromt, mit schwenkbarem Auslauf, komfortabel zu bedienen.



#### Hebelablaufventil

Ab einer Beckengröße von 500 mm x 400 mm x 300 mm, wahlweise mit Füllstandsmarkierung.



#### Pflege- und Reinigungsmittel: Spezial-Enthärter und -Klarspüler DOYEN SK 22 E, wahlweise mit Apfelduft

Zur Verhinderung von Kalkablagerungen und für eine tropfenfreie Klarspülung des Waschgutes. Gewährleistet damit auf Dauer gute Reinigungs- und Desinfektionsergebnisse. (5-kg-Gebinde)

#### Steckbecken-Reiniger DOYEN R 100

Mildalkalisch, reinigt kraftvoll und trotzdem materialschonend bei starker Verschmutzung. (5-kg-Gebinde)

#### Steckbecken-Reiniger DOYEN RS 120

Säurehaltig, löst zuverlässig Salben- und Fettränder, universell einsetzbar bei allen Wasserhärten. (5-kg-Gebinde)



#### Zentrale Ablaufverrohrung

Zentralanschluss unter dem Ausguss.



#### Zulaufverrohrung für Mischbatterien

Zentralanschluss einschließlich Installationswand für Kaltwasser und Warmwasser.



#### Tischplatte aus Edelstahl mit verschiedenen Wandabschlussprofilen

z.B. mit wandseitiger, gerader Aufkantung oder mit Hygienradius (R15) und wandseitiger, schräger Aufkantung.

# Schränke und Regale: für den gepflegten Arbeitsraum



## **Schränke**

z.B. Schrank mit Handwaschbecken, 2 Türen und 4 Schubladen.  
In verschiedenen Maßen erhältlich.



### Regal TUS

Für desinfizierte Urinflaschen, Bettpfannen und Gefäße mit Abstellrost oder Abtropfwanne in Breiten 500 und 1400mm.

### Wandregal

Regal mit höhenverstellbaren Ablagen in allen Breiten (Tiefe 350mm).




### Offene Wandschränke

Schränke für die offene Ablage mit jeweils 1 Zwischenboden. In den Breiten 500, 1000 und 1200mm.



### Geschlossene Wandschränke

Schränke mit Schlagtüren und jeweils 1 Zwischenboden. In den Breiten 500, 600, 800, 1000, 1200 und 1500 mm. (Optional: Lichtblende und Leuchtmittel)

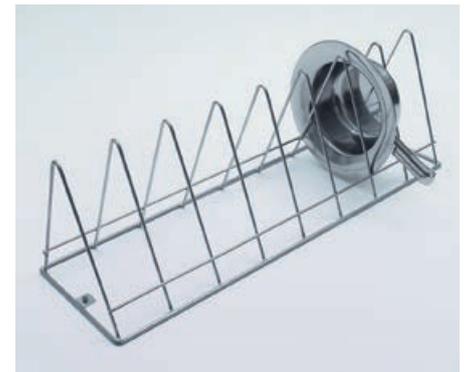

### Gestell

Zur senkrechten Aufbewahrung von Steckbecken in Wandschränken.




### Abschließbare Schranktür

Gegen unbefugten Zugriff.



### Abfallsammler

Edelstahl, geschlossen, im Unterschrank eingebaut, zum bequemen Befüllen mit Kleinmüll.

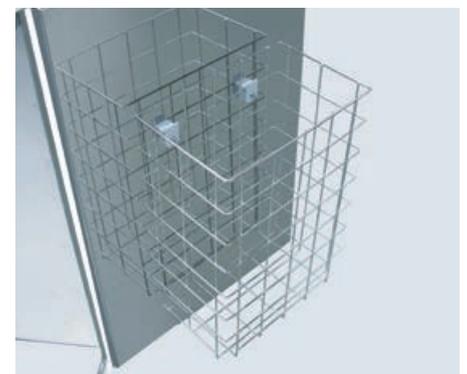

### Halterung für Abfallsack (26 Liter)

Im Unterschrank eingebaut, zum bequemen Befüllen mit Kleinmüll.

**MEIKO Deutschland GmbH** · Englerstr. 1 · 77652 Offenburg, Deutschland  
Tel. +49 781 6397-6000 · Fax +49 781 6397-6099  
[www.meiko.de](http://www.meiko.de) · [info.de@meiko.de](mailto:info.de@meiko.de)

**MEIKO AUSTRIA GmbH** · Hetmanekgasse 1b · 1230 Wien, Österreich  
Tel. +43 1 6992039 · Fax +43 1 6992039-23  
[www.meiko.at](http://www.meiko.at) · [office@meiko.at](mailto:office@meiko.at)

**MEIKO (Suisse) AG** · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Schweiz  
Tel. +41 44 8062626 · Fax +41 44 8250640  
[www.meiko-suisse.ch](http://www.meiko-suisse.ch) · [info@meiko-suisse.ch](mailto:info@meiko-suisse.ch)

Hersteller:  
**MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG** · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Deutschland  
Tel. +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179  
[www.meiko-global.com](http://www.meiko-global.com) · [info@meiko-global.com](mailto:info@meiko-global.com)

