

Une hygiène optimale – de la salle de soins aux accessoires



Aperçu de la gamme d'**accessoires**



Les produits MEIKO : pour une hygiène absolue



MEIKO – La solution propre. MEIKO propose non seulement un vaste choix de lave-bassins professionnels, mais aussi une gamme complète d'accessoires, allant de matériaux de surface et de plans de travail de différentes couleurs, aux placards et étagères, en passant par des supports et outils de communication. Pour une hygiène absolue.

Un poste de travail multifonctionnel et hygiénique



Des solutions souples et personnalisées, de l'appareil individuel à la salle de soins complète avec surfaces de travail, éviers, placards, étagères, et bien plus. Un ameublement à la fois sûr, confortable, fonctionnel et hygiénique dans un acier inoxydable de première qualité – comme toujours chez MEIKO.

Des surfaces faciles d'entretien, dans le coloris souhaité, en stratifié HPL ou CORIAN*



En alternative à l'acier inoxydable, nous vous proposons des surfaces en HPL (High Pressure Laminate), un stratifié à base de résines thermo-durcissables renforcé uniformément par des fibres cellulodiques. Très décoratives, elles sont également disponibles dans d'autres teintes et finitions – sur demande et moyennant supplément. Il s'est avéré que des combinaisons de couleurs harmonieuses exercent un impact positif sur l'ambiance de travail. C'est pourquoi nous proposons nos combinés de soins dans différents coloris (sur demande).

Échantillons de couleurs HPL

Jaune melon E2-31	Vert pastel E23-21
Ivoire E1-01	Bleu ciel E17-30
Sable E3-0	

Exemples de coloris disponibles



Le CORIAN* est un matériau minéral employé pour les plans de travail. Il est résistant, hygiénique et facile d'entretien. Les placards du haut et du bas peuvent également être livrés dans toutes les teintes RAL, mates ou brillantes, peintes au pistolet.

Échantillons de couleurs CORIAN

Vanille	Mojave
Raphia	Dusk

Exemples de coloris disponibles

Accessoires pour lave-bassins MEIKO :
une solution pour chaque cas



Une solution pour chaque cas : avec la gamme d'accessoires MEIKO, vous êtes paré pour toutes les éventualités et tous les ustensiles de soins, grâce à nos supports universels ou spéciaux pour ustensiles spécifiques. Les accessoires MEIKO bénéficient en outre d'un design parfaitement adapté, garantissant non seulement leur maniabilité et un grand confort de travail, mais aussi leur sécurité fonctionnelle et une hygiène irréprochable.



Porte avec rebords latéraux anti-éclaboussures pouvant servir de vidoir
Rinçage à l'eau froide via le système de pompage du lave-bassin.




Support universel SUH2



Supports spéciaux adaptés aux besoins spécifiques

Ici, pour le prélavage des bouches de sécrétion et de leur couvercle. Évacuation du contenu derrière la porte fermée.

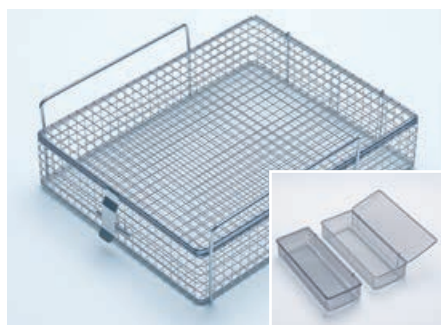

Panier pour petits ustensiles

Avec couvercle rabattable. S'insère dans le support à récipients (largeur des mailles 10 x 10 mm).

Panier d'appoint

Avec couvercle rabattable. Se dépose dans le panier pour petits ustensiles (largeur des mailles 4 x 4 mm).

Accessoires de communication MEIKO : pour une sécurité d'hygiène optimale





Une transparence absolue grâce au logiciel *M-Commander InVision*

Le logiciel d'analyse *M-Commander InVision* de MEIKO vous garantit une vue d'ensemble parfaite des processus hygiéniques, logistiques et techniques. En quelques secondes, il transmet à votre ordinateur une analyse clairement structurée de toutes les données pertinentes. Pour plus de transparence et de sécurité. Le logiciel est compatible avec les lave-bassins MEIKO équipés de la commande électronique *MIKE 2*.


- Valeur A_0 atteinte
- Valeur A_0 réglée
- Date et heure du démarrage du programme
- Durée de cycle
- N° d'identification de l'appareil
- Compteur de charge
- N° de programme
- Évolution de la température de la phase de désinfection
- Surveillance à distance en ligne
- Paramètres de l'appareil
- et bien davantage

Contrôle de désinfection en ligne grâce à l'enregistreur de température sans fil

Contrôlez le processus de désinfection de votre lave-bassin en ligne – en faisant installer par MEIKO un enregistreur de température sans fil sur votre appareil ! Rapide, fiable et conforme à la norme EN ISO 15883. Pour une sécurité d'hygiène optimale.

- Les données de processus sont immédiatement disponibles sur l'ordinateur portable.
- L'enregistrement est contrôlé en quelques secondes par un serveur MEIKO via LAN ou radio-transmission
- Si les données sont correctes, un certificat de contrôle est émis automatiquement
- Ce certificat vous est transmis immédiatement pour votre documentation et peut servir de justificatif en cas de contrôle par les autorités de surveillance compétentes.
- Si les données sont incorrectes, le technicien de maintenance peut prendre les mesures requises sans délai. Une nouvelle intervention du SAV est alors superflue.
- Vous avez accès aux données de mesure et de l'appareil en permanence
- Toutes les données pertinentes pour le dossier de votre appareil vous sont remises lors de l'entretien de routine

Des solutions bien pensées : de la plaque de recouvrement à la tuyauterie d'alimentation

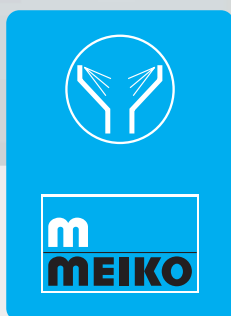

Protection anti-éclaboussures pour le vidoir

Arrière et/ou latérale. Chasse d'eau en option. Actionnée en appuyant sur la touche correspondante du vidoir (clavier membrane) ou sur la touche correspondante du système de contrôle de l'appareil.



Plaque de recouvrement avec poignée étrier

Évite la diffusion des odeurs de produits chimiques. Pour éviers de 500 x 400 x 300 mm.



Mitigeur monocommande chromé avec bec orientable, confortable à utiliser.



Vanne de vidange à levier

Pour éviers à partir de 500 x 400 x 300 mm avec indicateur du niveau de remplissage en option.



Produits de nettoyage et d'entretien : Adoucisseur d'eau et produit de rinçage spéciaux DOYEN SK 22 E, également disponibles avec parfum pomme.

Évitent les dépôts de tartre, garantissent un rinçage parfait, sans traces de gouttes, et par conséquent d'excellents résultats de lavage et de désinfection à long terme. (Bidons de 5 l)

Détergent pour bassins Doyen R 100

Légèrement alcalin, lave efficacement tout en protégeant le matériel, même en cas de souillures importantes. (Bidon de 5 l)

Détergent pour bassins Doyen RS 120

Légèrement acide, élimine toute trace de pommade ou de graisse. Usage universel, quelle que soit la dureté de l'eau. (Bidon de 5 l)



Tuyauterie d'évacuation centrale

Raccordement central sous le vidoir.



Tuyauterie d'alimentation pour mitigeurs

Raccordement central pour l'eau froide et l'eau chaude, paroi d'installation incluse.



Plan de travail en acier inoxydable avec différents profilés muraux, par ex. avec bord droit côté mur ou arrondi hygiénique (R15) et bord incliné côté mur.

Placards et étagères : pour une salle de soins ordonnée



Placards

par ex. placard avec évier, 2 portes et 4 tiroirs.
Différentes dimensions disponibles.



Étagère TUS

Pour urinaux, bassins et récipients désinfectés. Avec grille de rangement ou cuvette d'égouttement. Largeurs disponibles : 500 et 1400 mm.



Étagère murale

Étagère avec tablettes réglables en hauteur, disponible dans toutes les largeurs (profondeur 350 mm).



Placard mural ouvert

Placard de rangement sans porte, avec une tablette. Largeurs disponibles : 500, 1000 et 1200 mm.



Placard mural fermé

Placard à portes battantes, avec une tablette. Largeurs disponibles : 500, 600, 800, 1000, 1200 et 1500 mm. (En option : cache-lumière et ampoules)



Support

Pour rangement vertical des bassins dans les placards muraux.




Porte de placard verrouillable

Pour empêcher tout accès non autorisé.



Poubelle

En acier inoxydable, à couvercle. Intégrée au placard du bas, pour une élimination aisée des petits déchets.

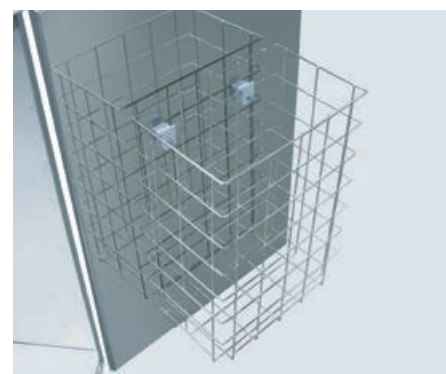

Support pour sacs poubelle 26 l

Intégré au placard du bas, pour une élimination aisée des petits déchets.



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstr. 3
77652 Offenburg
Germany
Tel.: +49 (0)781 203-0
Fax: +49 (0)781 203-1229
E-Mail: info@meiko.de
www.meiko.de