

La miglior scelta di accessori per la massima igiene



Accessori Gamma prodotti



La soluzione MEIKO per un' ottima igiene completa



Il nostro motto "MEIKO – The clean solution" significa molto più di sole apparecchiature di lavaggio e disinfezione professionale, include una completa gamma di accessori MEIKO. Noi crediamo nella soluzione completa di igiene ottimale su tutta la nostra linea, incluso una serie di superfici in materiali e colori diversi, accessori per lo stoccaggio degli utensili lavati e disinfettati, sistemi di supporto e comunicazione, oltre ad una vasta gamma di armadi e scaffali.

Realizzare locali di servizio versatili e igienici



Dalle singole macchine a locali di servizio completamente attrezzati, soluzioni flessibili su misura, tra cui piani di lavoro, lavelli, armadi, scaffali e molto altro ancora.

MEIKO fornisce tutto il necessario per rendere il lavoro più facile e sicuro. L'acciaio inossidabile di alta qualità assicura la massima igiene.

Facile da pulire e disponibile in un'ampia gamma di colori: pannelli in laminato ad alta pressione e CORIAN*



Se siete alla ricerca di qualcosa di speciale si consigliano dei laminati ad alta pressione (HPL). Prodotti da strati di carta impregnati con resine termoindurenti, gli HPL sono sia funzionali che attraenti. Disponibili su richiesta in altri colori e disegni a un costo aggiuntivo. Un uso armonioso dei colori ha dimostrato di avere un effetto positivo sul lavoro delle persone. E' per questo che offriamo le nostre combinazioni sanitarie in una selezione di colori su richiesta.

Campioni di colori HPL

Giallo melone E2-31	Verde pastello E23-21
Avorio E1-01	Blu cobalto E17-30
Sabbia E3-0	

Vi preghiamo di contattarci per un elenco completo dei colori



CORIAN* è materiale solido per i piani di lavoro, composto da una miscela di minerali naturali e artificiali.

Le nostre combinazioni sanitarie possono anche essere fornite in un colore a scelta.

Pensili e armadio a pavimento possono essere forniti in tutti i colori RAL, verniciati a colore a spruzzo opaco o lucido.

Campioni di colore CORIAN

Vaniglia	Mojave
Raffia	Crepuscolo

Vi preghiamo di contattarci per un elenco completo dei colori

Accessori delle macchine MEIKO:
la scelta giusta per ogni esigenza



La scelta giusta per ogni esigenza: con gli accessori MEIKO siete preparati per ogni eventualità. Da supporti universali per tutti gli usi a supporti speciali per particolari utensili per la cura, siamo in grado di aiutarvi a trovare la soluzione giusta per tutte le esigenze. Progettato in accordo con gli utenti, gli accessori MEIKO sono pratici semplici da usare, fornendo risultati affidabili e la massima igiene.



Porta della camera di lavaggio con paraspruzzi laterali da utilizzare come vuotatoio

Risciacquo con acqua fredda utilizzando il sistema di lavaggio e disinfezione della macchina.



SUH2 supporto universale



Supporti speciali per applicazioni personalizzate

Studiati per effettuare il lavaggio e la disinfezione di bottiglie per l'aspirazione e coperchi – il tutto in un'ambiente sigillato.



Cesto per piccoli oggetti


Con coperchio ribaltabile. Progettato per poter inserire nel supporto utensili (10 x 10 mm dimensioni mesh).

Inserto cesto

Con coperchio ribaltabile. Progettato per poter essere inserito nel carrello per piccoli oggetti (4 x 4 mm di maglia).

Sistemi di comunicazione MEIKO: tutela delle norme igieniche



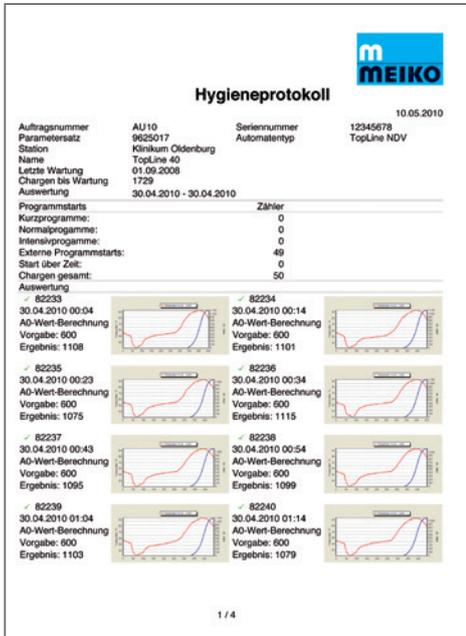

Una perfetta panoramica con la soluzione: *M-Commander InVision*

Rimani aggiornato con i dati completi su igiene, aspetti logistici e tecnici forniti dal software di analisi *M-Commander InVision* di MEIKO. Tutte le informazioni rilevanti vengono inviate al PC in pochi secondi, in modo da tener traccia dello stato di funzionamento della macchina in modo chiaro e semplice. Compatibile con tutte le apparecchiature MEIKO per la pulizia e disinfezione equipaggiate con il sistema di controllo elettronico *MIKE 2*.

- Valore A_0 raggiunto
- Valore A_0 impostato
- Data e ora inizio ciclo
- Durata del ciclo
- Nessuna identificazione della macchina
- Contatore di cicli
- Nessun programma
- Temperatura e stato di disinfezione
- Monitoraggio remoto online
- Parametri della macchina
- E molto di più

Monitoraggio disinfezione online con un data logger di rilevamento di temperatura wireless

Chiedete a Meiko di installare un data logger di rilevamento di temperatura wireless nelle vostre apparecchiature per la pulizia e disinfezione sanitaria e iniziate a monitorare online le prestazioni delle vostre macchine!
 Certificato EN ISO 15883, questo veloce e affidabile dispositivo è realizzato per assicurare i massimi standard di igiene.

- Navigazione istantanea dei dati di processo sul vostro computer portatile
- I dati vengono inviati via LAN o attraverso trasmissione radio e controllati da un server MEIKO nel giro di pochi secondi
- Se tutto è in ordine, un certificato di verifica viene creato automaticamente
- Questo certificato viene immediatamente inviato per il vostro protocollo e può essere usato come prova in caso di un controllo da parte delle autorità
- Se uno o più controlli non rientrano nei parametri richiesti, il tecnico può adottare immediatamente le misure necessarie, evitando così la necessità di un'altra chiamata
- L'utente conserva l'accesso permanente alle informazioni dell'apparecchio e ai dati di misura
- Ottieni tutti i dati rilevanti per i vostri protocolli nell'ambito di una regolare manutenzione

Soluzioni di pulizia: dalle comperture ai tubi in acciaio



Paraspruzzi per vuotatoio

Nella parte posteriore e/o laterale. Come optional sistema di risciacquo inserito a bordo vuotatoio. Risciacquo automatico del vuotatoio (RS-AP) mediante tasto lavapadelle.



Maniglia

Progettato per evitare i cattivi odori chimici. Disponibile per vasche di misura 500 mm x 400 mm x 300 mm.



Miscelatore con rubinetto monocomando

Acciaio inox con bocca girevole, facile utilizzo.



Leva valvola di scarico

Per vasche di dimensioni 500 mm x 400 mm x 300 mm, con indicatore del livello di riempimento opzionale.



Detergenti e brillantanti DOYEN SK 22 E

brillantante e anticalcare disponibile al profumo di mela

Previene depositi di calcare e risciacqui senza lasciare segni di gocciolamento. Garanzie di pulizia e risultati duraturi di disinfezione. (Contenitore da 5 kg)

DOYEN R 100

Disinfettante per lavapadelle

Leggermente alcalino, ma potente per combattere lo sporco pesante. (Contenitore da 5 kg)

DOYEN RS 120

Acido, toglie in modo affidabile i residui di grasso e sporco, può essere utilizzato a tutti i livelli di durezza dell'acqua. (Contenitore da 5 kg)



Tubazione di scarico centrale

Punto di connessione centrale posto sotto il vuotatoio.



Tubi di alimentazione per rubinetti miscelatori

Collegamento centrale per acqua fredda e acqua calda (include le tubature a muro).



Piano di lavoro in acciaio inox con diverse angolazioni dei bordi

es con alzatina dritta lungo la parete o con raggio di igiene (R15) e alzatina inclinata lungo la parete.

Armadi e scaffali: Mantenere locali di servizio puliti e ordinati



Armadi

es combinazione armadio con lavabo, 2 ante e 4 cassetti.
Disponibile in una vasta gamma di formati.




Ripiani TUS

Per le bottiglie di urina disinfettate, padelle e recipienti, con spazio di stoccaggio o vaschetta di raccolta. Disponibile nelle seguenti larghezze: 500 mm e 1400 mm.

Mensole a parete

Scaffale con ripiani regolabili in altezza disponibili in tutte le lunghezze. Profondità ripiano: 350 mm.

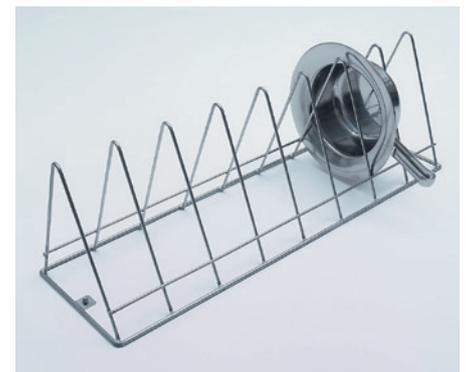

Armadi senza ante


Unità armadio con una mensola intermedia per lo stoccaggio veloce e facile. Disponibile nelle seguenti larghezze: 500 mm, 1000 mm e 1200 mm.

Armadi con ante

Unità armadio con ante battenti e un ripiano intermedio. Disponibile nelle seguenti larghezze: 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm e 1500 mm. (Opzionale: illuminazione)

Stoccaggio

Per lo stoccaggio verticale delle padelle nell' armadio a parete.

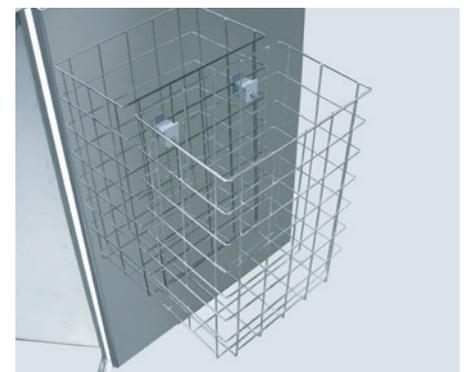

Porta armadio con serratura

Previene l'accesso non autorizzato.

Pattumiera

Acciaio inossidabile, con coperchio incorporato nell'unità vano inferiore per un comodo smaltimento di piccole quantità di rifiuti.

Supporto per sacchetto rifiuti (26 litri)

Integrato nell'unità inferiore dell' armadio per un comodo smaltimento di piccole quantità di rifiuti.



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstr. 3
77652 Offenburg
Germany
Tel.: +49 (0)781 203-0
Fax: +49 (0)781 203-1229
E-Mail: info@meiko.de
www.meiko.de

MEIKO ITALIA Srl

Via Emilio Gallo 27 · 10034 Chivasso (TO)
tel. 011 9190211 · fax 011 9196215
www.meiko.it · info@meikoitalia.it