

TopLine 30

Patientenbezogene Lösung
ohne Grenzen



TopLine 30 – Reinigungs- und Desinfektionsgerät für den Wandeinbau

TopLine 30 – Nahtlose und anpassungsfähige Hygienesicherheit für Patient und Pflegepersonal

Bei der Planung von Hygienesystemen in Krankenhäusern liegen patientenbezogene Lösungen voll im Trend. Sie integrieren Steckbeckenspüler in Nasszellen oder direkt in Patienten- oder Isolierzimmer und garantieren ein Plus an Hygienesicherheit durch kurze Wege. Die Lösung heißt MEIKO TopLine 30. Das Reinigungs- und Desinfektionsgerät für den Wandeinbau überzeugt durch modernste Technologie und bietet Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum.

Grenzenlose Hygiene:


In Sachen Hygiene kennt MEIKO keine Grenzen. Wir liefern Ihnen TopLine 30 perfekt auf Ihre bauseitigen Anforderungen und Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, und komplett vorgefertigt. Passgenau und ohne Mehraufwand für Sie.

Und so wird TopLine 30 eingebaut:

Eine Rahmenkonstruktion aus Edelstahl wird in der Nasszellenwand mit allen notwendigen Sanitäranschlüssen verankert. Anschließend werden Steckbeckenspüler samt WC in den Montagerahmen eingesetzt.



Ihr Plus durch kundenspezifische Anpassungen

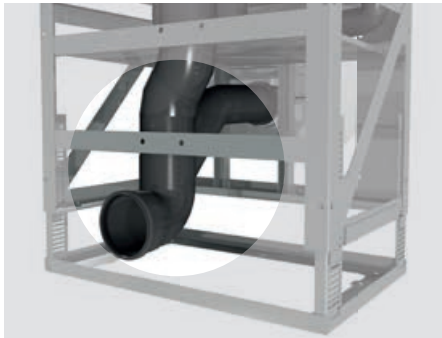

Individuelle Planungslösung durch Berücksichtigung situativer Ablaufkonstellationen.



Erhöhte Hygienesicherheit durch automatische Türöffnung über Touchless-Sensor auf der Gerätefront oder flexibel im Raum anbringbaren Drucktaster.



Bauseitige Flexibilität durch frei platzierbaren WC-Taster zur Spülauslösung per Funk.




Vereinfachter Zugang zu Reiniger und Klarspüler durch Unterbringung der Kanister in separatem Schrank/Schacht.



Erhöhte Patientensicherheit durch optischen Näherungsschalter. Ist das WC besetzt, kann die Waschkammertür nicht geöffnet werden.



Hohe Traglast durch verstreuten Montagerahmen. Speziell für adipöse Patienten.

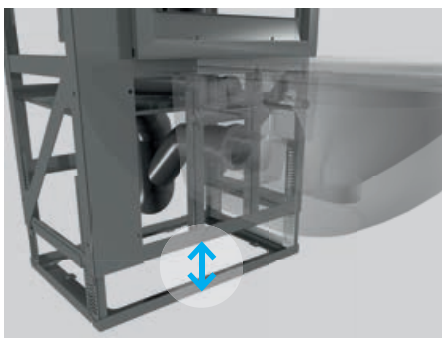

Behindertengerechte Anpassung der WC-Höhe durch individuell einstellbaren Ausgleichsrahmen.




Einfache Montage von Stützgriffen durch komplett vorgefertigten Edelstahlwinkel inklusive eingeschraubter Muttern. Im Stützklappgriff integrierte Spültaster sorgen für hohen Bedienkomfort.


TopLine 30 – Gestaltungsmöglichkeiten

Planungsbeispiele


Kombination von zwei TopLine 30

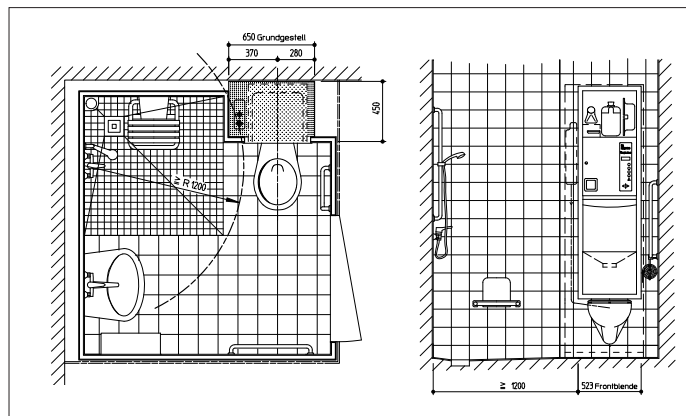

TopLine 30 einzeln

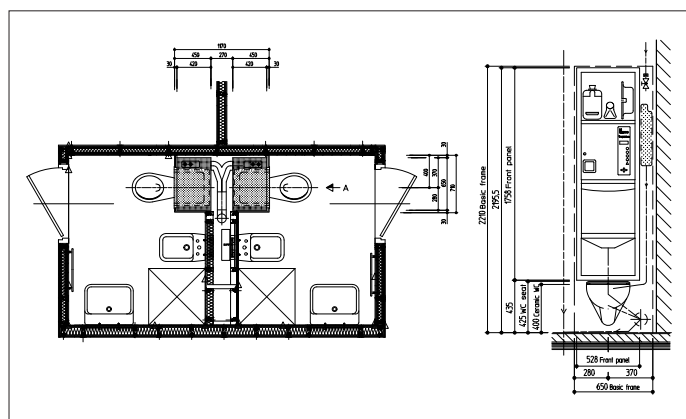

TopLine 30 Rücken an Rücken

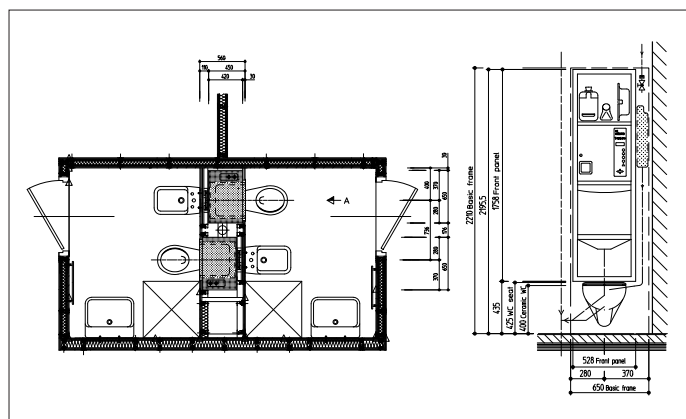

TopLine 30 seitlich versetzt



MEIKO bietet kundenspezifische TopLine 30 Lösungen weltweit.

720.090.00.05.15/DE/KD/2000

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.