



L'hygiène entre de bonnes mains

Le concept intégral pour les établissements de soins en matière de techniques et de services de lavage, et de gestion des biodéchets





Nos prestations pour vous :

État des lieux des appareils de lavage, nettoyage et désinfection existants, **évaluation** des analyses selon les standards en vigueur | **Conseils professionnels** relatifs aux solutions d'hygiène et de lavage spécifiques aux établissements | **Planification** et élaboration de plans d'installation en 3D | **Calculs** de **capacité** et de **rentabilité** pour déterminer les dimensions des équipements de techniques de lavage et leurs appareils périphériques | Assistance pour l'établissement du **plan budgétaire** | **Fabrication et livraison** de lave-vaisselle et laveurs-désinfecteurs haut de gamme | **Montage** et **assistance** dans le cadre des travaux | **Formation** systématique des techniciens internes | **Service global** efficace

Un interlocuteur pour tous vos besoins

Vous planifiez votre local vidoir ? Vous recherchez les techniques de lavage optimales pour votre cuisine centrale, cuisine en station ou cuisine d'espace de vie ? Vous avez besoin d'une solution particulièrement hygiénique pour vos déchets alimentaires ?

MEIKO vous propose non seulement un programme complet d'équipements. Cela va bien au-delà : nous vous accompagnons dans vos projets, de la planification au suivi de chantier en passant par l'aménagement, et vous offrons une gamme de services complète, répondant à toutes vos attentes.

Votre avantage : vous n'avez qu'un seul interlocuteur et pouvez pleinement vous concentrer sur vos tâches principales. Nous nous chargeons du reste !

Découvrez notre pack « Sérénité » et placez votre confiance dans l'expérience et l'expertise d'un prestataire de techniques de lavage, de nettoyage et de désinfection leader dans le monde entier !

Le Cercle MEIKO Clean Solution

Le *Cercle MEIKO Clean Solution* représente notre approche globale des processus de lavage, de nettoyage et de désinfection. Il inclut tous les facteurs pertinents ainsi que la fourniture des produits et services par un seul prestataire. Notre concept est basé sur la performance de lavage, symbolisée par le « cercle de Sinner » et ses quatre facteurs : le temps, la température, l'action mécanique et les produits lessiviels. Mais il ne se limite pas à cela. Nous planifions votre arrière-cuisine ou votre local vidoir et veillons au respect de vos exigences techniques ainsi qu'au bon déroulement des processus durant les années à venir. Nous proposons également des formations permettant à vos collaborateurs d'actualiser sans cesse leurs connaissances. Tout cela en tenant compte de facteurs tels que la rentabilité, l'hygiène et l'écologie, pour vous permettre de tirer le maximum de vos lave-vaisselle ou laveurs-désinfecteurs.





Techniques de lavage dans les cuisines d'espace de vie et les cafétérias Confort et hygiène

Pour les habitants d'un groupe résidentiel, la cuisine représente bien plus qu'un espace où l'on prend ses repas : elle est un point de rencontre et de centre d'intérêt vital – et doit donc être confortable. Pour le personnel soignant, c'est le lieu où il organise la répartition des aliments : les denrées alimentaires sont réchauffées, portionnées et directement distribuées. Ou préparées pour les chambres. Cela signifie : beaucoup de vaisselle, peu de temps, de hautes exigences en matière d'hygiène !

Il faut donc des techniques de lavage qui tiennent la route – comme la *M-iClean U*. En effet, pendant que le lave-vaisselle ronronne doucement en arrière-plan, l'équipe soignante des *PflegeBienen* à Erfurt a le temps de préparer une salade à ses habitants. Au bout de 210 secondes environ, la poignée signalétique lumineuse de la *M-iClean U* permute sur le bleu. C'est le signal pour le personnel soignant : la vaisselle – dont on a d'ailleurs déjà besoin – peut être déchargée !



M-iClean U – Lave-vaisselle et lave-verres



Lave-vaisselle MEIKO pour les verres, la vaisselle, les couverts et les plateaux. Un résultat de lavage irréprochable en un rien de temps.



UPster® U



M-iClean U



Lave-vaisselle MEIKO pour les verres, la vaisselle, les couverts et la vaisselle encombrante. Pour un travail ergonomique et rationnel.



UPster® U



M-iClean U

Techniques de lavage dans les cuisines des stations et de distribution

Pour une meilleure atmosphère de travail

Les employés doivent se presser après le petit-déjeuner, au moment du repas de midi et du repas du soir. Il est en fait question de réchauffer les plats de la cuisine centrale ou du traiteur, de les disposer et finalement de les servir à tous les résidents de l'étage. Dans la salle à manger commune ou dans les chambres. Dans le meilleur des cas au même moment pour tout le monde. Personne n'a ici besoin de surcroît d'être confronté à la vapeur très chaude qui s'échappe du lave-vaisselle ou de dé-

ployer d'énormes efforts pour la manipulation des équipements. Et avec MEIKO, ce n'est pas nécessaire ! Avec la *M-iClean U* par exemple, l'ouverture de la machine ne provoque ni échappement de vapeur visible ni dégagement d'humidité ou de chaleur supplémentaire dans la pièce. De brefs cycles de lavage et un concept ergonomique de travail permettent en complément d'améliorer l'atmosphère de travail et de soulager le personnel.



M-iClean U – Lave-vaisselle et lave-verres



Techniques de lavage dans les cuisines centrales MEIKO s'amortit



Là où les repas pour tous les résidents sont préparés, un sacré tas de vaisselle s'accumule. Les casseroles, les saladiers, les plaques de cuisson, sans oublier les bacs gastro pour le transport dans l'espace de vie. Cependant, quel que soit l'état de ces ustensiles, très sales ou complètement encrassés, il est hors de question d'avoir à faire face à de longs délais d'attente ou à un empilement de la vaisselle ! Tout comme il est exclu d'avoir des consommations élevées. Tout doit cependant être hy-

giénique et propre. Mais alors comment procéder ? Avec la *M-iQ* par exemple : dont la performance de lavage a été améliorée de 30 % par rapport au modèle précédent. Et qui permet d'économiser un tiers d'eau et d'énergie. La *GreenEye-Technology®* indique en complément au personnel comment optimiser le rangement sur la bande de convoyage. Pour des cycles de travail parfaitement rodés en permanence.

M-iClean H – Lave-vaisselle à capot
avec détection de casier et ouverture
et fermeture automatisée du capot

Lave-vaisselle MEIKO pour la vaisselle, les couverts,
les casseroles, les plaques de cuisson et les contenants.
Pour les encrassements tenaces.



UPster® H



M-iClean H




FV 130.2




DV 270.2



UPster® K

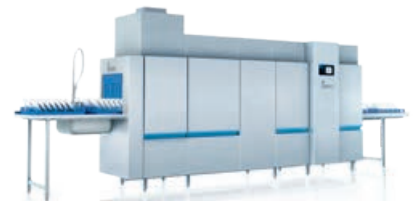

M-iQ K

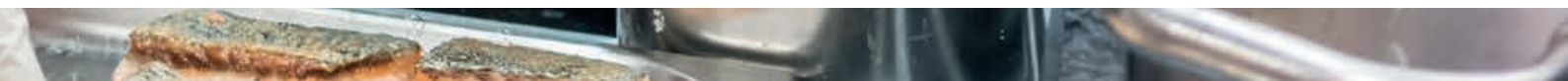



MEIKO GREEN Waste Solutions pour les déchets alimentaires et les déchets de cuisine. Pour une plus-value significative en termes d'économie et d'hygiène.



BioMaster® Slim



BioMaster®4 Plus



BioMaster®4 Highline



Systèmes de traitement des biodéchets dans les cuisines centrales

MEIKO GREEN Waste Solutions, le bonheur sans compromis

Les cuisines centrales ne produisent pas que de la vaisselle sale, elles ne sont également pas en reste concernant les déchets. Il s'agit des déchets alimentaires des assiettes des résidents ou des épluchures de légumes et arêtes issues de la préparation culinaire. Avec des solutions de *MEIKO GREEN Waste Solutions*, vous n'avez plus besoin de stocker ces derniers dans des poubelles sales ou en chambre froide. Les déchets sont éliminés là où ils sont produits : dans la cuisine et au niveau de la bande de débarrassage dans l'arrière-cuisine. Déposer simplement les déchets dans la station de chargement, appuyer sur un

bouton – et ensuite les oublier et se consacrer de nouveau pleinement aux résidents. Pendant ce temps, les déchets sont transformés en biomasse et transportés dans une cuve au sein d'un système fermé. Les déchets stockés occupent peu de place dans cette cuve, sont sans odeur, à l'abri des nuisibles et sans réfrigération supplémentaire. Quand la cuve est pleine, son contenu est aspiré et transféré dans une installation de biogaz, où il est transformé en énergie. À propos : il est souvent également possible d'intégrer un séparateur de graisses.



Traitement des biodéchets avec
BioMaster®4 Highline



Techniques de nettoyage et de désinfection MEIKO pour les bassins de lits, les urinaux, les seaux de chaises percées etc. Pour plus d'hygiène dans le local vidoir.



TOPIC 20



TOPIC 40



TOPIC 40 SAN 14



« Dans le domaine des soins, nous avons besoin de techniques qui nous soulagent et rentabilisent mieux les processus. »

Jörg Menzel directeur des résidences pour non-voyants, Berlin maison de Spandau

Techniques de nettoyage et de désinfection

Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Propre et en sécurité !

Appuyer simplement sur une touche – et les ustensiles de soins sont nettoyés et désinfectés dans les lave-bassins MEIKO. Extrêmement efficace ! Les bactéries, les virus et même les spores du type *Clostridium Difficile* n'ont aucune chance de résister, comme le confirme l'institut indépendant *HygCen Germany GmbH*. Cela signifie : sécurité en matière d'hygiène pour les résidents d'un côté, et soulagement du personnel soignant de l'autre. Même le service

du controlling peut enfin respirer, car la technique robuste préserve en effet les ressources et les budgets. *Jörg Menzel*, directeur des résidences pour non-voyants à Berlin : « Celui qui n'a pas d'argent, doit miser sur la qualité. » Les lave-bassins MEIKO en sont la preuve : ils sont en exploitation depuis bientôt 30 ans. « MEIKO a ici dépassé nos exigences en termes de qualité. » Et c'est pourquoi d'autres appareils *TOPIC* ont déjà été commandés.



Appareil de nettoyage et de désinfection **TOPIC**



www.meiko.info/topline-cdiff



www.meiko.info/topic-cdiff



MEIKO TopLine 20



MEIKO TopLine 40



MEIKO TopLine 40 SAN 14

SAV MEIKO

Parfaitement organisé et rapidement sur place



Dans le domaine des soins de santé, on travaille 24h/24 ! Lorsque quelque chose ne fonctionne pas, il faut de l'aide, et rapidement. En effet, il est question de soins à des personnes.

En cas de problèmes techniques, les experts du service après-vente de MEIKO vous soutiennent en toute fiabilité. Quelle que soit la panne, nos techniciens du service après-vente formés répondent à vos appels 365 jours par an. Ils se tiennent à votre disposition quasiment dans le monde entier et connaissent parfaitement votre solution de MEIKO. Que ce soit dans le domaine du lavage ou de l'hygiène.

Notre recette : de brefs délais de réaction, de courts trajets d'intervention, une grande disponibilité de pièces détachées. Lorsque vous appelez l'assistance MEIKO, c'est toujours un interlocuteur compétent qui vous répondra. Grâce à un grand réseau de partenaires MEIKO, le prochain technicien du SAV n'est jamais bien loin. Et grâce à la disponibilité permanente de nombreuses pièces détachées, votre machine MEIKO est rapidement remise en route comme si de rien n'était.

Chez MEIKO vous n'obtenez pas seulement une excellente technologie. Nous vous fournissons également l'assistance dont vous avez besoin afin que vous puissiez pleinement vous concentrer sur vos tâches principales : les soins à la personne.



« C'est du travail d'équipe : vos connaissances rencontrent notre expérience – une combinaison génialissime ! »

Bernd Winkler, équipe de l'assistance du service après-vente

MEIKO ACTIVE et DOYEN

Une gamme complète de produits lessiviels pour lave-vaisselle et laveurs-désinfecteurs



L'efficacité n'est pas une question de quantité. Pour obtenir de bons résultats, la composition des produits utilisés doit être parfaitement adaptée à la vaisselle et aux ustensiles à laver ainsi qu'à la machine employée, à la qualité de l'eau et au type de salissures. Un véritable défi. Que nous avons relevé !

Sélectionner les bons produits et les doser correctement est essentiel pour garantir un résultat éclatant, une hygiène irréprochable, de faibles coûts d'exploitation et le parfait fonctionnement des machines durant de longues années.

Concevoir des produits lessiviels performants est tout un art – que nous ne cessons de perfectionner. Notre gamme de produits est le résultat de plusieurs décennies d'expérience et d'une passion de la qualité sans concession. Pour protéger l'environnement, nous renonçons autant que possible au chlore, aux phosphates, au NTA et à l'EDTA.

Les produits lessiviels doivent répondre à de nombreuses exigences puisqu'ils doivent fournir un résultat à la fois éclatant et hygiénique, sans traces ni résidus, et ce, sans attaquer les surfaces. Au final, ils influencent même la durée de vie des machines.

DOYEN®



MEIKO® ACTIVE





Techniques de lavage **MEIKO**

Esthétique et fonctionnalité
pour les espaces de vie, les cuisines de stations,
les cuisines centrales et les espaces café
pour les visiteurs

Plus de qualité et plus d'avantages à un prix équitable : les techniques de lavage professionnelles pour les espaces de vie et les espaces café des visiteurs.

UPster® U Lave-vaisselle encastrables

- Faible consommation d'eau
- Utilisation facile grâce à la commande intégralement électronique
- Sécurité sans compromis en matière d'hygiène grâce à l'affichage digital de la température
- Résultat de lavage parfait grâce à l'excellente filtration de l'eau de lavage et à la régénération optimale de l'eau de la cuve
- Reste froid et silencieux à l'extérieur grâce à la structure à doubles parois
- Lavage hygiénique selon la norme DIN
- Robuste et hygiénique grâce à la chambre de lavage emboutie et aux guidages de casiers intégrés
- Commande simple, livraison rapide
- Lavage délicat des verres et de la vaisselle grâce à la pompe de lavage à démarrage progressif
- Système de lavage et de rinçage en haut et en bas en acier inoxydable
- Selon vos exigences relatives à la qualité de l'eau, avec adoucisseur d'eau ou osmose inverse (*osmoseur MODULE GiO*) sur demande

UPster® U 400

Dimensions (L x P x H) : 460 x 600 x 700 mm

Dimensions des casiers : 400 x 400 mm

Hauteur d'entrée : 300 mm

Capacité en casiers : jusqu'à 30 casiers/h



UPster® U 500 G

Dimensions (L x P x H) : 600 x 600 x 700 mm

Dimensions des casiers : 500 x 500 mm

Hauteur d'entrée : 315 mm

Capacité en casiers : jusqu'à 40 casiers/h



UPster® U 500

Dimensions (L x P x H) : 600 x 600 x 820 mm

Dimensions des casiers : 500 x 500 mm

Hauteur d'entrée : 420 mm

Capacité en casiers : jusqu'à 40 casiers/h



Pour de hautes exigences et encore plus de confort : techniques de lavage premium pour les verres, la vaisselle et les plateaux.

M-iClean U Lave-vaisselle encastrables

- Grâce à la nouvelle récupération d'énergie *ConfortAir* :
 - aucune sortie de buée visible
 - excellent résultat de séchage
 - gain de temps de 30 s* par rapport au modèle précédent
 - économies d'énergie jusqu'à 21 %*
- Lave sans problème des formats spéciaux comme des plateaux, de grands verres et de petits bacs gastro
- Lavage hygiénique selon la norme DIN
- Concept efficience bleue pour une simplicité d'utilisation optimale
- Grâce à l'osmoseur *MODULE GiO* :
 - pas de transformations
 - faible encombrement
 - réduction des coûts d'installation et de maintenance
 - fini le lustrage manuel
- Construction durable d'appareil grâce à des matériaux longue durée – plus d'acier inoxydable, moins de plastique, même pour les conduits de dosage



M-iClean US

Dimensions (L x P x H) : 460 x 600 x 700 mm
 Dimensions des casiers : 400 x 400 mm
 Hauteur d'entrée : 315 mm
 Capacité en casiers : jusqu'à 40 casiers/h



M-iClean UM

Dimensions (L x P x H) : 600 x 600 x 700 mm
 Dimensions des casiers : 500 x 500 mm
 Hauteur d'entrée : 315 mm
 Capacité en casiers : jusqu'à 40 casiers/h



M-iClean UM+

Dimensions (L x P x H) : 600 x 600 x 820 mm
 Dimensions des casiers : 500 x 500 mm
 Hauteur d'entrée : 435 mm
 Capacité en casiers : jusqu'à 40 casiers/h



M-iClean UL

Dimensions (L x P x H) : 600 x 680 x 820 mm
 Dimensions des casiers : 500 x 600 (500) mm
 Hauteur d'entrée : 435 mm
 Capacité en casiers : jusqu'à 40 casiers/h



* Toutes les données indiquées sont des valeurs maximales et se réfèrent aux économies réalisées en utilisant la récupération d'énergie *ConfortAir*.

Plus rapide, plus performant dans le séchage et moins de vapeur lors de l'ouverture de la porte : la *M-iClean U*.



Un environnement de travail quasiment sans humidité : à l'ouverture de la porte, aucune vapeur ne s'échappe. L'utilisateur ne se retrouve plus dans le brouillard de vapeur, les lunettes ne sont plus embuées, plus aucune humidité sur les meubles.



L'écran en verre de la *M-iClean U* fournit toutes les informations importantes en un coup d'oeil avec la poignée lumineuse.



La pompe de vidange de la *M-iClean U* est aisément accessible de l'intérieur ce qui permet de retirer rapidement les éventuels corps étrangers afin de poursuivre le processus de lavage.



La nouvelle récupération d'énergie *ConfortAir* réduit l'humidité résiduelle jusqu'à 98 % pour les assiettes et jusqu'à 75 % pour les verres.



Formé d'une seule pièce : le bras de lavage et de rinçage combiné *M-iClean U* avec surveillance par capteur.



Une propreté maximale jusque dans les moindres recoins avec une utilisation judicieuse des ressources.



Facile à retirer et à nettoyer : le filtre *M-iClean U* surveillé par capteur.



MEIKO Private Label : l'écran d'accueil peut être configuré individuellement avec votre logo. Par ailleurs, l'écran de veille peut être personnalisé avec jusqu'à trois motifs de votre choix. Par exemple les coordonnées de notre Service Après-Vente.



Les dimensions compactes du lave-vaisselle et l'osmoseur **MODULE GiO** MEIKO intégré dans la machine réduisent les besoins en espace et rendent toute pré-installation ou transformation fastidieuse superflues. Gain de temps, de place et économies de coûts !



Et le filtre fin peut être remplacé facilement – sans l'aide d'un technicien et donc sans coûts de maintenance supplémentaires.

M-iClean U
avec osmoseur
MODULE GiO
intégré

Technologie **MEIKO** d'osmoseur **MODULE GiO** pour la déminéralisation de l'eau de lavage

Sur la *M-iClean U*, la technologie MEIKO de déminéralisation de l'eau de lavage avec l'osmoseur **MODULE GiO** MEIKO est intégré dans la machine (option). Il est composé d'un module d'osmose inverse et d'un filtre fin, celui-ci élimine pratiquement tous les minéraux et corps étrangers (y compris les bactéries et les virus) présents dans l'eau. L'osmoseur **MODULE GiO** de MEIKO garantit ainsi une eau de lavage ultra-pure et une vaisselle brillante, sans aucun lustrage manuel.



Osmoseur **MODULE GiO MEIKO**
intégré dans le socle
Dimensions (hauteur) :
120 mm ou 150 mm, au choix



Osmoseur **MODULE GiO MEIKO**
à l'arrière de la machine
Dimensions (profondeur) :
90 mm



Osmoseur **MODULE GiO MEIKO**
à proximité de la machine ou
dans une autre pièce, par ex.
Dimensions (L x P x H)
140 x 550 x 600 mm

Longue durée de vie et grand confort d'utilisation à un prix équitable : les techniques de lavage professionnelles pour les cuisines centrales.

UPster® H Lave-vaisselle à capot

- Bien plus de place qu'il n'en faut pour les petits et les grands ustensiles, hauteur de passage de 440 mm
- Sécurité sans compromis en matière d'hygiène grâce à l'affichage digital de la température
- Utilisation simple avec un système de démarrage automatique
- Fiabilité avec des résultats de lavage constants grâce au surpresseur
- Pas de temps d'attente ou d'interruption du travail, vu que le lavage peut continuer pendant la régénération de l'adoucisseur d'eau intégré (en option).
- Lavage délicat des verres et de la vaisselle grâce à la pompe de lavage à démarrage progressif
- Robuste et dédié à l'utilisation professionnelle intensive
- Grande sécurité de fonctionnement grâce à la détection de fuites d'eau dans la cuve de fond
- Système de lavage et de rinçage en haut et en bas en acier inoxydable
- Selon vos exigences relatives à la qualité de l'eau, avec adoucisseur d'eau ou osmose inverse (*osmoseur MODULE GiO*) sur demande

UPster® H 500

Dimensions, ouvert (L x P x H) : 635 (687) x 750 (980) x 2 050 mm (avec poignée du capot)

Dimensions des casiers : 500 x 500 mm

Hauteur de passage : 440 mm

Capacité en casiers : jusqu'à 40 casiers/h



Techniques premium pour les utilisateurs fréquents qui accordent une grande importance à des processus ergonomiques et une utilisation confortable.

M-iClean H Lave-vaisselle à capot

avec détection de casier et ouverture et fermeture automatisée du capot

- Une organisation de la cuisine plus flexible grâce à l'osmoseur *MODULE GiO* intégré
- Gain de temps jusqu'à 30 minutes par jour* (sur la base de 120 cycles de lavage par service env.)
- Une communication homme-machine simple grâce au concept de signalisation et au panneau de commande en verre placé à hauteur des yeux
- Un meilleur climat ambiant grâce au condenseur de buées à récupération d'énergie
- Un bien-être de travail accru grâce à l'ouverture et la fermeture automatisée du capot et à la détection automatique des casiers
- Gain supplémentaire de temps et d'argent combiné à un plus d'hygiène grâce à la table de séchage en option
- Une durabilité garantit grâce aux conduits ascendants, de rinçage et de dosage en acier inoxydable

M-iClean HM

Dimensions, ouvert (L x P x H) : 635 (725) x 750 (800) x 2 080 mm (avec les poignées)
Dimensions des casiers : 500 x 500 mm
Hauteur de passage : 505 mm
Capacité en casiers : jusqu'à 60 casiers/h



M-iClean HL

Dimensions, ouvert (L x P x H) : 735 (825) x 750 (800) x 2 190 mm (avec les poignées)
Dimensions des casiers : 500 (650) x 500 mm
Hauteur de passage : 560 mm
Capacité en casiers : jusqu'à 60 casiers/h



M-iClean HXL

Dimensions, ouvert (L x P x H) : 1 180 (1 270) x 750 (800) x 2 080 mm (avec les poignées)
Dimensions des casiers : 2 x (500 x 500 mm)
Hauteur de passage : 505 mm
Capacité en casiers : jusqu'à 120 casiers/h



* Comparé à un lave-vaisselle à capot commercial sans ouverture et fermeture automatisée du capot.

Des temps ergonomiques pour les cuisines centrales :
avec la *M-iClean H* en version casier double ou casier simple.



Un amortissement en fin de course du capot garantit une ouverture et une fermeture silencieuses. Sans effort et tout en souplesse. Le chargement/déchargement plus facile et bien plus confortable ainsi que le concept d'utilisation ergonomique de la *M-iClean H* ménagent le dos et la musculature du personnel tout en lui faisant gagner du temps.




Le concept efficacité bleue : tous les éléments avec un repère bleu peuvent être retirés, nettoyés et réinsérés. La *M-iClean H* vérifie automatiquement si tout a été remis en place correctement.




Le porte-casier en deux parties* facilement amovible permet un accès optimal pour le nettoyage. **M-iClean HXL*

Le système de détection automatique des casiers facilite la tâche du personnel


Conduits de dosage en acier inoxydable

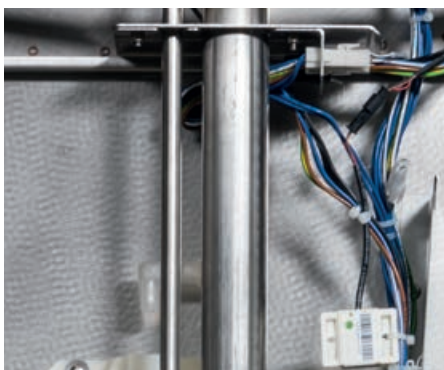

Conduits ascendants en acier inoxydable

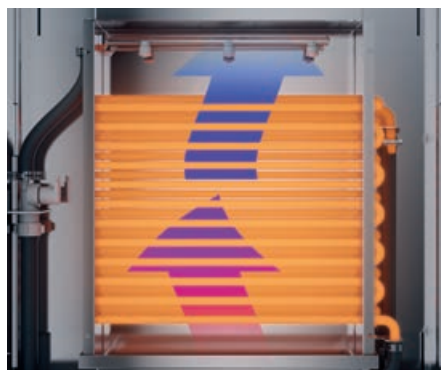

Récupération d'énergie MEIKO *AirConcept*

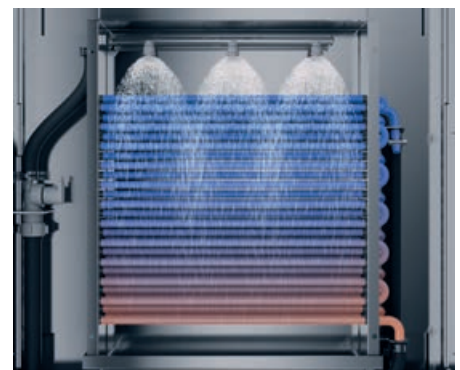

Auto-nettoyage en fin de service

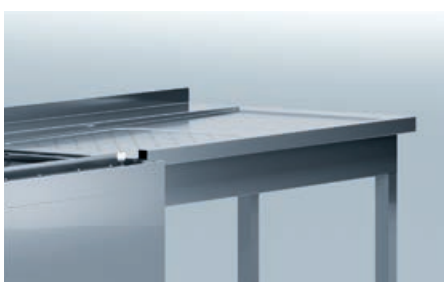


Table de séchage pour séchage actif et rapide de la vaisselle



Récupération d'énergie des eaux usées



Écran de verre flexible en verre trempé hygiénique



Pour les salissures tenaces : force de lavage dynamique et espace pour la vaisselle encombrante et de grande dimension.

DV / FV Lave-batteries

- Un résultat de lavage optimal avec une quantité d'eau réduite
- De faibles coûts d'exploitation grâce au système de filtre fin *AktivPlus*
- Récupération d'énergie et émission de vapeur réduite pour un meilleur climat ambiant
- De brillants résultats de lavage avec l'*osmoseur MODULE GiO*
- Nettoyage sans problème des parois intérieures lisses
- Programme de renouvellement d'eau – pour un résultat de lavage garant de l'hygiène
- Hauteurs d'entrée extra-élevées pour la vaisselle avec de grandes dimensions

DV 270.2

Dimensions, ouvert (L x P x H) : 1 600 x 995 x 2 510 mm
Dimensions des casiers : 1 310 x 690 mm
Hauteur de passage : 650 mm
Capacité en casiers : jusqu'à 30 casiers/h



FV 130.2

Dimensions, ouvert (L x P x H) : 1 030 x 895 x 2 185 mm
Dimensions des casiers : 850 x 700 mm
Hauteur d'entrée : 740 mm
Capacité en casiers : jusqu'à 30 casiers/h



FV 250.2

Dimensions, ouvert (L x P x H) : 1 490 x 895 x 2 490 mm
Dimensions des casiers : 1 310 x 700 mm
Hauteur d'entrée : 890 mm
Capacité en casiers : jusqu'à 30 casiers/h



Performance maximale de lavage pour un encombrement minimum :
technique propre, calcul de prix hyper-précis, livraison rapide.

UPster® K Lave-vaisselle à avancement automatique de casiers

- Performance de lavage supérieure avec une qualité de nettoyage maximale et un encombrement minimal
- Structure de machine à rétention d'énergie sans aspiration
- 3 capacités de casiers – pour une adaptation optimale aux besoins de l'arrière-cuisine
- Une utilisation intuitive et une facilité d'utilisation, de nettoyage et d'entretien
- Une hauteur de passage élevée (508 mm) permet le lavage même des plus grandes pièces de vaisselle
- Temps de production et d'installation courts et délais de livraison rapides

UPster® K-S 160

Longueur de machine sans séchage : 1 300 mm
Longueur de machine avec séchage : 1 900 mm
Hauteur de passage : 508 mm
Dimensions des casiers : 500 x 500 mm
Capacité en casiers : 80 - 100* - 120 casiers/h



UPster® K-S 200

Longueur de machine sans séchage : 1 550 mm
Longueur de machine avec séchage : 2 150 mm
Hauteur de passage : 508 mm
Dimensions des casiers : 500 x 500 mm
Capacité en casiers : 95* - 125 - 150 casiers/h



UPster® K-M 250

Longueur de machine sans séchage : 2 050 mm
Longueur de machine avec séchage : 2 650 mm
Hauteur de passage : 508 mm
Dimensions des casiers : 500 x 500 mm
Capacité en casiers : 125* - 150 - 190 casiers/h



UPster® K-M 280

Longueur de machine sans séchage : 2 350 mm
Longueur de machine avec séchage : 2 950 mm
Hauteur de passage : 508 mm
Dimensions des casiers : 500 x 500 mm
Capacité en casiers : 140* - 180 - 210 casiers/h



UPster® K-L 340

Longueur de machine sans séchage : 2 850 mm
Longueur de machine avec séchage : 3 450 mm
Hauteur de passage : 508 mm
Dimensions des casiers : 500 x 500 mm
Capacité en casiers : 170* - 210 - 250 casiers/h



* Correspond à la durée de contact exigée dans la norme DIN SPEC 10534 de 2 minutes.


Pour les cuisines centrales à la pointe de l'exigence en matière de pureté, hygiène et rentabilité. Casier après casier.

M-iQ Lave-vaisselle à avancement automatique de casiers

- Performance de lavage améliorée de 30 % pour un tiers d'énergie en moins*
- Système de filtrage révolutionnaire pour une propreté optimale avec beaucoup moins d'eau et de détergent
- Résultat de séchage remarquable et haute efficacité énergétique avec le séchage *M-iQ AirConfort*
- Excellent climat ambiant grâce à une récupération d'énergie efficace du lave-vaisselle professionnel
- Utilisation intuitive grâce à un écran en verre parfaitement hygiénique
- Un auto-nettoyage intelligent facilite le travail
- *GreenEye-Technology®* avec économie d'eau

M-iQ Série K

Longueur de machine : 2 050 - 4 250 mm
Hauteur de passage : 465 mm
Largeur de passage : 570 mm
Dimensions des casiers : 500 x 500 mm
Capacité en casiers : 95 - 225 casiers/h

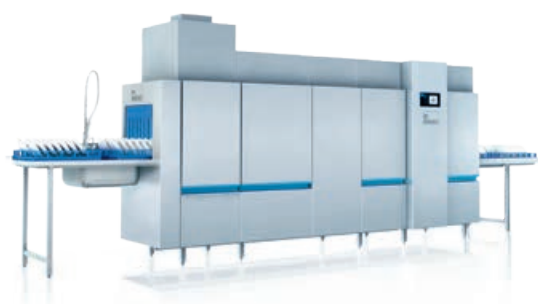


Pour les cuisines centrales qui exigent une capacité maximale et un nettoyage sans compromis sur un espace restreint. En continu.

M-iQ Lave-vaisselle à convoyeur

- Temps de nettoyage réduit avec le concept efficacité bleue
- Force de lavage maximale pour un tiers de matériel et d'énergie en moins*
- Grâce à *M-iQ AirConcept* l'installation d'une extraction d'air devient inutile
- Résultat de séchage remarquable avec le séchage *M-iQ AirConfort*
- Confort d'utilisation idéal avec l'écran en verre CC
- *GreenEye-Technology®* avec aide opérationnelle et économie d'eau claire

M-iQ Série B

Longueur de machine : 4 700 - 10 200 mm
Hauteur de passage : 465 mm
Largeur de passage : 570 / 750 mm
Capacité en assiettes : 1 730 - 8 930 assiettes/h

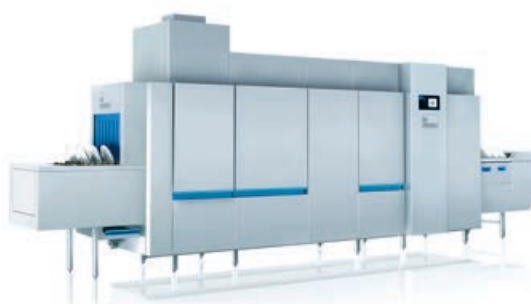





Techniques de nettoyage et de désinfection **MEIKO**

Sécurité d'hygiène professionnelle
alliée au confort du travail et à la rentabilité

La solution raffinée pour le local vidoir.

TOPIC 20 Appareil de nettoyage et de désinfection

- Utilisation simple grâce au système de commande « One Touch » avec son clavier à membrane doté de grandes touches et de symboles clairs
- Sécurité en matière d'hygiène grâce à la commande de valeur A_0 selon DIN EN ISO 15883
- Très économique grâce à une utilisation réduite de ressources
- Cycles de nettoyage courts, efficaces et personnalisables
- Processus de nettoyage et de désinfection sans émissions de buées
- Commande du processus de désinfection avec des sondes de température. L'évaluation de la surveillance s'effectue avec le logiciel de commande
- Commande électronique avec divers programmes de nettoyage
- Sécurité en matière d'hygiène grâce à la désinfection thermique
- Large palette d'utilisation grâce à de nombreux accessoires et à des options axées sur les besoins pratiques

TOPIC 20 Appareil individuel

Dimensions (L x P x H) :

fermé 500 x 450 x 1 730 mm, ouvert 500 x 880 x 1 730 mm

Raccordements d'eau :

Conduite d'alimentation sur site : G 1/2" / DN 15, eau froide (5-25 °C), eau chaude (45-60 °C)

Du point de vue microbiologique, l'eau d'alimentation doit avoir une qualité équivalente à celle de l'eau potable.

Pression d'eau : 100 kPa min., 500 kPa max.

Débit d'eau sur site : 18 l/min

Évacuation : DN 100

Raccordement électrique :

Standard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4,6 kW

Alternative 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2,8 kW

Émission sonore :

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail LpA 48,2 dB



TOPIC 20 Appareil individuel avec vidoir

Dimensions (L x P x H) :

fermé 1 000 x 450 x 1 730 mm, ouvert 1 000 x 880 x 1 730 mm

Raccordements d'eau :

Conduite d'alimentation sur site : G 1/2" / DN 15, eau froide (5-25 °C), eau chaude (45-60 °C)

Du point de vue microbiologique, l'eau d'alimentation doit avoir une qualité équivalente à celle de l'eau potable.

Pression d'eau : 100 kPa min., 500 kPa max.

Débit d'eau sur site : 18 l/min

Évacuation : DN 100

Raccordement électrique :

Standard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4,6 kW

Alternative 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2,8 kW

Émission sonore :

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail LpA 48,2 dB



Puissante technique pour plus d'hygiène
dans le local vidoir.

MEIKO TopLine 20 Appareil de nettoyage et de désinfection

- Facilite le travail et limite les erreurs d'utilisation grâce au système d'assistance intelligent avec sélection de programme automatique et reconnaissance des charges (en option)
- Système de nettoyage puissant avec gicleur rotatif télescopique, gicleurs et bras de lavage en acier inoxydable
- Concept efficacité bleue avec un écran en verre où s'affichent les fonctions pouvant être sélectionnées et utilisées
- Concept de signalisation MEIKO dont les éléments lumineux indiquent de loin l'état de fonctionnement de la machine
- Sécurité sanitaire grâce au contrôle de la valeur A_0 (conforme à la norme DIN EN ISO 15883 et réglable jusqu'à 12 000)
- Contrôle des processus et protocoles d'hygiène grâce à l'application gratuite *MEIKO Connect* et connexion au service technique interne
- Moins de points de contact et de ce fait, risque d'infection réduit grâce à la porte automatique (en option)

MEIKO TopLine 20 Appareil individuel

Dimensions (L x P x H) :

fermé 500 x 450 x 1 730 mm, ouvert 500 x 880 x 1 730 mm

Raccordements d'eau :

Conduite d'alimentation sur site : G 3/4" / DN 15, eau froide (5-25 °C), eau chaude (45-60 °C)

Du point de vue microbiologique, l'eau d'alimentation doit avoir une qualité équivalente à celle de l'eau potable.

Pression d'eau : 100 kPa min., 500 kPa max.

Débit d'eau sur site : 18 l/min

Évacuation : DN 100

Raccordement électrique :

Standard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4,6 kW

Alternative 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2,8 kW

Émission sonore :

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail LpA 48,2 dB



MEIKO TopLine 20 Appareil individuel avec vidoir

Dimensions (L x P x H) :

fermé 1 000 x 450 x 1 730 mm, ouvert 1 000 x 880 x 1 730 mm

Raccordements d'eau :

Conduite d'alimentation sur site : G 3/4" / DN 15, eau froide (5-25 °C), eau chaude (45-60 °C)

Du point de vue microbiologique, l'eau d'alimentation doit avoir une qualité équivalente à celle de l'eau potable.

Pression d'eau : 100 kPa min., 500 kPa max.

Débit d'eau sur site : 18 l/min

Évacuation : DN 100

Raccordement électrique :

Standard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4,6 kW

Alternative 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2,8 kW

Émission sonore :

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail LpA 48,2 dB



Une mini-combinaison pour une maxi-performance : pour plus d'hygiène dans les maisons de retraite et résidences médicalisées.

TOPIC 40 Appareil de nettoyage et de désinfection

(de série avec armoire verrouillable pour les bidons de produits chimiques)

- Utilisation simple grâce au système de commande « One Touch » avec son clavier à membrane doté de grandes touches et de symboles clairs
- Sécurité en matière d'hygiène grâce à la commande de valeur A₀ selon DIN EN ISO 15883
- Très économique grâce à une utilisation réduite de ressources
- Cycles de nettoyage courts, efficaces et personnalisables
- Processus de nettoyage et de désinfection sans émissions de buées
- Commande du processus de désinfection avec des sondes de température. L'évaluation de la surveillance s'effectue avec le logiciel de commande
- Commande électronique avec divers programmes de nettoyage
- Sécurité en matière d'hygiène grâce à la désinfection thermique
- Large palette d'utilisation grâce à de nombreux accessoires et à des options axées sur les besoins pratiques

TOPIC 40 Appareil individuel

Dimensions (L x P x H) :

fermé 900 x 600 x 1 000 mm, ouvert 900 x 1 010 x 1 000 mm

Raccordements d'eau :

Conduite d'alimentation sur site : G 1/2" / DN 15, eau froide (5-25 °C), eau chaude (45-60 °C)

Du point de vue microbiologique, l'eau d'alimentation doit avoir une qualité équivalente à celle de l'eau potable.

Pression d'eau : 100 kPa min., 500 kPa max.

Débit d'eau sur site : 18 l/min

Évacuation : DN 100

Raccordement électrique :

Standard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4.6 kW

Alternative 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2.8 kW

Émission sonore :

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail LpA 48,2 dB



TOPIC 40 SAN 14 Combiné de soins

Dimensions (L x P x H) :

fermé 1 400 x 600 x 900 mm, ouvert 1 400 x 1 010 x 900 mm

Raccordements d'eau :

Conduite d'alimentation sur site : G 1/2" / DN 15, eau froide (5-25 °C), eau chaude (45-60 °C)

Du point de vue microbiologique, l'eau d'alimentation doit avoir une qualité équivalente à celle de l'eau potable.

Pression d'eau : 100 kPa min., 500 kPa max.

Débit d'eau sur site : 18 l/min

Évacuation : DN 100

Raccordement électrique :

Standard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4.6 kW

Alternative 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2.8 kW

Émission sonore :

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail LpA 48,2 dB



La classe compacte parmi les appareils de nettoyage et de désinfection : pour un plus grand plan de travail, plus de confort et d'efficacité en résidence médicalisée.

MEIKO TopLine 40 Appareil de nettoyage et de désinfection

(avec plan de travail et de dépose)

- Facilite le travail et limite les erreurs d'utilisation grâce au système d'assistance intelligent avec sélection de programme automatique et reconnaissance des charges (en option)
- Système de nettoyage puissant avec gicleur rotatif télescopique, gicleurs et bras de lavage en acier inoxydable
- Concept efficacité bleue avec un écran en verre où s'affichent les fonctions pouvant être sélectionnées et utilisées
- Concept de signalisation MEIKO dont les éléments lumineux indiquent de loin l'état de fonctionnement de la machine
- Sécurité sanitaire grâce au contrôle de la valeur A_0 (conforme à la norme DIN EN ISO 15883 et réglable jusqu'à 12 000)
- Contrôle des processus et protocoles d'hygiène grâce à l'application gratuite *MEIKO Connect* et connexion au service technique interne
- Moins de points de contact et de ce fait, risque d'infection réduit grâce à la porte automatique (en option)

MEIKO TopLine 40 Appareil individuel

Dimensions (L x P x H) :

fermé 900 x 600 x 1 000 mm, ouvert 900 x 1 010 x 1 000 mm

Raccordements d'eau :

Conduite d'alimentation sur site : G 3/4" / DN 15, eau froide (5-25 °C), eau chaude (45-60 °C)

Du point de vue microbiologique, l'eau d'alimentation doit avoir une qualité équivalente à celle de l'eau potable.

Pression d'eau : 100 kPa min., 500 kPa max.

Débit d'eau sur site : 18 l/min

Évacuation : DN 100

Raccordement électrique :

Standard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4.6 kW

Alternative 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2.8 kW

Émission sonore :

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail LpA 48,2 dB



MEIKO TopLine 40 SAN 14 Combiné de soins

Dimensions (L x P x H) :

fermé 1 400 x 600 x 900 mm, ouvert 1 400 x 1 010 x 900 mm

Raccordements d'eau :

Conduite d'alimentation sur site : G 3/4" / DN 15, eau froide (5-25 °C), eau chaude (45-60 °C)

Du point de vue microbiologique, l'eau d'alimentation doit avoir une qualité équivalente à celle de l'eau potable.

Pression d'eau : 100 kPa min., 500 kPa max.

Débit d'eau sur site : 18 l/min

Évacuation : DN 100

Raccordement électrique :

Standard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4.6 kW

Alternative 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2.8 kW

Émission sonore :

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail LpA 48,2 dB





The clean solution

MEIKO FRANCE SAS · 23, rue de Lamirault · 77090 Collégien, France
Tél. +33 1 64156520 · contact@meiko.fr · www.meiko.fr

MEIKO Belgium · Industriepark West 75 · 9100 Sint-Niklaas, Belgique
Tél. +32 78 150279 · info@meiko-belgium.be · www.meiko-belgium.be

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Suisse
Tél. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko-suisse.ch

MEIKO GREEN Waste Solutions GmbH · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Allemagne
Tél. +49 781 9191-9000 · info@meiko-green.com · www.meiko-green.com

Fabricant :
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Allemagne
Tél. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com



600.201.02.01.23/FR-Int/digital

Sous réserve de modifications techniques