

MEIKO TOPIC

Máquinas de limpieza y desinfección





MÁS TIEMPO PARA LAS PERSONAS

Con solo pulsar un botón, las máquinas de limpieza y desinfección de MEIKO limpian y desinfectan sus utensilios sanitarios. Eliminan de forma fiable bacterias, virus e incluso esporas de *C. diff*, cumpliendo plenamente con la norma EN ISO 15883.

El resultado es una higiene excepcional, además de una menor carga de trabajo para su personal asistencial.

Entre los beneficios también se encuentra una mayor eficiencia operativa. Jörg Menzel, director general de Blindenwohnstätten Berlin —una residencia para personas ciegas—, explica por qué esto es tan importante: «Los centros asistenciales como el nuestro necesitan tener acceso a tecnologías que reduzcan nuestra carga de trabajo y hagan que los procesos sean más eficientes».

Sea cual sea su distribución, *TOPIC* se adapta al espacio disponible. Elija entre un aparato de pie, un modelo bajo mostrador o una versión montada en pared con separación del suelo. Incluso podemos suministrarla como una combinación sanitaria totalmente equipada, que incluye todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento diario.

Las máquinas *TOPIC* individuales están diseñadas para permitir una sustitución rápida y sin complicaciones de los equipos obsoletos. Se adaptan perfectamente al espacio que ocupaba su antigua máquina —independientemente de la marca original— utilizando las conexiones que ya tiene.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:


- Seguridad higiénica gracias al control de valor A_0 de conformidad con la norma EN ISO 15883
- Limpieza estanca al vapor y sistema de desinfección
- Tres ciclos de programa eficientes (corto, normal, intensivo)
- Fácil manejo gracias a los controles One Touch
- Ahorro de costes gracias a un bajo consumo de recursos
- Flexibilidad gracias a soportes de recipientes multifuncionales
- MEIKO 360°: la solución completa que abarca los productos químicos, el servicio, la *MEIKO Academy* y la planificación

MEIKO TOPIC – Tecnología

Una tecnología de primera categoría, fabricada en acero inoxidable resistente a la corrosión, sienta las bases para una gran durabilidad, lo que convierte su inversión en una apuesta especialmente segura.

Y lo mejor de todo: la cámara de lavado embutida está diseñada sin esquinas ni bordes, lo que la hace ideal para la autolimpieza. El sistema de boquillas de alta eficiencia, con una ubicación óptima, garantiza una limpieza excelente de las botellas de orina, las cuñas, los cubos de heces y otros recipientes.

La tecnología One-Touch facilita enormemente el control de los programas. Desde el inicio del programa hasta el análisis, todo se controla mediante el teclado de membrana.

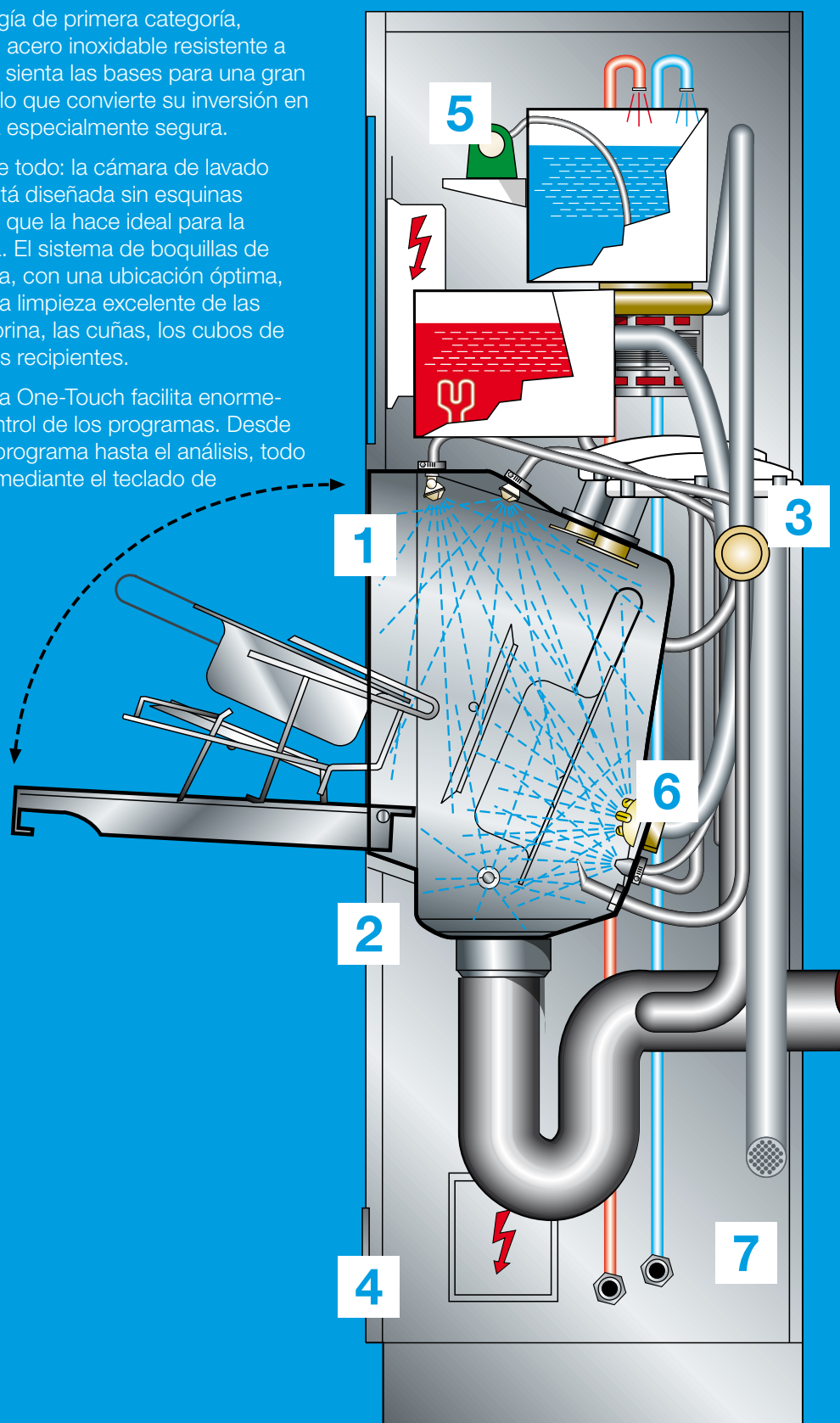

**Steam
Stop****Thermo
Control****System
Disinfect****Chem
Code****Chem
Control****Power
Clean****Cool
Touch****CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:****1. Un sistema totalmente estanco al vapor que controla y libera el vapor de forma segura****Ventajas**

- Previene eficazmente la propagación de gérmenes
- Mejora la seguridad y la higiene en el lugar de trabajo
- Reduce los daños causados por la humedad en el dispositivo y en la estancia

2. Dos sensores de temperatura que se controlan mutuamente, realizando mediciones precisamente donde más importa: en el punto más frío**Ventajas**

- Supervisa el cumplimiento de los valores A_0
- Garantiza una capacidad de desinfección fiable
- Cumple con los requisitos de la norma EN ISO 15883-1 y -3

3. Desinfección del sistema de la cámara de lavado, las tuberías de agua y las boquillas durante cada ciclo**Ventajas**

- Previene de forma fiable la recontaminación
- Garantiza una capacidad de desinfección constante mediante una distribución uniforme del vapor

4. Codificación por colores y formas de las conexiones químicas para el abrillantador con ablandador de agua y para el detergente**Ventajas**

- Evita de forma fiable las confusiones
- Garantiza unos flujos de trabajo claros
- Facilita el trabajo diario

5. Control mediante sensores del volumen de dosificación y funcionamiento del abrillantador con ablandador de agua y del detergente**Ventajas**

- Optimiza el uso de abrillantador con ablandador de agua y detergente
- Garantiza la fiabilidad del proceso de conformidad con las normas EN ISO 15883-1 y -3
- Evita depósitos de cal y los daños que provocan

6. Sistema de limpieza con una boquilla giratoria y boquillas de lavado adicionales situadas de forma óptima**Ventajas**

- Permite una limpieza a fondo con el mínimo tiempo y recursos
- Elimina eficazmente los gérmenes y los expulsa de forma activa
- Eficaz incluso contra las esporas de *C. diff* (confirmado por expertos) gracias a la combinación de la acción mecánica, la temperatura y el detergente

OPCIONAL**7. Reenfriamiento con aire filtrado, con efecto secado incluido****Ventajas**

- Refrigeradora con aire libre de gérmenes gracias al filtro HEPA
- Garantiza que los utensilios sanitarios estén listos para volver a utilizarse de inmediato
- Reduce el riesgo de recontaminación en comparación con la refrigeración por agua

MEIKO TOPIC – Actualizaciones y parametrización de la máquina



APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO DE LA PUERTA CON SENSOR MANUAL INFRARROJO Y/O INTERRUPTOR DE PIE: (opcional)

- Minimiza el riesgo de propagación de patógenos
- Más fácil de utilizar en entornos asistenciales

VALOR AJUSTABLE A₀:

- Elija de forma flexible su valor A₀
- Parametrización disponible: A₀ 60, A₀ 600, A₀ 3 000 (3 000 en combinación con CoolTouch)
- Establezca las medidas, previa consulta con su equipo de control de infecciones, para la higiene básica o según sea necesario

EL VALOR A₀ PERFECTO EN TRES PASOS



Paso 1:

Seleccione el programa de limpieza en función del tipo de utensilios sanitarios y del grado de suciedad; pulse el botón y manténgalo pulsado.




Pase 2:

La pantalla muestra la parametrización A₀ disponibles: A₀ 60 / A₀ 600 / A₀ 3 000. Suelte el botón cuando aparezca en el centro la parametrización que desee.



Paso 3:

Después de soltar la tecla, el programa arrancará automáticamente.

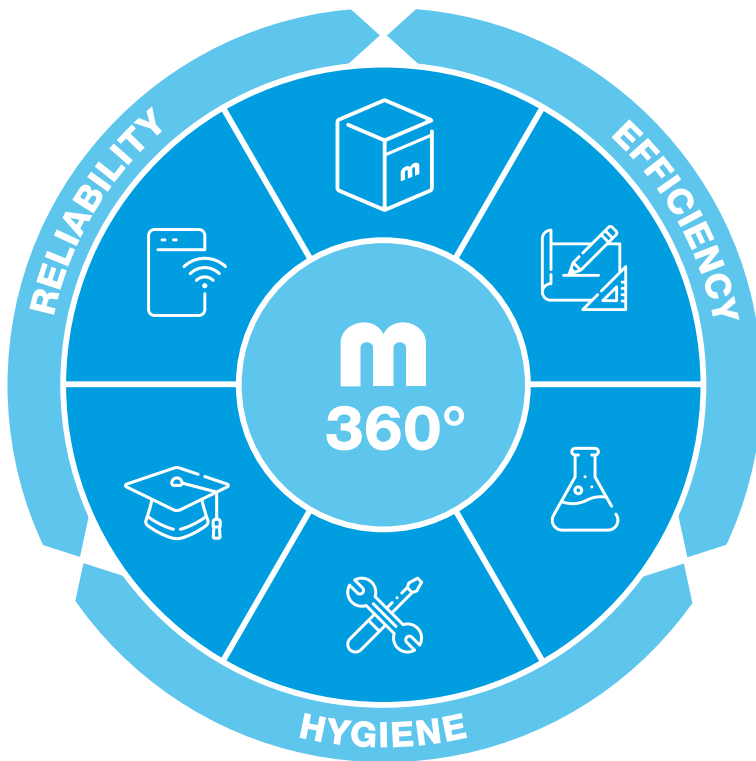

MEIKO 360°: DISEÑO INTEGRAL. EJECUCIÓN EXPERTA.

La limpieza perfecta nunca es fruto de la casualidad. Es el resultado de que todo funcione en armonía. MEIKO 360° combina todos los factores clave en una única solución integrada: desde una planificación especializada, tecnología de alto rendimiento y productos químicos perfectamente adaptados, hasta un servicio fiable, conectividad inteligente y la transferencia de conocimientos a través de la *MEIKO Academy*.

Junto a usted, unimos distintas piezas para formar un todo potente: higiénico, eficiente y fiable.

PRODUCTOS QUÍMICOS DE MEIKO

Para obtener unos resultados de limpieza excelentes, necesita la combinación perfecta de tecnología, detergente (opcional) y abrillantador. Esto es así en los productos Doyen autorizados por MEIKO.

Ventajas de los productos químicos Doyen:

- Autorizados para el uso en dispositivos TOPIC
- Cantidad de dosificación óptima y lo más baja posible
- Compatibilidad probada con los materiales



MEIKO TOPIC – Todo de un mismo proveedor



PLANIFICACIÓN DE MEIKO

Desde la máquina individual a la combinación sanitaria, trabajaremos junto a usted para planificar todo el diseño de su cuarto séptico. Esa es la mejor forma de crear espacios de trabajo con un nivel de higiene excepcional y optimizados desde el punto de vista ergonómico, que satisfagan tanto las expectativas de los clientes como los requisitos normativos.


Entre nuestras características distintivas se encuentran:

- Soluciones limpias a medida, ya sea en rehabilitaciones, modernizaciones o proyectos nuevos
- Conexiones eficientes
- Superficies lisas que integran a la perfección los distintos componentes individuales
- Totalmente de acero inoxidable



MEIKO ACADEMY

¿Sabía que también ofrecemos formación para técnicos de la empresa? La *MEIKO Academy* ofrece acceso directo a la base de conocimientos que hemos ido acumulando a lo largo de décadas. Nuestras formaciones, tanto en línea como presenciales, le pondrán al día sobre las últimas tecnologías. Los cursos de formación también abordan temas clave del ámbito de la microbiología y el control de infecciones, así como cuestiones jurídicas importantes.

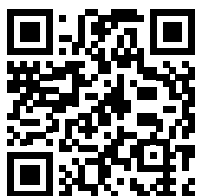

Obtenga más información sobre nuestros programas de formación en: **www.meiko-academy.com**



SERVICIO DE MEIKO

Nuestros equipos de servicio posventa ofrecen una respuesta rápida, tiempos de llegada cortos y furgonetas de servicio equipadas con un amplio surtido de piezas de recambio.

Beneficios del *Servicio de MEIKO*: línea de atención al cliente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Técnicos de servicio autorizado formados en la *MEIKO Academy*.



MEIKO TOPIC – Vista general del modelo

Máquinas individuales

MEIKO TOPIC 10 – Unidad montada en pared (con o sin módulo de fregadero)

El montaje en la pared deja el suelo libre, lo que facilita la limpieza



MEIKO TOPIC 10

Dimensiones (mm): An. 500, Pr. 450 o 588, Al. (dispositivo) 1 630



MEIKO TOPIC 10 A

Dimensiones (mm): An. 1 000, Pr. 450 o 588, Al. (dispositivo) 1 630
Protección antisalpicaduras (opcional)

MEIKO TOPIC 20 – Unidad de pie (con o sin módulo de fregadero)
Montaje de pie con zócalo para una instalación rápida



MEIKO TOPIC 20
Dimensiones (mm): An. 500, Pr. 450 o 588, Al. 1 730



MEIKO TOPIC 20 A
Dimensiones (mm): An. 1 000, Pr. 450 o 588, Al. 1 730
Protección antisalpicaduras (opcional)

MEIKO TOPIC – Vista general del modelo

Máquinas individuales

MEIKO TOPIC 40 – Modelo bajo mostrador (con o sin lavamanos)

Montaje en suelo con zócalo para maximizar el espacio de trabajo y la superficie de almacenaje

- Equipado de serie con un armario para guardar objetos con cerradura para contenedores de productos químicos
- La mesa está disponible con borde plegado hacia arriba por un coste adicional



MEIKO TOPIC 40
Dimensiones (mm): An. 900, Pr. 600, Al. 900



MEIKO TOPIC 40 B
Dimensiones (mm): An. 900, Pr. 600, Al. 1 000
Lavamanos: An. 340, Pr. 370, Al. 150

Combinaciones sanitarias

Las combinaciones sanitarias de MEIKO están disponibles en diversas configuraciones, con modelos bajo mostrador adaptados a sus necesidades específicas y a la distribución de su espacio. Ofreciendo la máxima funcionalidad, contribuyen a facilitar las tareas diarias de cuidados.

SAN 14 B / MEIKO TOPIC

Unidad bajo mostrador con fregadero y lavamanos

Dimensiones (mm): An. 1 400, Pr. 600, Al. 1 000
Módulo de fregadero: Al. 700
Fregadero: Ø 362
Lavamanos: An. 340, Pr. 370, Al. 150



SAN 19B – Modelo bajo mostrador con módulo de fregadero, lavamanos y armario (500 mm)

Dimensiones (mm): An. 1 900, Pr. 600, Al. 900
Módulo de fregadero: Al. 700
Fregadero: Ø 362
Lavamanos: An. 340, Pr. 370, Al. 150
Medidas de armario: An. 500



SAN 20BW – Modelo bajo mostrador con módulo de fregadero, lavamanos, fregadero y armario (600 mm)

Dimensiones (mm): An. 2 000, Pr. 600, Al. 1 000
Módulo de fregadero: Al. 700
Fregadero: Ø 362
Lavamanos: An. 340, Pr. 370, Al. 150
Fregadero: An. 500, Pr. 400, Al. 300
Medidas de armario: An. 600



SAN 24W – Modelo bajo mostrador con módulo de fregadero, lavamanos y armario (1 000 mm)

Dimensiones (mm): An. 2 400, Pr. 600, Al. 900
Módulo de fregadero: Al. 700
Fregadero: Ø 362
Fregadero: An. 500, Pr. 400, Al. 300
Medidas de armario: An. 1 000



SAN 29BW – Modelo bajo mostrador con módulo de fregadero, lavamanos, fregadero y armario (1 500 mm)

Dimensiones (mm): An. 2 900, Pr. 600, Al. 900
Módulo de fregadero: Al. 700
Fregadero: Ø 362
Lavamanos: An. 340, Pr. 370, Al. 150
Fregadero: An. 500, Pr. 400, Al. 300
Medidas de armario: An. 1 500



MEIKO TOPIC – Accesorios

Además de su tecnología de limpieza y desinfección, MEIKO ofrece una amplia gama de accesorios y equipamiento. Estos productos favorecen unas condiciones de trabajo seguras y ergonómicas y permiten un almacenamiento higiénico de los utensilios sanitarios. ¡También estaremos encantados de desarrollar soluciones personalizadas que se adapten a sus necesidades!



Soportes de secado y almacenamiento*

- Para botellas de orina desinfectadas, cuñas y contenedores, con rejilla o bandeja de goteo
- Disponible en anchuras entre 500 y 1 400 mm



Estante de pared*

- Con estantes regulables en altura
- Disponible en todas las anchuras (profundidad 350 mm)



Armarios de pared cerrados**

- Con puertas batientes y un estante intermedio
- Disponible en anchuras 500/600/800/1 000/1 200/1 500 mm
- Opcional: panel luminoso y lámpara



Armarios de pared abiertos

- Para almacenamiento abierto con un estante intermedio
- Disponible en anchuras 500/1 000/1 200 mm



Combinación de lavado*

- Armarios bajos con cajones y otras características para combinaciones sanitarias
- Disponible en distintas anchuras y alturas




Módulo de fregadero*


- Modelo estándar equipado opcionalmente con sistema integrado de descarga del fregadero integrado
- Puede operarse independientemente de la máquina de limpieza y desinfección

* Las imágenes muestran accesorios/características adicionales


** Opcional: panel luminoso y lámpara

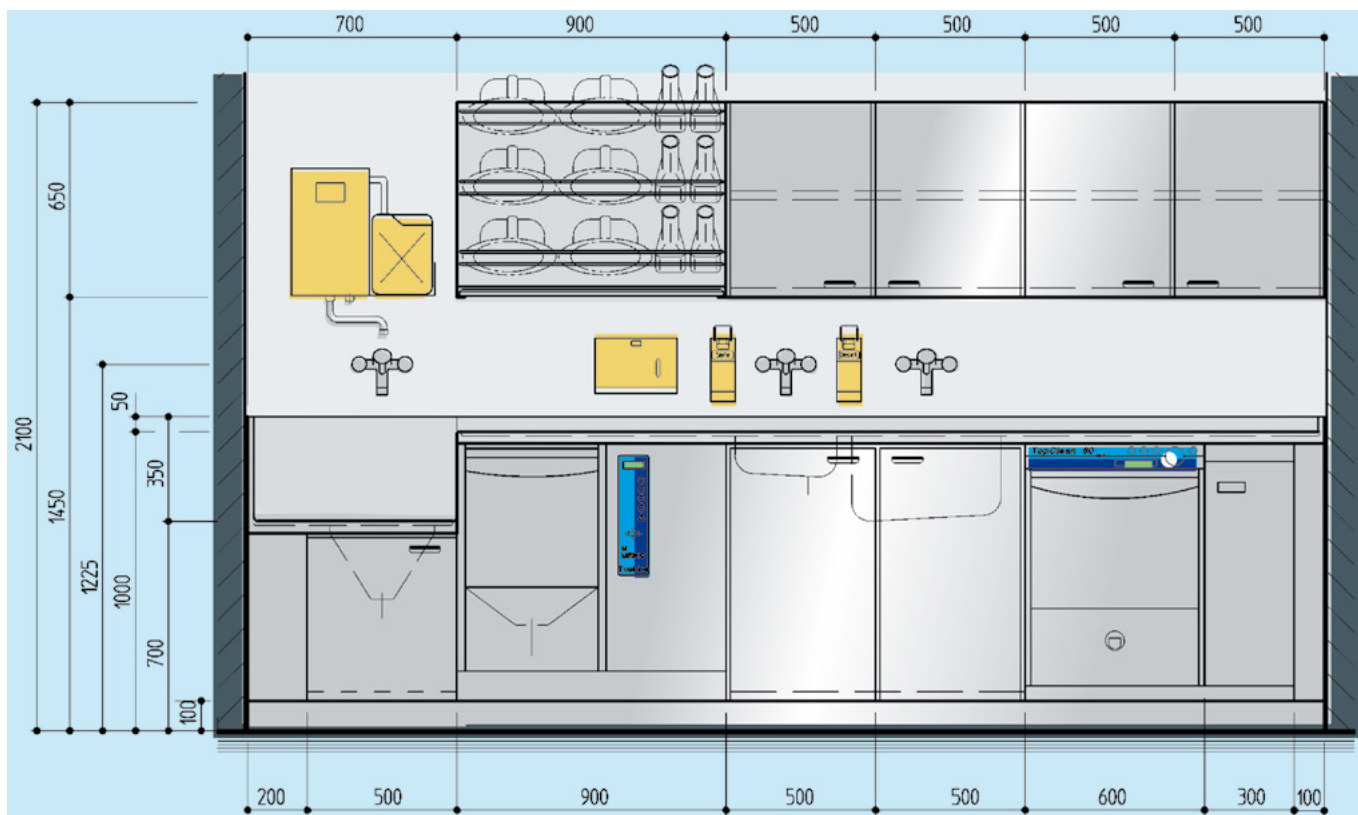


Modelo de pie con zócalo
TOPIC de MEIKO

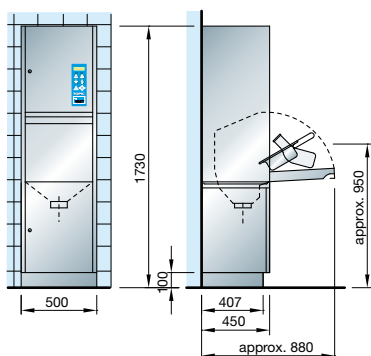

Pequeña combinación sanitaria
TOPIC de MEIKO

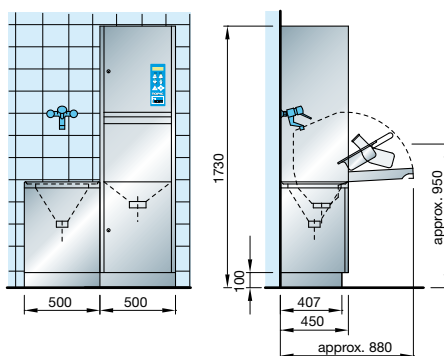

Máquina bajo mostrador
TOPIC de MEIKO

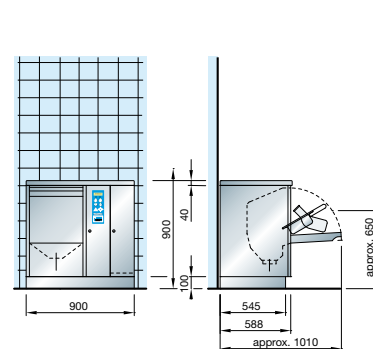

		TOPIC	
		400 V	230 V
Consumo total de corriente	kW	4,6	2,8
Conexión de agua de alimentación, agua fría		G ¾"	
Conexión de agua de alimentación, agua caliente 45-60 °C		G ¾"	
Presión de flujo	bar	1-5	
Caudal	l/min	18	
Desagüe		DN 100	
Nivel de ruido	dB(A)	48,2	



The clean solution

MEIKO Clean Solutions Ibérica S.L.U. · Ctra. de l'Hospitalet, 147-149
Cityparc Ronda de Dalt, Edificio Atenas · 08940 Cornellà de Llobregat, España
Tfno. +34 93 7817731 · info@meiko.es · www.meiko.com

Fabricante:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Alemania
Tfno. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com

