

MEIKO TOPIC

Yıkama ve dezenfeksiyon makineleri





DAHA FAZLA ZAMAN

MEIKO yıkama ve dezenfeksiyon makinesi, tek bir tuşa basarak hasta bakım malzemelerinizi temizler ve dezenfekte eder. Bakteriler ve virüsler, DIN EN ISO 15883 standardına göre etkin şekilde azaltılır. Bu, C. diff tipi sporlar için dahi geçerlidir!

Dolayısıyla hijyen güvenliği sağlanırken bir yandan da iş yükü azaltılır.

Verimlilik açısından da sonuçlar göz kamaştırıcıdır! Blindenwohnstätten Berlin'in Genel Müdürü Jörg Menzel de bunu doğruluyor: "Bakım sektöründe, iş yükümüzü hafifletecek ve süreçleri daha ekonomik kılacak teknolojilere ihtiyaç duyuyoruz."

Kurulum yerinin koşullarına bağlı olarak *TOPIC*, ayaklı, tezgahaltı veya duvara monte olarak tercih edilebilir. Veya iyi ve kullanışlı birçok özelliğe sahip tam donanımlı kombine ünite olarak da düşünebilirsiniz.

TOPIC tekli cihazlar, eski makinelerin hızlı ve kolayca değiştirilebilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Orijinal markadan tamamen bağımsız olarak mevcut sisteme entegre olur ve bağlanırlar.



SİZİ BEKLEYEN ÖZELLİKLER:

- DIN EN ISO 15883'e göre A₀ değeri ile hijyen güvenliği
- Buhar sızdırmaz temizleme ve dezenfeksiyon sistemi
- 3 etkili program (kısa, normal ve yoğun program)
- "One Touch" kullanım konsepti sayesinde rahat kullanım
- Daha az kimyasal kullanımı sayesinde maliyet tasarrufu
- Çok işlevli tutucular sayesinde esneklik
- Hepsi Bir Arada paketi: Kimyasal, servis, Academy ve planlama içeren MEIKO Clean Solution Çemberi

ÜSTÜN TEKNOLOJİ

Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş sağlam teknoloji, uzun cihaz ömrü için temel oluşturur ve yatırım güvenliği sağlar.

Derin çekme yıkama haznesi, köşesiz ve kenarsız olarak kendi kendini temizleme için ideal şekilde tasarlanmıştır. Son derece verimli şekilde konumlandırılmış güçlü nozul sistemi ördek, sürgü, lazımlık ve benzeri malzemelerin optimum temizliğini sağlar.

"One Touch" teknolojisiyle programları zahmetsizce kumanda edebilirsiniz. Program başlatmadan analizlere kadar her şey membran tuş takımı üzerinden yapılır.

DİĞER ÜSTÜN ÖZELLİKLER:

1. Komple buhar sızdırmaz sistem


Avantajlarınız

- Patojen yayılma riski yoktur
- Yüksek iş ve hijyen güvenliği
- Optimize edilmiş nem koruması

2. Birbirini karşılıklı denetleyen ısı sensörleri sayesinde A₀ değerlerinin kontrolü

Avantajlarınız

- Yüksek hijyen güvenliği (EN ISO 15883-1 ve -3* uyarınca)
- Dezenfeksiyon performansı ve temizleme prosesinin denetimi

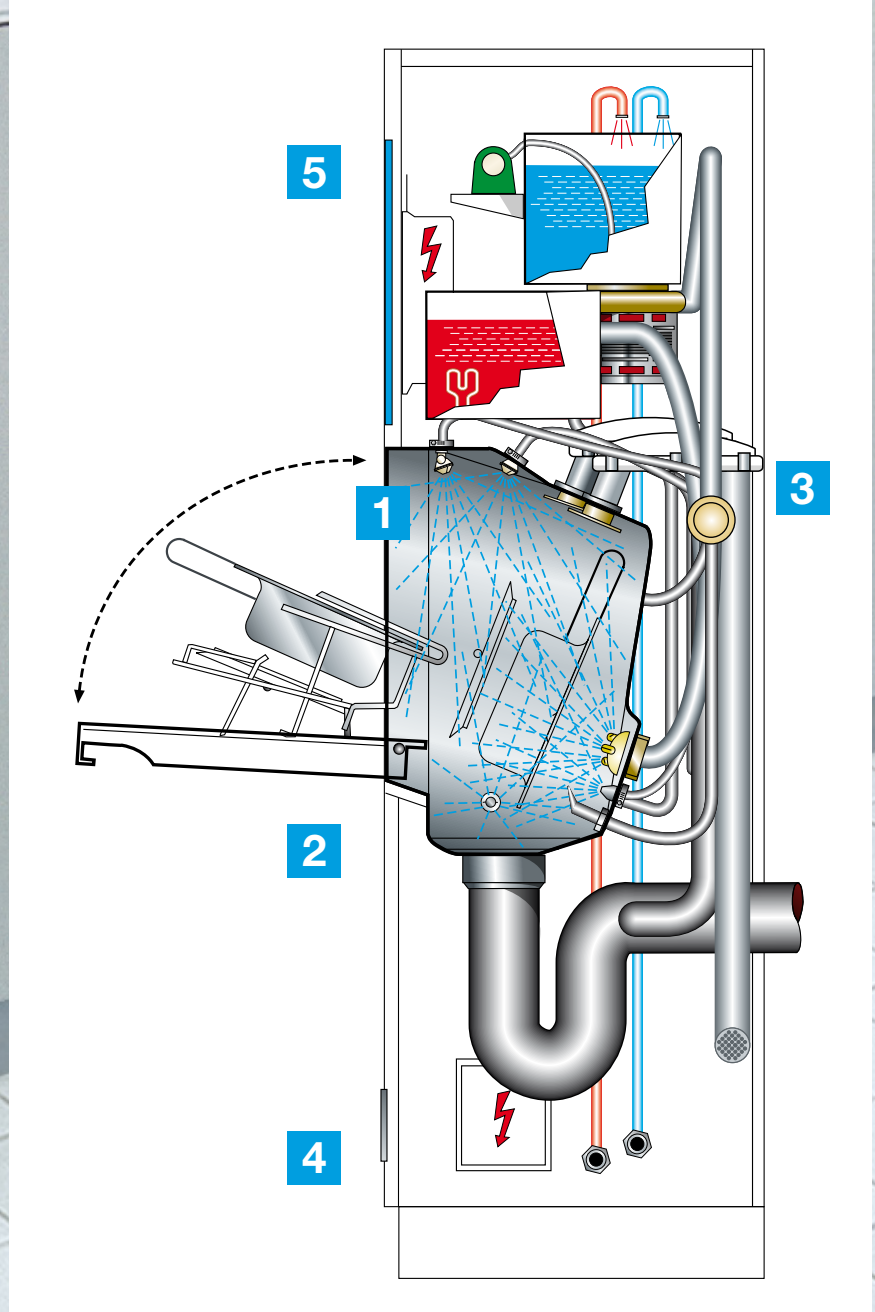

3. Her yüklemeden sonra tüm su taşıyan hatların sistem dezenfeksiyonu

Avantajlarınız

- Sistem tekrar kontamine olmaz
- Su taşıyan tüm bileşenlerde eşit buhar dağılımı ve dezenfeksiyon performansı

4. Deterjan (opsiyon), durulama maddesi ve su yumuşatıcı için belirgin kodlama

Avantajlarınız

- Proses güvenliği
- Kullanıcı güvenliği
- Personel için çalışma kolaylığı

5. Kimyasalların sensör kontrollü denetimi

Avantajlarınız

- Yüksek operasyon güvenliği
- Optimum kimyasal kullanımı
- Kireç oluşumu önlenir

MEIKO TOPIC – İlave özellikler



KURUTMA ETKİLİ SOĞUTMA (opsiyonel)

- Temizlenen malzemelerin filtrelenmiş havayla soğutulması ve kurutulması için
- Yıkama başına 8 litreye varan su tasarrufu (suyla yapılan soğutmaya kıyasla)

AYARLANABİLİR A₀ DEĞERİ:

- A₀ değerinin isteğe göre esnek olarak belirlenmesi için
- Seçilebilen değerler: A₀ 60, A₀ 600, A₀ 3.000 (3.000 sadece soğutma ve kurutma ile birlikte)
- Enfeksiyon kontrol ekibiniz ile koordinasyon halinde ve ihtiyaca göre

KIZILÖTESİ EL SENSÖRLÜ VE/VEYA AYAK ŞALTERLİ OTOMATİK KAPAK: (opsiyonel)

- Patojen yayılma riskini minimuma indirir
- İşleri kolaylaştırır

ÜÇ ADIMDA MÜKEMMEL A₀ DEĞERİNE ULAŞIN



Adım 1:

Malzemelere ve kirlilik derecesine göre programı seçin, tuşu basılı tutun.



Adım 2:

Ekranda seçilebilir A₀ değerleri olarak A₀ 60 / A₀ 600 / A₀ 3.000 gösterilir. İstenen değere ulaşıldığında tuşu bırakın.



Adım 3:


Tuş bırakıldığında program otomatik olarak başlar.

CLEAN SOLUTION ÇEMBERİ

Planlamadan kurulumu, bakımdan kullanıcı eğitimi ve kimyasal tedarikine kadar tüm aşamalarda sizi destekleyerek hijyenden ödün vermemenizi sağlarız.

Her şey tek kaynaktan:

MEIKO Clean Solution Çemberi, bir temizleme prosesinin ilgili tüm parametrelerini ve bunların birbiriyle olan ilişkilerini ve bağıntılarını dikkate alır. Merkezinde, “Sinner Çemberi” (süre, sıcaklık, mekanik, kimyasal) ile sembolize edilen temizlik performansı yer alır. Ancak prosesin başarılı olması doğru danışmanlık ve kullanım, uygun servis ve iş akışları ile MEIKO Academy tarafından verilen eğitimler aracılığıyla mümkündür. Böylece hijyen, ekoloji ve ekonomi garanti altına alınabilir.

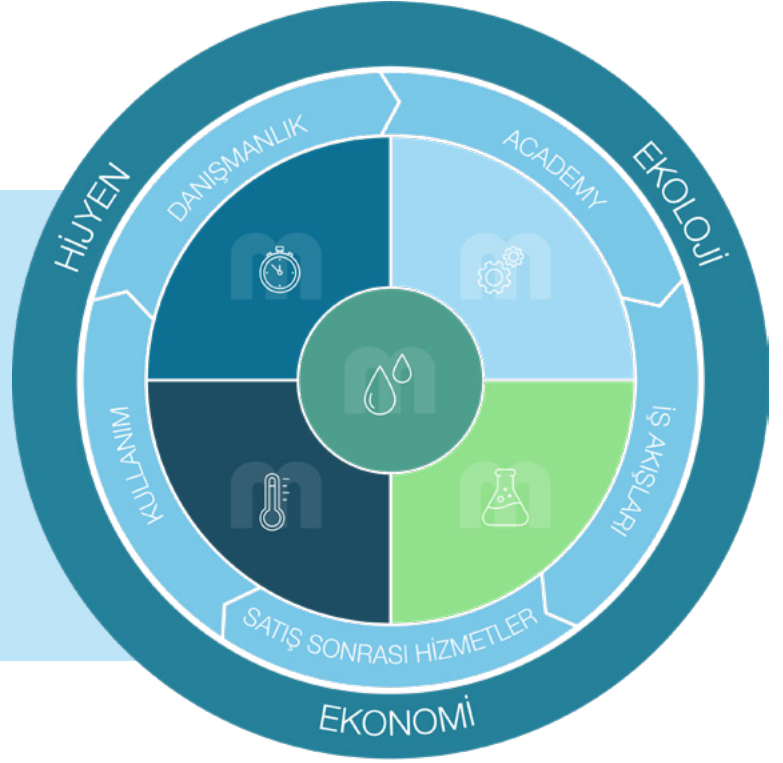

MEIKO KİMYASALLARI

İdeal temizlik sonuçları için teknoloji, deterjan (opsiyonel) ve durulama ürünü birbiriyle uyumlu olmalıdır. MEIKO onaylı DOYEN ürünleri ile bu mümkündür.

DOYEN kimyasallarının avantajları:

- TOPIC makinelerde kullanım için onaylı
- Optimum ve olabildiğince düşük dozaj miktarı
- Test edilmiş malzeme uyumluluğu



MEIKO TOPIC – Hepsi Bir Arada paketi




MEIKO PLANLAMA

İster tekli cihazlar ister kombine üniteler olsun, temizlik odanızın tamamını sizinle birlikte planlarız. Böylece müşterilerin beklentilerini ve yasal gereklilikleri eşit derecede karşılayan, hijyenik açıdan güvenli optimum çalışma alanları sağlarız.

Bizi farklı kılan özelliklerimiz:

- Yenileme ve modernizasyon projeleri ile yeni projeler için işletmeye özel temiz çözümler
- Kaynaksız bağlantılar
- Tüm parçaları birbiriyle kusursuz bir şekilde birleştiren su geçirmez yüzeyler
- Tamamen paslanmaz çelik

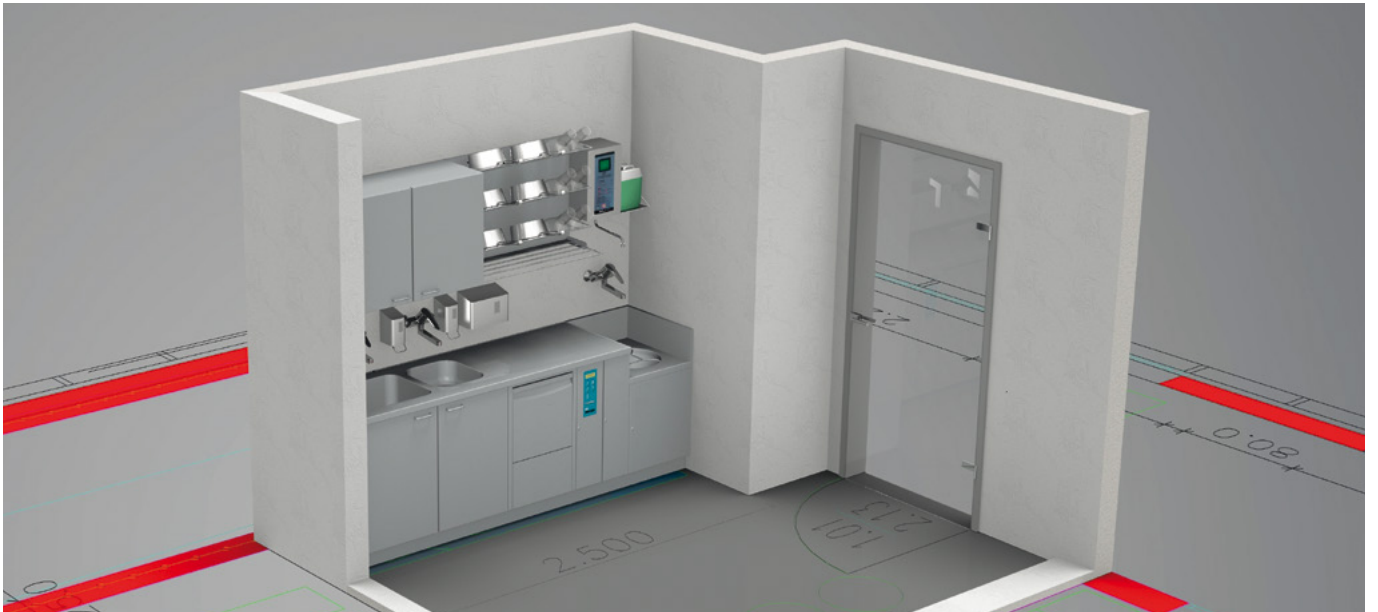

MEIKO ACADEMY

Kurum içi teknisyenlerinize de eğitim verdiğimiz biliyor muydunuz? *MEIKO Academy* ile uzun yıllar boyunca oluşturduğumuz bilgi birikimine doğrudan erişim sağlayabilirsiniz. Online ve yüz yüze eğitimlerimizle bilgi düzeyinizi teknolojinin bulunduğu son noktaya getiririz. Kurslarımız mikrobiyoloji dünyasından ilgi çekici bilgilerin yanı sıra enfeksiyon önleme ve yasal konuları da kapsar.



Eğitimlerimizle ilgili daha fazla bilgi için:
www.meiko-academy.com



MEIKO SERVİS

Servis departmanımız hızlı müdahale süreleri, yaygın servis ağı ve yüksek yedek parça stoğu ile öne çıkar. *MEIKO Servisin* sunduğu avantajlar:

Kolay ulaşılabilir yaygın servis ağı ve (*MEIKO Academy* tarafından) eğitilen yetkili servis personelleri.



MEIKO TOPIC – Modeller

Tekli cihazlar

MEIKO TOPIC 10 - Duvara monte model (boşaltma evyeli veya evyesiz)
Kolay zemin temizliği için yerden yüksek, duvara montaj



MEIKO TOPIC 10
Ebatlar (mm): G 500, D 450 veya 588, Y (makine) 1630



MEIKO TOPIC 10 A
Ebatlar (mm): G 1000, D 450 veya 588, Y (makine) 1630
Sıçrama önleyici (opsiyonel)

MEIKO TOPIC 20 - Ayaklı model (boşaltma evyeli veya evyesiz)
Hızlı kurulum için kaideli zemin montajı



MEIKO TOPIC 20
Ebatlar (mm): G 500, D 450 veya 588, Y 1730



MEIKO TOPIC 20 A
Ebatlar (mm): G 1000, D 450 veya 588, Y 1730
Sıçrama önleyici (opsiyonel)

MEIKO TOPIC – Modeller

Tekli cihazlar

MEIKO TOPIC 40 – Tezgahaltı model (el yıkama evyeli veya evyesiz)

Çalışma ve depolama alanını genişletmek için kaideli zemin montajı

- Kimyasallar için kilitlenebilir depolama dolabı standart olarak mevcuttur
- Ek ücret karşılığında tezgah sırtı eklenebilir



MEIKO TOPIC 40
Ebatlar (mm): G 900, D 600, Y 900



MEIKO TOPIC 40 B
Ebatlar (mm): G 900, D 600, Y 1000
El yıkama evyesi: G 340, D 370, Y 150

Kombine üniteler

MEIKO kombine üniteler, ayaklı veya tezgahaltı modellerle birlikte farklı tasarımlarda mevcut olup, bu sayede ortam koşullarına ve gereksinimlere uyum sağlarlar. Bakım tesislerinin günlük işleyişinde çalışmayı kolaylaştıran birçok fonksiyon sunarlar.

SAN 14 B / MEIKO TOPIC

Ayaklı veya tezgahaltı model ile birlikte boşaltma evyesi ünitesi, el yıkama evyesi

Ebatlar (mm): G 1400, D 600, Y 1000
Boşaltma evyesi ünitesi: Y 700
Boşaltma evyesi: Ø 362
El yıkama evyesi: G 340, D 370, Y 150



SAN 19B - Ayaklı veya tezgahaltı model ile birlikte boşaltma evyesi ünitesi, el yıkama evyesi ve dolap (500 mm)

Ebatlar (mm):	G 1900, D 600, Y 900
Boşaltma evyesi ünitesi:	Y 700
Boşaltma evyesi:	Ø 362
El yıkama evyesi:	G 340, D 370, Y 150
Dolap alanı:	G 500



SAN 20 BW - Ayaklı veya tezgahaltı model ile birlikte boşaltma evyesi ünitesi, el yıkama evyesi, evye ve dolap (600 mm)

Ebatlar (mm):	G 2000, D 600, Y 1000
Boşaltma evyesi ünitesi:	Y 700
Boşaltma evyesi:	Ø 362
El yıkama evyesi:	G 340, D 370, Y 150
Evye:	G 500, D 400, Y 300
Dolap alanı:	G 600



SAN 24 BW - Ayaklı veya tezgahaltı model ile birlikte boşaltma evyesi ünitesi, evye ve dolap (1000 mm)

Ebatlar (mm):	G 2400, D 600, Y 900
Boşaltma evyesi ünitesi:	Y 700
Boşaltma evyesi:	Ø 362
Evye:	G 500, D 400, Y 300
Dolap alanı:	G 1000



SAN 29 BW - Ayaklı veya tezgahaltı model ile birlikte boşaltma evyesi ünitesi, el yıkama evyesi, evye ve dolap (1500 mm)

Ebatlar (mm):	G 2900, D 600, Y 900
Boşaltma evyesi ünitesi:	Y 700
Boşaltma evyesi:	Ø 362
El yıkama evyesi:	G 340, D 370, Y 150
Evye:	G 500, D 400, Y 300
Dolap alanı:	G 1500



MEIKO TOPIC – Aksesuarlar

MEIKO temizleme ve dezenfeksiyon teknolojilerine ilave olarak kapsamlı bir aksesuar ve ekipman portföyü sunuyoruz. Böylece güvenli ve ergonomik bir çalışma ortamı ve hasta bakım malzemelerinin hijyenik şekilde saklanması garanti ediyoruz. Sizin için de memnuniyetle işletmenize özel çözüm önerileri hazırlayabiliriz!



Kuruma ve depolama rafları*

- Dezenfekte edilen ördekler, sürgüler ve kaplar için ızgara taban raflı veya damlalıklı
- 500 ila 1400 mm genişliklerde mevcuttur



Duvar rafı*

- Yüksekliği ayarlanabilir raflar
- Tüm genişliklerde mevcuttur (derinlik 350 mm)



Kapaklı duvar dolapları**

- Menteşe kapaklı ve 1 ara raflı dolaplar
- 500/600/800/1000/1200/1500 mm genişliklerde mevcuttur
- Opsiyonel: Işık paneli ve aydınlatma



Açık duvar dolapları

- Açık depolama için 1 ara raflı dolaplar
- 500/1000/1200 mm genişliklerde mevcuttur



Kombine yıkama ünitesi*

- Kombine üniteler için çekmeceli vs. alt dolaplar
- Farklı genişlik ve yüksekliklerde planlanabilir




Boşaltma evyesi ünitesi*


- Opsiyonel olarak entegre sifonlu standart model
- Yıkama ve dezenfeksiyon makinesinden bağımsız olarak kullanılabilir

* Fotoğraflar opsiyonel donanımlar içermektedir


** Opsiyonel: Işık paneli ve aydınlatma

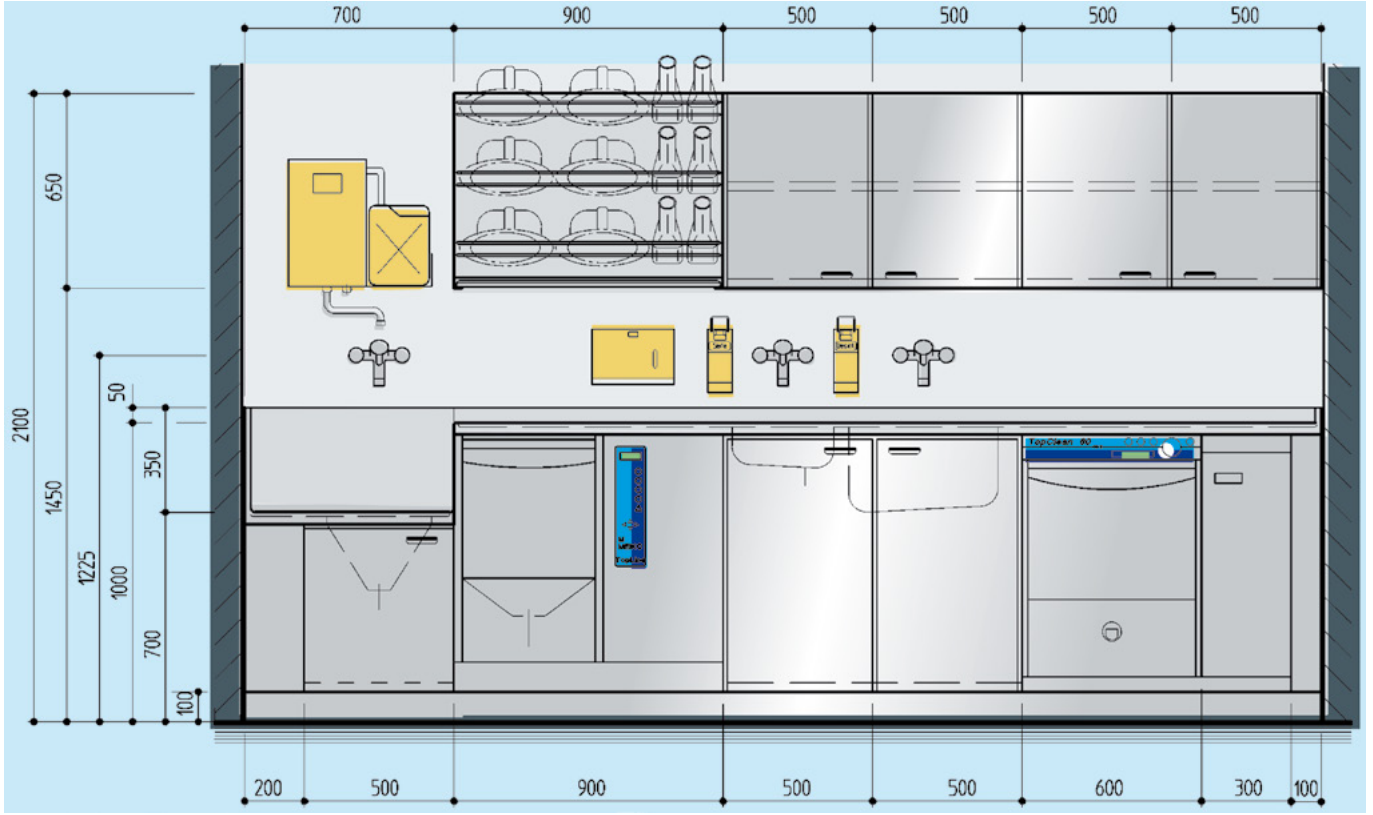


MEIKO TOPIC ayaklı model

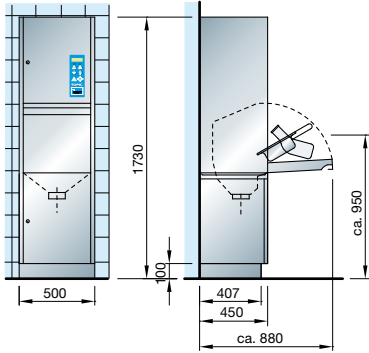

MEIKO TOPIC küçük kombine ünite

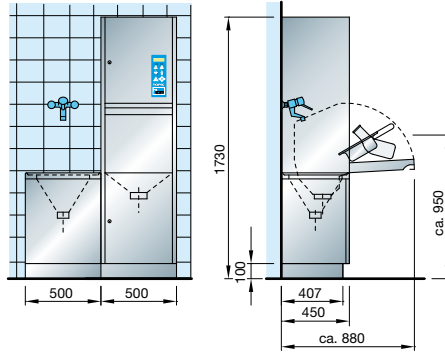

MEIKO TOPIC tezgahaltı model

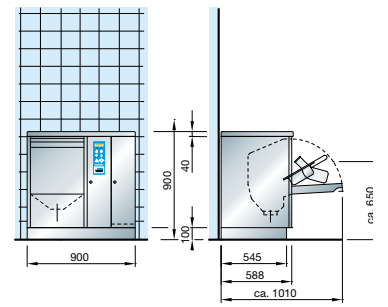

		TOPIC	
		400 V	230 V
Toplam bağlantı gücü	kW	4,6	2,8
Besleme suyu bağlantısı, soğuk su		G ¾"	
Besleme suyu bağlantısı, sıcak su 45-60°C		G ¾"	
Akış basıncı	bar	1-5	
Akış	l/dk	18	
Gider		DN 100	
Gürültü seviyesi	dB(A)	48,2	



The clean solution

MEIKO Clean Solutions Turkey Temizlik Çözümleri Ticaret Ltd. Şti.
Ünalan Mah. Libadiye Cad. No: 82 E · Emaar Square Heights E Blok D: 49 (608)
34700 Üsküdar - İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 510 82 00 · info@meiko.com.tr · www.meiko.com

Üretici:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Almanya
Tel: +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com

