Professionele oplossingen voor infectiepreventie

MEIKO
The clean solution

MEIKO TopLine M2

Bedpanspoelers





MEIKO Care

MEIKO TopLine M2



NAADLOZE, MOEITELOZE EN CONTACTLOZE BEDIENING

De TopLine M2 is meer dan alleen een reinigings- en desinfectieapparaat. Het is een assistent op wie u kunt vertrouwen voor de ondersteuning die u gedurende uw werkdag nodig heeft.

Mensen en technologie - samenwerken in perfecte harmonie.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

Slim assistentiesysteem met **AUTOMATISCHE LAAD-DETECTIE** en automatische deuropening en -sluiting (beide optioneel) – bespaart tijd en moeite

Krachtig **REINIGINGSSYSTEEM** met efficiënte wasmechanica – voor optimale reinigingsresultaten

Intuïtief **BEDIENINGSCONCEPT** met glazen bedieningspaneel en signaalconcept – voor meer veiligheid en efficiëntie

CONNECTIVITEIT via de MEIKO Connect app – vereenvoudigt documentatie en monitoring

Verbeterde **VEILIGHEID** met flexibele A_0-waarden tot 12.000 – betrouwbare prestaties die meebewegen met veranderende eisen

De MEIKO 360° **ALLES-IN-EEN OPLOSSING** – inclusief chemie, service, de MEIKO Academy en inrichtingsadvies



MEIKO

The clean solution

MEIKO TopLine M2 – Technologie

TopLine M2 machines zijn gebouwd om de dagelijkse uitdagingen in zorg-omgevingen aan te gaan. Hoogtepunten zijn onder meer een waskamer met een extra, bovenin gemonteerde wasarm voor een grondige uitwendige reiniging van zorghulpmiddelen, en geïntegreerde binnenverlichting die zowel het beladen als de visuele inspectie bij het uitladen vergemakkelijkt - zelfs tijdens nachtdiensten.

En aangezien de hygiëne-eisen met de dag strenger worden, helpt de *TopLine M2* u aan de veilige kant te blijven met de volgende functies.

Steam Stop

Een volledig stoomdicht systeem dat stoom gecontroleerd en veilig afvoert

Voordelen
- Voorkomt effectief het vrijkomen van ziektekiemen
- Verbetert de veiligheid en hygiëne op de werkplek
- Vermindert vochtschade aan de machine en de ruimte

Thermo Control

Twee temperatuursensoren die elkaar bewaken en precies daar meten waar het telt – op het koudste punt

Voordelen
- Controleert de naleving van A_0 waarden
- Zorgt voor betrouwbare desinfectieprestaties
- Voldoet aan de eisen van EN ISO 15883-1 en -3

Chem Code

Kleur- en vormgecodeerde chemieaansluitingen voor naglansmiddel met waterontharder en voor reinigingsmiddel

Voordelen
- Voorkomt op betrouwbare wijze verwisselingen
- Zorgt voor duidelijke workflows
- Maakt het dagelijkse werk eenvoudiger

Chem Control

Sensorgestuurde bewaking van het doseervolume en de werking van het naglansmiddel met waterontharder en het reinigingsmiddel

Voordelen
- Optimaliseert het gebruik van naglansmiddel met waterontharder en reinigingsmiddel
- Waarborgt procesbetrouwbaarheid conform EN ISO 15883-1 en -3
- Voorkomt kalkafzetting en daaruit voortvloeiende schade

System Disinfect+

Systeemdesinfectie van de waskamer, waterdragende leidingen, sproeiers en watertank tijdens elke cyclus

Voordelen
- Voldoet aan de huidige standaardvereisten volgens EN ISO 15883-1
- Voorkomt op betrouwbare wijze besmetting
- Zorgt voor consistente desinfectieprestaties door een gelijkmatige stoomverdeling





MEIKO
The clean solution

Power Clean++

Reinigingssysteem met een telescopische roterende sproeier, optimaal geplaatste wassproeiers, een extra wasarm en bijzonder hoge waterdruk

Voordelen
- Verhoogt de effectiviteit van de uitwendige en inwendige reiniging, zelfs bij een grote verscheidenheid aan bedpanvormen
- Verwijdert effectief ziektekiemen en spoelt ze actief weg
- Levert optimale reinigingsprestaties dankzij de combinatie van mechanica, temperatuur en reinigingsmiddel

Cool Touch


Terugkoeling met gefilterde lucht - inclusief drogend effect

Voordelen
- Koelt af met kiemvrije lucht dankzij HEPA-filtratie
- Zorgt ervoor dat zorghulpmiddelen direct weer klaar zijn voor gebruik
- Vermindert het risico op besmetting in vergelijking met koeling op waterbasis

Signal Concept

MEIKO's signaalconcept: kleurgecodeerde indicatoren op de deurgreep en het bedieningspaneel tonen in één oogopslag de actuele status

Voordelen
- Geeft duidelijk de status van de machine aan (blauw: klaar voor gebruik, groen: programma loopt, rood: belangrijke melding)
- Biedt duidelijke begeleiding met voortgangsbalken, statusindicatoren en meldingen in begrijpelijke taal
- Intuïtieve, eenvoudige bediening

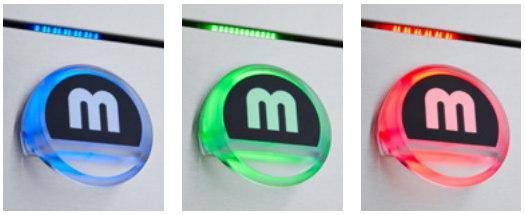

A_0 12.000

Vrij instelbare A_0 waarden tot A_0 12,000

Voordelen
- Flexibele instellingen voor infectie-uitbraken en isolatieafdelingen
- Garandeert betrouwbare resultaten, zelfs bij steeds strengere hygiëne-eisen, conform EN ISO 15883-1 en -3

Smart Connect

Connectiviteit voor het ophalen van gegevens via Bluetooth of via de optionele LAN/WLAN-module bij aansluiting op het interne netwerk

Voordeel
- Veilige opslag van alle relevante machinegegevens
- Directe toegang tot de machinegegevens via MEIKO BlueVision en de MEIKO Connect app
- Laadlogboek (bedrijfslogboek) met gedocumenteerde hygiënestatus
- Gecentraliseerd overzicht van alle in-house MEIKO machines

Load Detect

OPTIE

Automatische programmakeuze op basis van het type zorghulpmiddelen plus automatische programmastart

Voordelen
- Bespaart tijd en vermindert de werkdruk
- Vermindert bedieningsfouten aanzienlijk
- Maakt contactloze bediening mogelijk in combinatie met de automatische deuropening en -sluiting

MEIKO TopLine M2 – Machine highlights



AUTOMATISCHE DEUROPENING EN -SLUITING MET INFRARODE HANDSENSOR EN/OF VOETSCHAKELAAR (optioneel)

- Minimaliseert het risico verspreiding van ziekteverwekkers
- Vereenvoudigt het werk in zorgomgevingen



MEIKO CONNECT APP (optioneel)

- Alle belangrijke informatie in één oogopslag (procesparameters, fout- en informatiemeldingen, enz.)
- Download nu gratis:




ONTDEK HET OP Google Play

*De automatische laaddetectie is beschikbaar voor geselecteerde houders en zorghulpmiddelen. Om de compatibiliteit te controleren en te waarborgen dat het reinigings– en desinfectieproces kan worden gevalideerd, verzoeken wij u vooraf te informeren naar de specifieke configuratie voor uw toepassing door contact op te nemen met uw MEIKO-specialist op het gebied van medische hulpmiddelen - laat ons de resultaten weten.


MEIKO
The clean solution



MEIKO TopLine M2 – Alles uit één hand

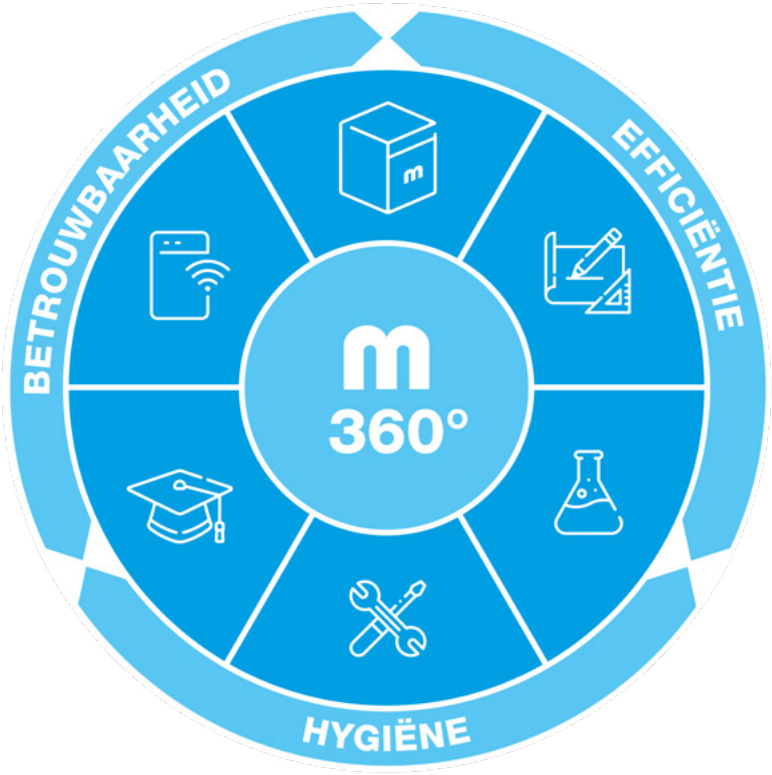

MEIKO 360°: HOLISTISCH VAN OPZET. VAKKUNDIG GELEVERD.

Perfecte reiniging is nooit toevallig. Het is het resultaat van een harmonieuze samenwerking van alles. MEIKO 360° combineert alle kritische factoren in één geïntegreerde oplossing: van deskundig inrichtingsadvies, hoogwaardige technologie en perfect op elkaar afgestemde chemie tot betrouwbare service, slimme connectiviteit en kennisoverdracht via de MEIKO Academy.

Samen met u smeden we tal van afzonderlijke onderdelen tot één krachtig geheel – hygiënisch, efficiënt en betrouwbaar.

MEIKO CHEMIE

Om optimale reinigingsresultaten te bereiken, heeft u precies de juiste combinatie van technologie, reinigingsmiddel (optioneel) en naglansmiddel nodig. Dat is wat u krijgt met Doyen producten die door MEIKO zijn goedgekeurd.

Voordelen van Doyen chemie:

- Goedgekeurd voor gebruik in TopLine M2 machines
- Optimale dosering, zo laag mogelijk gehouden
- Getest op materiaalcompatibiliteit



MEIKO TopLine M2 – Alles uit één hand



Naast onze MEIKO reinigings- en desinfectietechniek bieden we ook een breed scala aan inrichtingselementen en meubels voor een veilige en ergonomie werkomgeving.

MEIKO INRICHTINGSADVIES

Of u nu een stand-alone machine of een verpleeg-combinatie nodig heeft, we werken samen met u aan de inrichting van uw gehele spoelruimte. Dat is de beste manier om uiterst hygiënische en ergonomisch geoptimaliseerde werkruimtes te creëren die voldoen aan zowel de verwachtingen van de klant als de wettelijke vereisten.



Onze kenmerken zijn onder meer:

- Op maat gemaakte reinigingsoplossingen voor refits, renovaties en nieuwbouwprojecten
- Naadloze aansluitingen
- Vlakke oppervlakken waarin afzonderlijke componenten naadloos zijn geïntegreerd
- Volledig van roestvrij staal


MEIKO TopLine M2 – Alles uit één hand

The clean solution

MEIKO ACADEMY

Wist u dat wij ook trainingen aanbieden voor uw eigen technici? De MEIKO Academy geeft directe toegang tot de kennis die we in de loop van decennia hebben opgebouwd. Onze online en fysieke trainingen brengen u op de hoogte van de nieuwste technologie. De trainingen behandelen ook belangrijke onderwerpen uit de wereld van microbiologie en infectiepreventie, evenals belangrijke juridische kwesties.



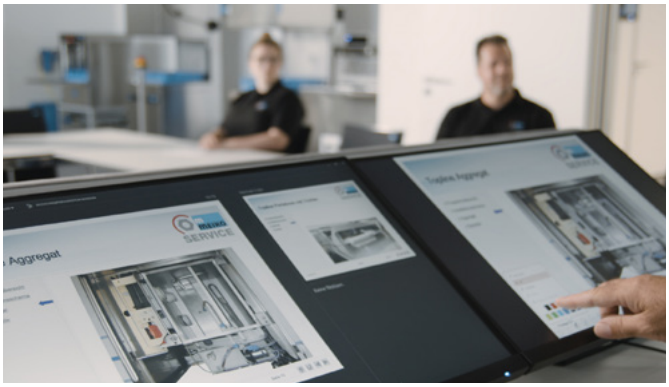

Lees meer over onze trainingsprogramma's op:
www.meiko-academy.com

MEIKO SERVICE

Onze serviceteams bieden een snelle response, korte aanrijtijden en servicebussen die zijn uitgerust met een ruime voorraad reserveonderdelen.

Voordelen van *MEIKO Service*: 24/7 service hotline, 365 dagen per jaar bereikbaar, geautoriseerde servicemonteurs opgeleid aan de *MEIKO Academy*.



MEIKO TopLine M2 – Modellenoverzicht

MEIKO TopLine 10 M2

De compacte *TopLine 10 M2* wordt aan de wand gemonteerd voor vrije ruimte onder de machine, wat zorgt voor een nog betere hygiëne rondom de machine. Dit ontwerp vergemakkelijkt het schoonmaken en voorkomt dat vuil zich in hoeken ophoopt.



MEIKO *TopLine 10 M2* – Wandmodel

Afmetingen (mm): B 500, D 450, H 1630



MEIKO *TopLine 10A M2* – Wandmodel met uitstortunit

Afmetingen (mm): B 1000, D 450, H (machine) 1630

MEIKO TopLine 20 M2

Snel te installeren en te gebruiken: het vloermodel van de *TopLine 20 M2* met plint is in een handomdraai operationeel! De afmetingen (500 × 450 × 1730 mm B/D/H) en de prettige werkhoogte maken dit model bijzonder comfortabel en ergonomisch in gebruik.



MEIKO *TopLine 20 M2* – Vloermodel met plint

Afmetingen (mm): B 500, D 450, H 1730



MEIKO *TopLine 20A M2* – Vloermodel met plint en uitstortunit

Afmetingen (mm): B 1000, D 450, H (machine) 1730

MEIKO TopLine M2 – Modellenoverzicht

MEIKO TopLine 30 M2

Met een aansluitklaar installatieframe is de *TopLine 30 M2* vrijwel volledig weggewerkt in de betegelde muur. Dit inbouwmodel is voorzien van een extra centrale aansluiting die compatibel is met alle standaard toilettypen. Het bespaart een enorme hoeveelheid ruimte, waardoor het de perfecte keuze is voor installatie in en-suite badkamers bij patiënten- of isolatiekamers.



MEIKO *TopLine 30 M2* – Inbouwmodel

Afmetingen (mm): B 650, D 450, H 2210



MEIKO *TopLine 30 WC M2* – Inbouwmodel met centrale wc-aansluiting

Afmetingen (mm): B 650, D 450, H 2210

MEIKO TopLine 40 M2

Het *TopLine 40 M2* tafelmodel is de perfecte aanvulling op bestaande opstellingen. Deze compacte oplossing is de ideale manier om extra werkoppervlak in de vuile spoelruimte te creëren.



MEIKO *TopLine 40 M2* – Tafelmodel voor extra werkoppervlak

Afmetingen (mm): B 900, D 600, H 900



MEIKO *TopLine 40 M2* – Tafelmodel met wastafel

Afmetingen (mm): B 900, D 600, H 1000
Wastafel: B 340, D 370, H 150

MEIKO TopLine M2 – Modellenoverzicht

MEIKO TopLine M2 als verpleegcombinatie

Er is meer nodig dan een MEIKO bedpanspoeler om een functionele spoelruimte te creëren. U heeft ook voldoende werkoppervlak, opslagruimtes, uitstortunits en wastafels nodig om processen optimaal te laten verlopen. Onze verpleegcombinaties in kastvorm zijn verkrijgbaar in diverse configuraties, afgestemd op uw specifieke eisen en de indeling van uw spoelruimte.

U kunt dus kiezen of u een uitstortunit, een extra wastafel of een standaard wastafel wilt. En als u met onderkasten wat extra werkoppervlak wilt creëren, is daar ook een model voor!



SAN 14 / MEIKO TopLine 40 M2
met uitstortunit

Afmetingen (mm):	B 1400, D 600, H 900
Uitstortunit:	H 700
Uitstort:	Ø 362



SAN 14 B / MEIKO TopLine 40 M2
met uitstortunit en wastafel

Afmetingen (mm):	B 1400, D 600, H 1000
Uitstortunit:	H 700
Uitstort:	Ø 362
Wastafel:	B 340, D 370, H 150

The clean solution

SAN 19B / MEIKO TopLine 40 M2
met uitstortunit, wastafel en onderkast 500 mm

Afmetingen (mm):	B 1900, D 600, H 900
Uitstortunit:	H 700
Uitstort:	Ø 362
Wastafel:	B 340, D 370, H 150
Kastruimte:	B 500



SAN 20W / MEIKO TopLine 40 M2
met uitstortunit, spoelbak en onderkast 600 mm

Afmetingen (mm):	B 2000, D 600, H 900
Uitstortunit:	H 700
Uitstort:	Ø 362
Spoelbak:	B 500, D 400, H 300
Kastruimte:	B 600



SAN 20BW / MEIKO TopLine 40 M2
met uitstortunit, wastafel, spoelbak en onderkast 600 mm

Afmetingen (mm):	B 2000, D 600, H 1000
Uitstortunit:	H 700
Uitstort:	Ø 362
Wastafel:	B 340, D 370, H 150
Spoelbak:	B 500, D 400, H 300
Kastruimte:	B 600



SAN 24W / MEIKO TopLine 40 M2
met uitstortunit, spoelbak en onderkast 1000 mm

Afmetingen (mm):	B 2400, D 600, H 900
Uitstortunit:	H 700
Uitstort:	Ø 362
Spoelbak:	B 500, D 400, H 300
Kastruimte:	B 1000



SAN 29BW / MEIKO TopLine 40 M2
met uitstortunit, wastafel, spoelbak en onderkast 1500 mm

Afmetingen (mm):	B 2900, D 600, H 1000
Uitstortunit:	H 700
Uitstort:	Ø 362
Wastafel:	B 340, D 370, H 150
Spoelbak:	B 500, D 400, H 300
Kastruimte:	B 1500



MEIKO TopLine M2 – Accessoires en toebehoren

Naast de reinigings- en desinfectietechniek biedt MEIKO een uitgebreid assortiment accessoires en toebehoren. Deze bevorderen veilige, ergonomische werkomstandigheden en maken hygiënische opslag van zorghulpmiddelen mogelijk. Wij ontwikkelen ook graag maatwerk oplossingen, afgestemd op uw behoeften!



Droog- en opslagrek*
- Voor gedesinfecteerde urinalen en bedpannen, met opslagrooster of afdruiprek
- Verkrijgbaar in breedtes van 500 tot 1400 mm



Wandschappen*
- Met in hoogte verstelbare planken
- Verkrijgbaar in alle breedtes (diepte 350 mm)



Gesloten wandkasten**
- Met scharnierdeuren en één tussenschap
- Verkrijgbaar in breedtes 500/600/800/1000/1200/1500 mm
- Optioneel: lichtbak en lamp



Open wandkasten
- Voor open opslag met één tussenschap
- Verkrijgbaar in breedtes 500/1000/1200 mm



Kitchenette*
- Onderkast met laden en andere functies voor verpleegcombinaties
- Verkrijgbaar in verschillende breedtes en hoogtes




Uitstortunit*
- Standaard model optioneel uitgerust met eïntegreerde spoeling voor uitstort
- Kan onafhankelijk van de bedpanspoeler worden bediend

* De beelden tonen optionele functies/accessoires
** Optioneel: lichtbak en lamp


MEIKO TopLine M2 – Technische gegevens

MEIKO *TopLine M2* Vloermodel

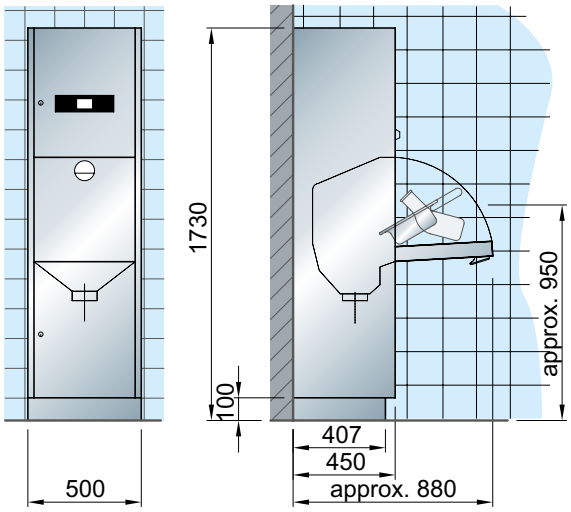


		TopLine M2	
		400 V	230 V
Totale aansluitwaarde	kW	4,6	2,8
Aansluiting toevoerwater, koud water		G ¾“	
Aansluiting toevoerwater, warm water 45-60 °C		G ¾“	
Stromingsdruk	bar	1-5	
Debiet	l/min	18	
Afvoer		DN 100	
Geluidsniveau	dB(A)	48,2	

MEIKO *TopLine M2* Tafelmodel

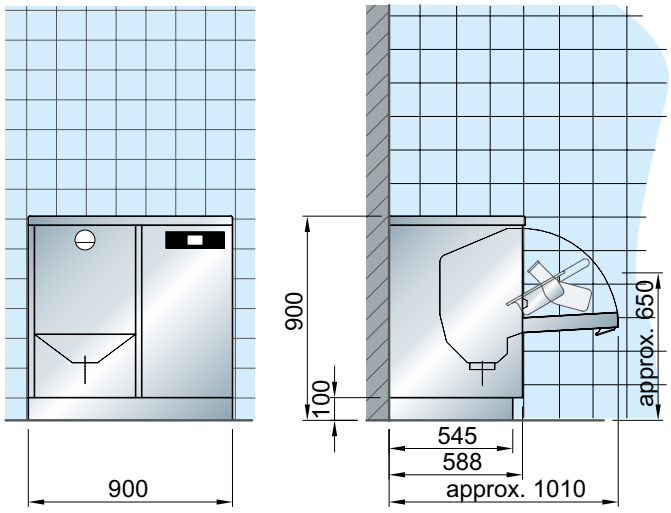

MEIKO *TopLine M2* Vloermodel met uitstortunit

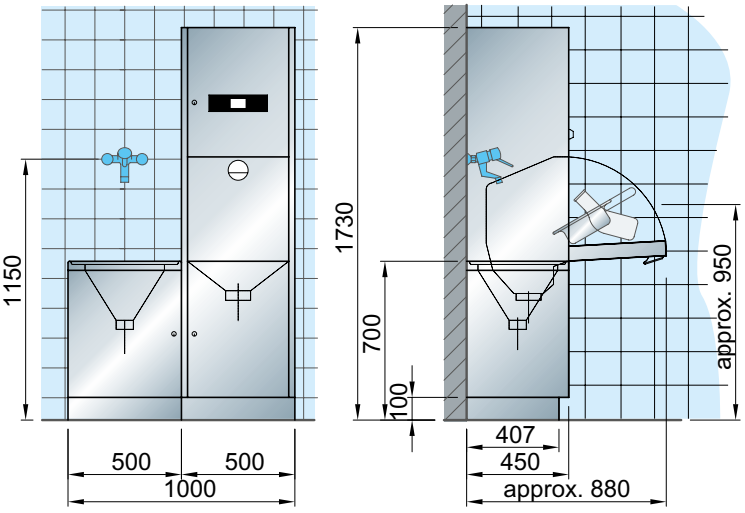

MEIKO NEDERLAND B.V.
Aploniastraat 40 · 3084 CC Rotterdam, Nederland
Tel. +31 88 1050000 · info@meiko.nl · www.meiko.com

MEIKO Clean Solutions Belgium BV
Industriepark-Drongen 15C · 9031 Gent, België
Tel. +32 78 150279 · info@meiko-belgium.be · www.meiko.com

Fabrikant:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Duitsland
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com

720.070.05.09.26/TLM2/NL/

Wijzigingen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen voorbehouden